

Ирригатор для полости рта

**WATERPIK WP 70E2**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

# WATERPIK WP-70E2

Ирригатор для полости рта WaterPik WP-70E2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220 В  
Давление воды - 220 - 620 кПа  
1200 импульсов в минуту.



**ИМ05**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Когда Вы используете электрические приборы, особенно если до прибора могут добраться дети, необходимо следовать основным мерам предосторожности.

**ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

- Всегда отключайте прибор от сети после использования
- Не трогайте электрический шнур влажными руками.
- Не оставляйте прибор там, откуда он может упасть и попасть в воду.
- Не используйте прибор во время принятия ванн.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не трогайте прибор, если он упал в воду. В этом случае, выключите его из сети немедленно.

### **ВНИМАНИЕ:**


Чтобы снизить риск ожогов, электрического шока, возгорания, серьезных повреждений мягких тканей полости рта:


- Не используйте прибор, если у него поврежден провод или вилка, если он не работает должным образом, если он падал, был поврежден или погружался в любую жидкость. Свяжитесь с представителями WaterPik Technologies.
- Проинструктируйте и присматривайте за детьми и людьми с ограниченными возможностями, чтобы они пользовались прибором правильно.

- Не направляйте струю воды под язык, в ухо, нос и другие части тела, для которых не предназначен прибор. Давление струи воды, производимое прибором, может нанести серьезный вред в этих участках тела. Изучите инструкцию по применению для правильного использования прибора.
- Используйте этот продукт только для тех целей, которые описаны в инструкциях, или так, как Вам рекомендует Ваш стоматолог.
- Используйте только те насадки и аксессуары, которые рекомендованы WaterPik Technologies.
- Не отделяйте эластичную насадку Pik Pocket от прозрачной части насадки. Если она отделилась по какой-то причине, выбросьте обе части насадки и впоследствии пользуйтесь новой насадкой Pik Pocket.
- Наполняйте резервуар водой или растворами (ополаскивающие или лечебные растворы), которые Вам рекомендовал Ваш стоматолог, и ничем другим. Жидкость не должна быть с осадком, вязкой. Иначе устройство засорится.
- Не опускайте и не засовывайте посторонние предметы в прибор.
- Располагайте прибор и провод прибора вдали от нагретых поверхностей.
- Не используйте прибор там, где использовались аэрозольные спреи.
- Не используйте растворы, которые содержат йод и отбеливающие элементы.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Не используйте, если у Вас в полости рта есть ювелирные украшения. Извлеките их перед применением.
- Не используйте прибор, если у Вас открытая рана на языке.
- Если доктор порекомендовал Вам принимать антибиотики перед процедурами по гигиене полости рта, обязательно проконсультируйтесь у Вашего стоматолога перед использованием прибора WaterPik, или любого другого устройства для гигиены полости рта.


**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.**

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

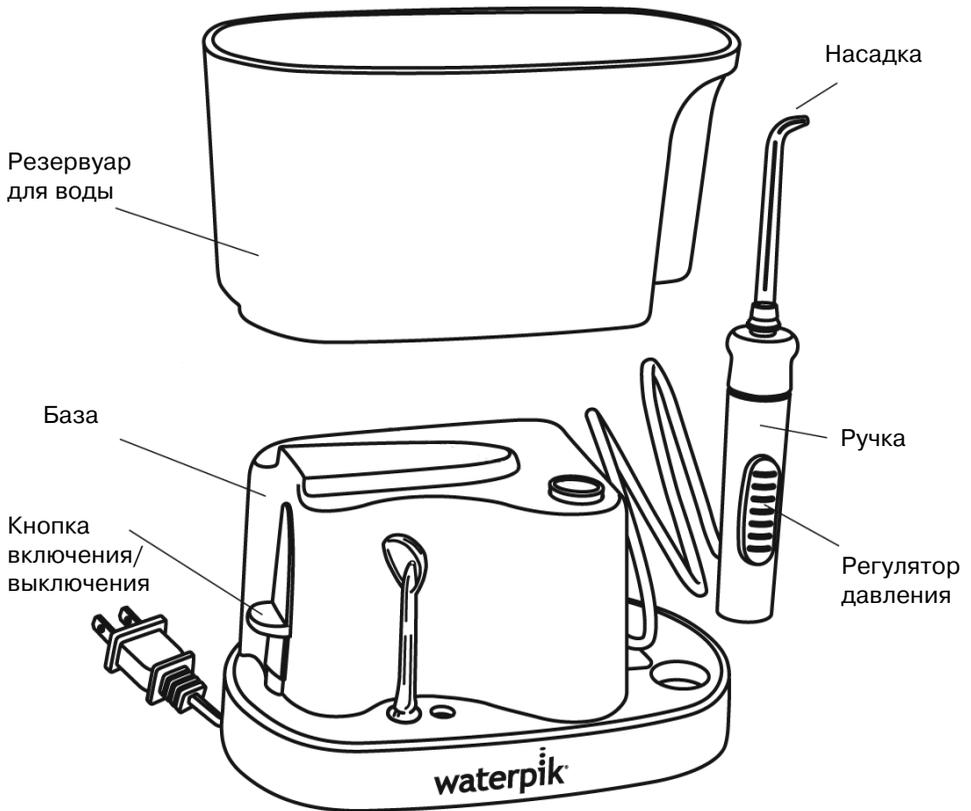


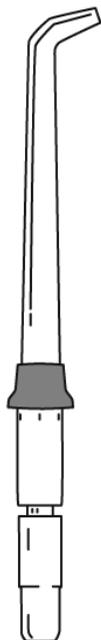

Стандартная  
Насадка

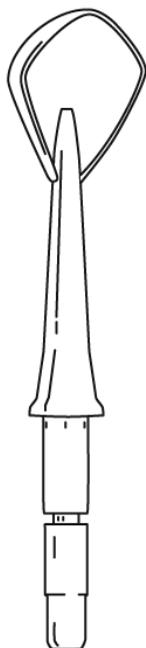

Насадка для  
чистки языка

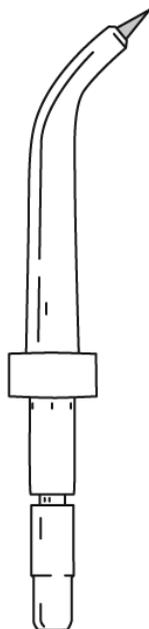

Насадка Pik Pocket  
(для чистки десневых  
карманов, **не входит  
в комплектацию  
прибора**)

## **ПЕРВЫЕ ШАГИ**



Подключите прибор к электрической сети. Если розетка имеет выключатель, убедитесь что розетка включена.

### **Подготовка резервуара.**

Снимите резервуар с базы. Заполните резервуар теплой водой. Расположите резервуар в базе приложив небольшое равномерное усилие сверху.

### **Установка и снятие сменных насадок.**

Вставьте насадку в отверстие на верхней поверхности ручки ирригатора. Цветное кольцо на насадке должно встать вплотную к ручке, если насадка установлена правильно. Для извлечения насадки нажмите на верхнюю часть ручки по направлению к шлангу и потяните насадку на себя из ручки ирригатора.


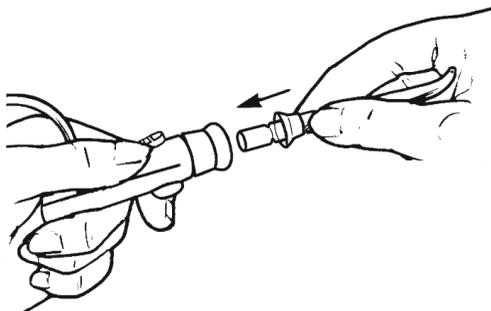
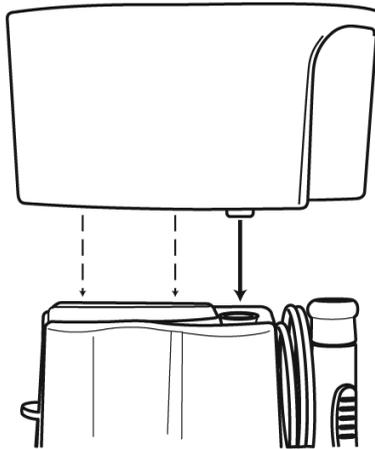


### **Выбор уровня давления воды.**

Установите переключатель давления на ручке ирригатора на нижний уровень. Постепенно увеличивайте давление до необходимого вам уровня, который вы выберете сами или вам подскажет ваш стоматолог.

### **Расположение во рту.**



Расположите насадку в ротовой полости. Направьте кончик насадки на зубы. Свободной рукой включите прибор. Установите давление воды на нужный Вам уровень.

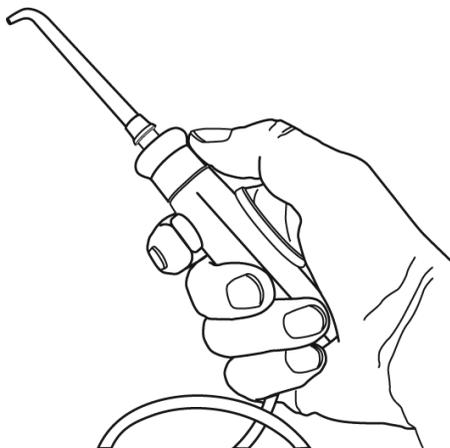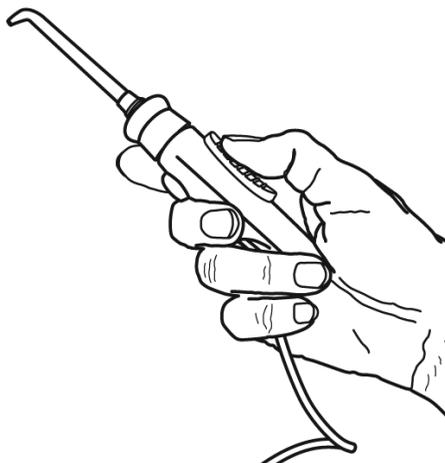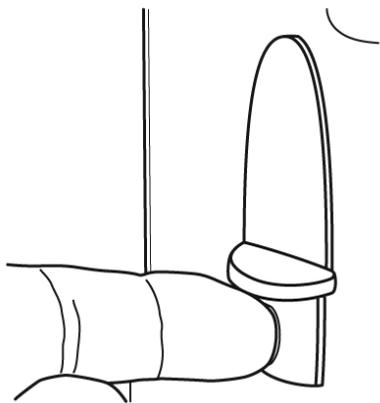

### Рекомендованная техника.

Направляйте струю воды под углом 90 градусов к линии десны. Смыкайте губы, чтобы избежать разбрызгивания воды, но не закрывайте рот, давая воде свободно вытекать наружу.

Для лучших результатов начинайте с боковых, дальних зубов, двигаясь к передним зубам. Перемещайте насадку от зуба к зубу, делая паузы между зубами. Продолжайте чистку до тех пор, пока зоны вокруг зубов и между зубами не станут чистыми.

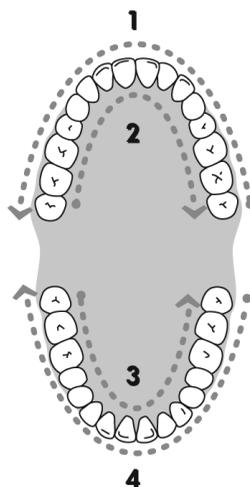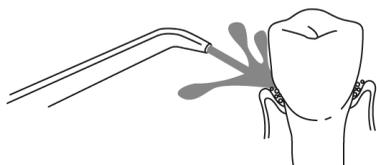


### Пауза.

Вы можете на время прекратить подачу воды нажатием кнопки паузы на ручке.

### После завершения чистки.



Выключите прибор. Вылейте оставшуюся жидкость из резервуара. Отключите прибор от сети.

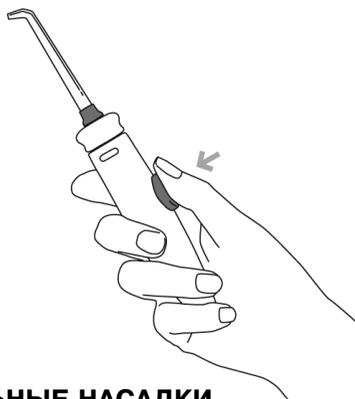

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ


### **Насадка Pik Pocket.**

Насадка Pik Pocket позволяет подавать воду или антибактериальный раствор непосредственно в периодонтальные карманы. Для этого расположите мягкий кончик насадки напротив зуба под углом в 45 градусов и аккуратно заведите насадку под линию десны, в карман. Включите прибор при минимальном уровне давления воды и производите чистку, продвигая насадку между зубами и вдоль линии десны. Продолжайте чистку до тех пор, пока резервуар не опустеет.

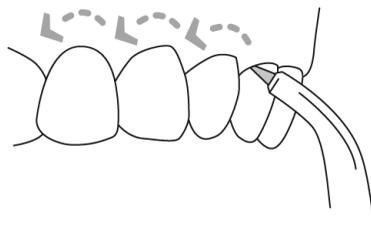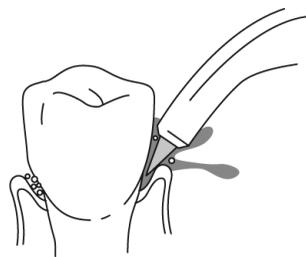

### **Насадка для чистки языка.**

Расположите насадку на языке, включите ирригатор при минимальном уровне давления воды и увеличивайте уровень давления до комфортной для Вас степени. Аккуратно расположите насадку на центр языка и, прилагая небольшое усилие, тяните насадку вдоль языка.

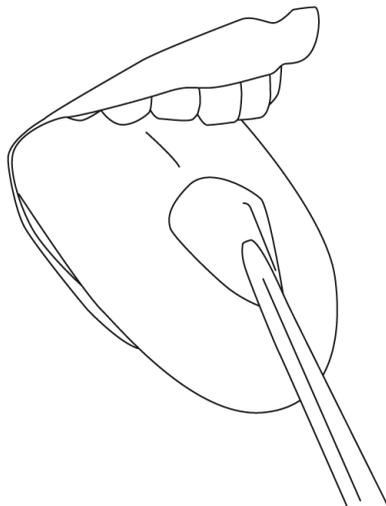

### **Использование растворов и ополаскивателей.**

WaterPik можно использовать с ополаскивателями и антибактериальными растворами. Спросите Вашего стоматолога о растворах, которые Вы сможете использовать.

**Важно:** использование антибактериальных растворов может сократить срок службы ирригатора WaterPik.

Если у Вас есть вопрос по использованию того или иного раствора в ирригаторе WaterPik, Вы можете задать его службе поддержки WaterPik Technologies. Жидкость не должна быть с осадком, вязкой. Иначе устройство засорится. После использования раствора необходимо прополоскать и промыть прибор. Частично наполните резервуар теплой водой. Направьте насадку в раковину, включите прибор и держите его включенным до полного опустошения резервуара. Это поможет продлить срок службы прибора и поддерживать чистоту прибора и насадок.

## **УХОД ЗА ИРРИГАТОРОМ WATERPIK**

Протирайте прибор сухой тканью или мягким неабразивным очистительным средством. Резервуар можно мыть мыльной водой и на верхних полках посудомоечной машины.

Перед очисткой отключите прибор от электросети.

Перед помещением прибора в место с отрицательной температурой, полностью опустошите резервуар и прибор от воды.

### **Сервисное обслуживание**

WaterPik не имеет частей, которые бы требовали сервисного обслуживания. Ремонт этого прибора должен осуществляться только в сервисном центре WaterPik Technologies. Официальный дистрибьютор в России — ЗАО "Арком". (812)327 0353. E-mail:arkom@arkom-org.com.

WaterPik Technologies уверяет пользователя этого прибора, что прибор полностью исправен и дает гарантию 1 год с даты покупки прибора. Пользователю потребуется предъявить документ, подтверждающий дату покупки,

и прибор в полной комплектации для обмена или ремонта прибора по гарантии. WaterPik Technologies обменяет прибор, если он использовался по назначению, в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к прибору, не был физически поврежден потребителем и работал только с насадками и аксессуарами, которые одобрены WaterPik Technologies.

Купить дополнительные насадки и аксессуары Вы можете у представителей WaterPik Technologies в России — ЗАО АРКОМ. Приглашаем Вас посетить наш сайт — [www.arkom-org.com](http://www.arkom-org.com)

## **ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Проблема	Причина	Действия по устранению неисправности
<b>Насадки и насадка для чистки языка</b> Протечки между насадкой и поворотным механизмом насадки	Насадка установлена неправильно	Снимите насадку и установите снова
<b>Насадка Pik Pocket</b> Течь мягкого кончика	Кончик порван	Замените насадку
<b>База прибора</b> Течет шланг к ручке	Поврежден шланг	Может быть заменен в авторизованном центре WaterPik, или Вы можете запросить ремонтный комплект для самостоятельного устранения неисправности
Течет резервуар	Резервуар неправильно расположен на базе или клапан резервуара перевернут	Заменить клапан резервуара (Позвоните в сервисный центр WaterPik Technologies). Переверните клапан
Плохое давление/ не идет вода	Резервуар неправильно расположен на базе	Переустановите резервуар. Приложите небольшое равномерное усилие сверху на резервуар.
Прибор не включается	Мотор не работает	Убедитесь, что в сети есть ток. Для этого подключите к сети другое электрическое устройство и включите его.