


PAPILLAMETER

Инструкция по применению



<https://stomshop.pro>

RU

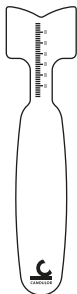

PAPILLAMETER




Papillameter представляет собой вспомогательное средство для измерения длины верхней губы. Полученное значение дает сведения о длине верхних центральных резцов и о длине верхнего прикусного валика.

Применение

Для обеспечения как можно более точного измерения пациент должен занять вертикальное положение. Затем Papillameter осторожно, удерживая в вертикальном положении, вводят под расслабленную верхнюю губу до упора на резцовый сосочек. Эту процедуру следует повторить один-два раза, чтобы получить оптимальный результат измерения.

Стерилизация Papillameter выполняется в автоклаве при температуре 134 °С.

RU

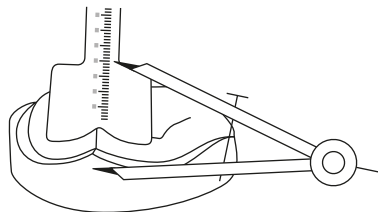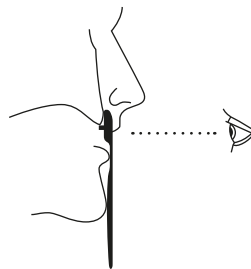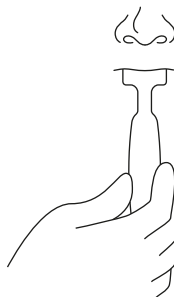

CANDULOR AG

Boulevard Lilienthal 8

CH-8152 Glattpark (Opfikon)

T +41 (0)44 805 90 00

F +41 (0)44 805 90 90

candulor@candulor.ch

www.candulor.com



<https://stomshop.pro>

Stand Januar 2017 / Version 1 / Art.-Nr. 662448