


Dr's Cam

Autofocus Intraoral Camera with Mouse

Wired type

User manual

Eng Kor

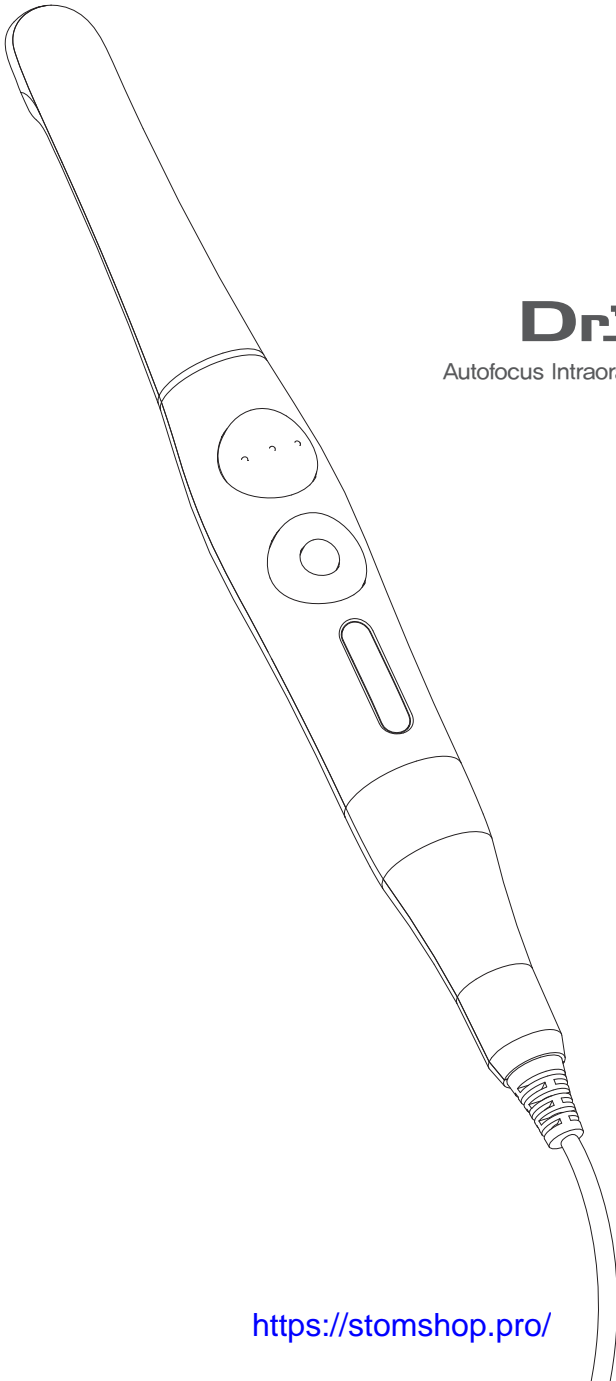

Dr's Cam

Autofocus Intraoral Camera with Mouse

Wired type

User manual

Eng

1. Introduction	02
- Features	
- Description	
- Overview	
2. Safety Information	03
- Symbols	
- Notes and reference	
- Installation and Connection	
- Operation	
- Maintenance	
3. List of Components	07
4. Parts and functions	08
5. Installation	09
6. How to use	12
7. Maintenance	14
8. Trouble Shooting	15
9. Specification	16
10. Accessories	17
11. Warranty	17
12. Warranty card	18

1 Introduction

Thank you for purchasing the device. The instructions described below have been designed to provide the necessary information for the successful operation, daily maintenance and safety for the use of this unit.

Features


- Autofocus
- Gyro mouse built-in
- 280° twist head
- Adjustable LED brightness
- Software compatibility
- Easy to read OLED screen
- Dental image software included (DrsViewer2)
- 3 color impressions

Description


This device is an intraoral camera used to take images of the inside of the mouth or oral cavity.

Overview

1) Camera

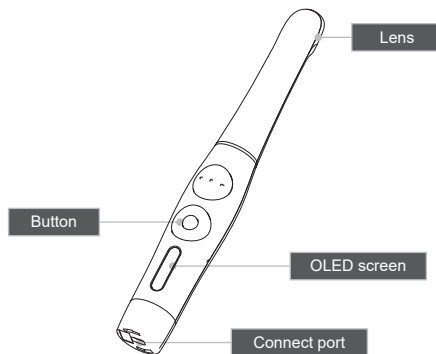

2) USB cable

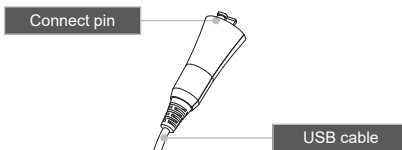

2 Safety information

It is important to understand the following information to use this product safely.

Symbols

Warning and Caution used in this manual are shown below.



Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in serious injury or death.



Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor/moderate injury or in damage of property.

Notes and References

Notes and References used in this manual are shown below.



Indicates that potential malfunctions may occur if the description is ignored.



Supplementary information to facilitate better operation.

2 Safety information

Installation and Connection



Warning

- Before use, check that there is no dust or foreign particles in the USB cable or connection part to avoid an electric shock.
- Keep away from sources of ignition.
- Protect the device from any liquid to avoid an electric shock or functional error.
- Place the device on a plate, stable surface, or cradle supplied.
Dropping the device could result in an internal defect that may cause overheating or fire.
- Do not place the USB cable near a gas burner or other sources of heat. Should the cable catch on fire or become damaged, replace with a new one to avoid short-circuiting.



Caution

- Do not use or leave the unit in areas of high temperature or exposed to direct sunlight. Internal circuit faults may cause the device to overheat or catch on fire.
- Securely connect the dust-free USB cable. Use this device in well ventilated areas, as overheating may cause ignition.

2 Safety information

Operation



Warning

- Do not plug in the USB cable with wet hands. This may result in an electric shock.
- Do not use this product on a person with a pacemaker as it may cause malfunction of the pacemaker.
- Use a disposable cover for each new client to prevent cross-infection.



Caution

- Do not disconnect the USB cable by pulling on the cable. This may result in an electric shock or fire.
- Avoid damage or use of unnecessary force on the USB cable.
This may result in an electric shock or fire.
- Remove the USB cable if the device is out of use for a long period of time.
- Do not use this product for any purpose other than dental use.
- This device is not water prove. Use disposable cover when use to avoid wet the device.
In case of malfunction due to this case, it is not covered by warranty.

2 Safety information

Maintenance



Warning

- Never disassemble or repair the product, this may cause injuries, electric shock, or fire.
- Avoid getting the unit wet to prevent an electric shock.
- Ensure that the USB cable is disconnected prior to cleaning.




Caution


- If the OLED screen malfunctions, remove the USB cable and reinsert it.
- Do not use solvents oil, ethanol, or acetone to cleaning and disinfection.
- The user must be in charge of the operation and maintenance of the device.

3 List of components


Please check the contents described below when removing the contents from the original packaging.

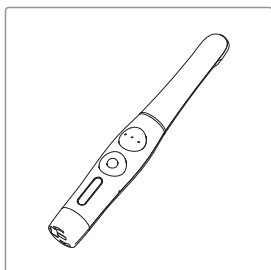

Camera
(Item no. DCAU071M10008)

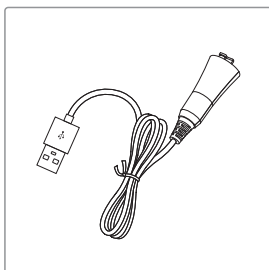


USB cable
(Item no. IC07004020)

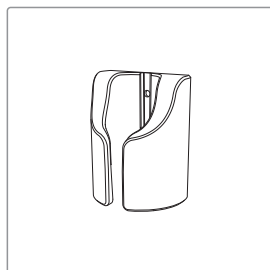


Cradle
(Item no. IC06005010)



Disposable cover x 2ea
(35x100mm / smaller)
(x 100 pcs by weight)
(Item no. IC06002010)

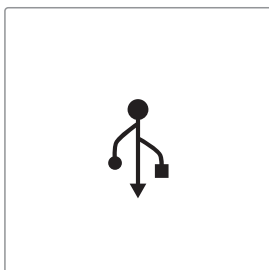


USB memory
(Item no. IC06009010)

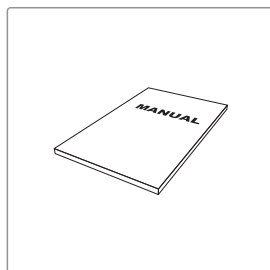

User Manual
(Item no. IC0907110)

4 Parts and functions

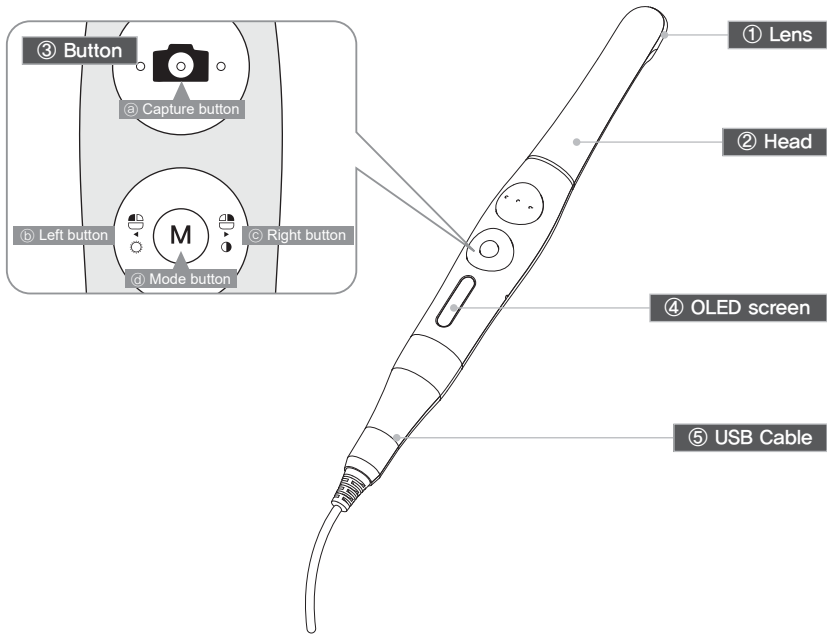

① Lens

- Image is reflected on the lens through prism.

② Head


- Twistable 280° degrees

③ Button

- Ⓐ Capture button
 - Image capture, focus adjusting, select
- Ⓑ Left button
 - Mouse left button
- Ⓒ Right button
 - Mouse right button
- Ⓓ Mode button
 - Mouse moving activate, setup mode, cancel

④ OLED screen

- Show the device states

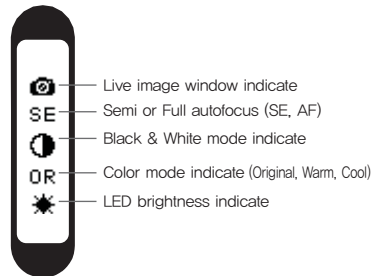



⑤ USB Cable

- Connect with camera and PC.

5 Installation

1. USB cable connection

Connect the USB cable with body as follow picture.

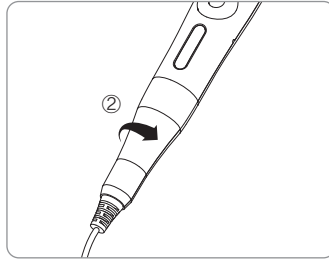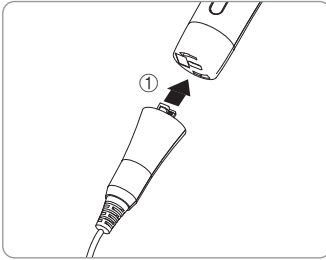


Be careful to connect the USB cable with body. Do not force too much

2. Camera connection

Connect the USB cable to USB port of PC. Then device is turned on.



Booting

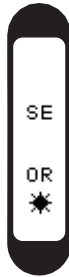

Standby
(live screen off)




Standby
(live screen on)

5 Installation

3. DrsViewer2 installation

- If you don't have other Viewer software

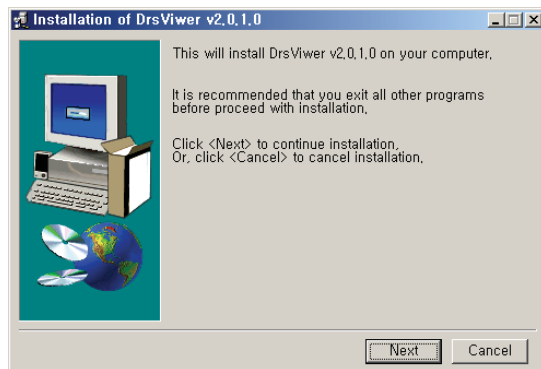

< Installation DrsViewer2 screen >




Reference

In case to use other software, contact local dealer.

5 Installation

4. Camera device setup

- Click and hold left button and right button for 3 seconds. Then the device is turn to setup mode.

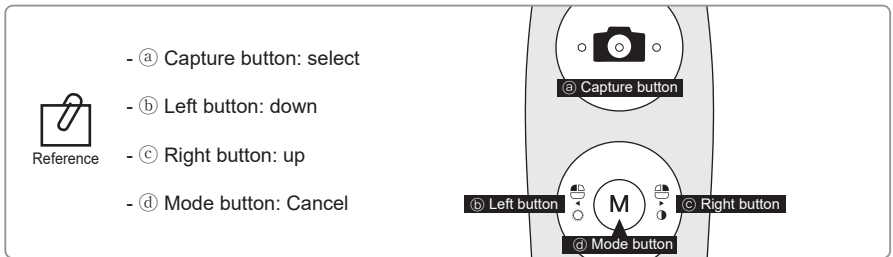

1) Capture key setting

- Select appropriate capture key
- Default value is "Space"



Capture key can be changed with "HIDDrS Manager" in the CD.

2) Mouse speed

- Select appropriate gyro mouse speed. (5 levels)
- Default level is 3

3) Turn off time

- Select turn off time of device (5, 10, 15, 20, 30 mins)
- Default time is 5 mins.

4) Autofocus & Autocapture

- Select "Disable" or "Enable"
- Default value is "Disable"

To avoid shaking image there is Auto capture function.



* Auto capture:

- Semi autofocus (Disable): Half click and hold the condition, image is captured after 1 seconds after get focus, and image is captured for every 2 seconds.
- Full autofocus (Enable): Half click is image capture and hold the condition, image is captured for every 2 seconds.

6 How to use

1. Turn on the device

- Connect USB cable to PC and device. Then the device is turn on with LED blink and beep sound.

2. Image capture

- Click camera icon on the DrsViewer2. Then live image is shown.
- Half click is focus adjusting, and click is image capture.
- If the mode is full autofocus mode, half click is image capture.




Reference

Default setup is semi autofocus. And capture key is "Space"
To use other company software, need to check capture key.
Or need to use twain driver.


3. Mouse

- To move mouse cursor click mode button and shake the device.
Then mouse cursor is moved as device shaken.

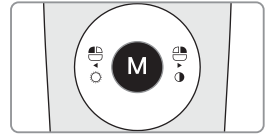



4. Color impression changing

- Click mode button and capture button on live image.
Then the color impression is changed.
- Original ⇒ Warm ⇒ Cool color impression is rotated.

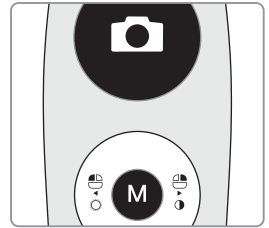

5. Brightness change

- Click mode button with mouse left button. Then LED brightness is changed.

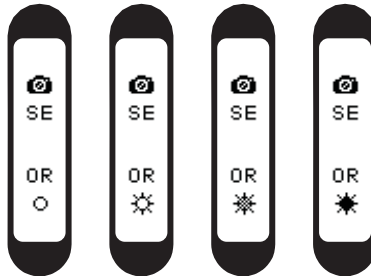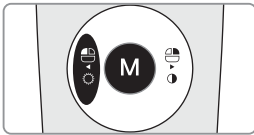

Turn off ⇒ Brightness LV1 ⇒ Brightness LV2 ⇒ Brightness LV3 is rotated.





Reference

Brightness change is worked on live image is on.

6 How to use

6. Black & White mode

- Click mode button with mouse right button.
Then LED turn off, and live image changed to black & white mode.

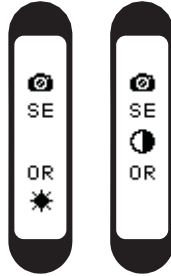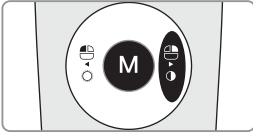

Normal ⇒ Black & White mode is rotated.




Reference

Black & White mode is worked on live image is on.

7. Setup mode

- Click mouse left button and mouse right button both for 3 seconds.
Then setup mode is shown.
- About setup mode, please refer,
"5. Installation ⇒ 6. Camera device setup."

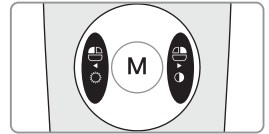

8. Turn off

- Click the capture button for 3 seconds, the device is turned off.
- The device is turned off automatically, if there is no signal for minutes set on setup mode.




Reference

- User can adjust the sleep mode time for 5, 10, 15, 20, 25, and 30 minutes on setup mode.

9. Reset

- If the device doesn't work normally, reset the device. Then the device will be reboot.

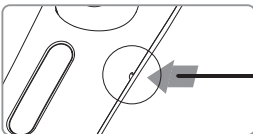

Cleaning and disinfection

- Clean the camera gently with clean, soft, lint-free cloth.
- Avoid using solvents which contain ethanol or acetone.
- Do not use sharp or pointed tools to clean as they may damage or scratch the plastic.
- Be careful not to spill any liquid into the device.
- Use disposable cover when use the device to avoid cross-infection and spilling any liquid into the device.

Maintenance

- Do not disassemble the device for any purpose.
- To repair the device, please contact authorized dealer or manufacturer.
- Remove the USB cable from PC, if the device is not in use for long period.

8 Trouble shooting

If the device doesn't work normally, please refer to the following points.

Problem	Cause and solution
Button doesn't work	<p>If the button is pressed with excessive force, it would not work, try pressing the button gently.</p> <p>In case of installation or device setting is incorrect, the button could not work. Check the 5. Installation and 6. How to use.</p>
Display screen does not work	<p>If the USB connection is not good, or USB electric power is not enough the camera is not work. Check the USB connection. And use other USB port.</p>
Power off while in operation	<p>If the USB cable is not connected properly, the device may turn off. Check the USB cable connection.</p>
Not able to capture image	<p>Capture key-value would not match with other company dental viewer software. Please check keyboard short-cut. If you don't know it please ask the dental viewer software vendor. And check the key-value of device.</p>
Live image is not shown	<p>If the device is not recognized well, live image is not shown. Please check camera connection or imaging device of device manager.</p> <p>If there is TV tuner in the PC. The image could be not shown. Check "Disable" the TV tuner device on the device manager.</p> <p>If you use other company dental viewer software, it would be related with its setting. Please ask to the dental viewer software vendor.</p> <p>If you use other company dental viewer software, other imaging device (ex. Web-cam, etc.) should be checked for "Disable".</p> <p>Some codec makes block the live image shown. Uninstall the codec file. (ex. klite codec and etc.)</p>

* If the trouble is not fixed after following solution, please contact your local dealer or manufacturer.

9 Specification

■ Equipment Class

Model:	IC-DCAU71
Trademark:	Dr's Cam
Power supply:	5V USB power
Protection from ingress of liquids:	IPX0 (ordinary equipment)

■ Operation, transport, and storage condition for the main unit

	Operation	Storage	Transport
Temperature	10~30C	10~40C	-10~50C
Humidity	10~80%	20~80%	20~80%
Atmospheric pressure	800 ~ 1360 hPa		

■ Additional Information


Camera	Operation voltage	5V
	Measurement	Approx. 202 x 30 x 28 mm
	Weight	Approx. 56g
	Resolution	HD(720P)
	Sensor/Lens type	CMOS / Liquid lens
USB cable	Length	Approx. 3 M
Disposable cover	Quantity	Approx. 100 pcs by weight x 2ea
	Raw material	Polyethylene

■ Minimum system requirement


PC system:	2.0 Ghz CPU, 1GB RAM
OS:	Windows 7
USB port:	USB 2.0

* Upper specification is changeable without prior notice.


10 Accessories

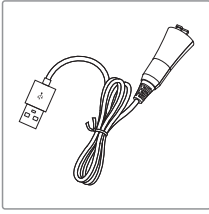

USB cable
(Item no. IC07004020)

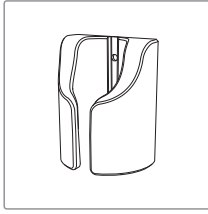

Cradle
(Item no. IC06005010)

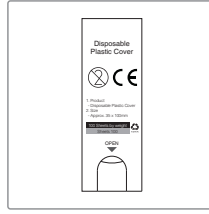

Disposable cover
(35x100mm / smaller)
(x 100 pcs by weight)
(Item no. IC06002010)

11 Warranty

This product is only shipped after strict inspection. Should the product incur any problems under normal use conditions within one year from the date of purchase, the repair will be free of charge. However, repair of consumables (Disposable Cover, and etc.) are not covered by the warranty. For more information, refer to the 12. Warranty card attached.

Serial number check.



EC REP Good Doctors Germany GmbH

Gerhard-Domagk-Str. 2, 53121 Bonn, Germany
TEL: +49 (0) 228/53 44 14 65 FAX: +49 (0) 228/53 44 14 66
www.gooddrs.de

Good Doctors Co., Ltd.

#208, B-dong, 283 Bupyeong-daero, Bupyeong-gu
(Woolim Lions Valley, Cheongchoen-dong), Incheon,
21315, Republic of Korea
Tel : + 82 32 424 6325 Fax : + 82 32 424 6326
E-mail : info@gooddrs.com Website : www.gooddrs.com

Warranty card

We guarantee the quality of the product as follows

< Assurance details >

1. If there is any defect of manufacturer or product has any fault itself within the assurance period, it will be replaced with the same product.
 - Malfunction and damage according to user's carelessness.
 - Malfunction and damage according to natural disaster such as fire, earthquake and flood etc.
 - Malfunction and damage according to user's intention or accident.
 - Malfunction and damage according to using incompatible product.
3. The manufacturer does not accept any liability resulting misuse.

Name of product :

Name of model :

Customer information

- Office name :
- Office phone :

Distributor


- Dealer name :

Assurance period

- Date of purchase : from , 20
- Product is for 1 year except accessories.



Good Doctors Co., Ltd.
#208, B-dong, 283 Bupyeong-daero, Bupyeong-gu (Woolim Lions Valley, Cheongchoen-dong), Incheon, 21315, Republic of Korea
Tel: +82 32 424 6325 Fax: +82 32 424 6326

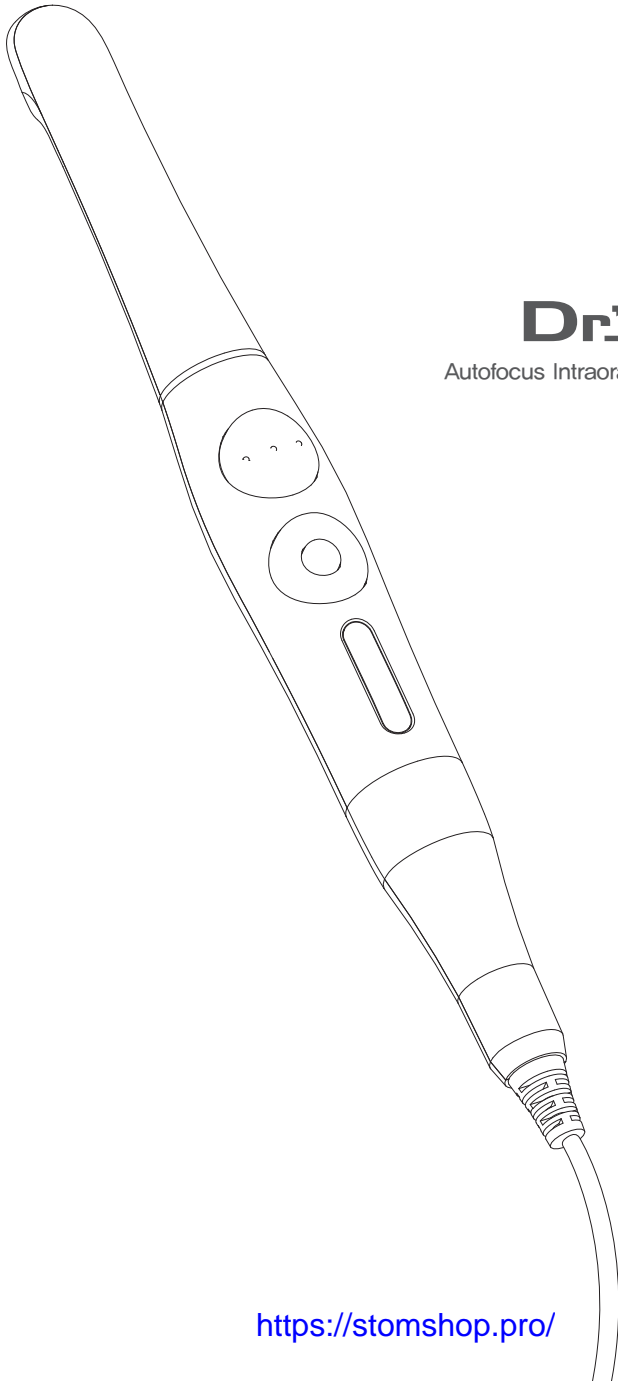

Dr's Cam

Autofocus Intraoral Camera with Mouse

Wired type

User manual

Kor

1. 소개	22
<ul style="list-style-type: none"> - 특징 - 사용목적 - 개요 	
2. 안전에 관한 정보	23
<ul style="list-style-type: none"> - 기호 - 노트와 참조 - 설치 시 - 사용 시 - 유지보수 시 	
3. 내용물	27
4. 부품 및 기능	28
5. 설치 방법	29
6. 사용 방법	32
7. 유지 보수	34
8. 문제 해결	35
9. 기재 사항	36
10. 악세서리	37
11. 품질 보증	37
12. 품질 보증서	38

1 소개

본 제품을 구매해주셔서 감사드립니다.
본 매뉴얼에는 제품 설치, 사용 및 유지보수에 관한 사항이 적혀있습니다.
안전하고 원활한 사용을 위하여 본 매뉴얼을 꼭 읽고 숙지 해 주시길 바랍니다.

특징

- 오토 포커스
- 내장형 자이로 마우스
- 280도 회전 헤드
- LED밝기 조절 가능
- 소프트웨어 호환성
- OLED 화면
- DrsViewer2 소프트웨어
- 3가지 색감 선택가능

사용목적


구강 내를 비추어 확대해 볼 수 있는 카메라 장비

개요

1) 카메라



2) USB 케이블

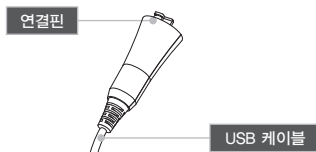

2 안전에 관한 정보

다음의 정보들은 제품의 안전한 사용을 위한 표시입니다.

기호



발생할 경우 심각한 부상이나 죽음에 이를 수 있는 잠재적인 위험요소



발생할 경우 가벼운 부상이나 재산상의 피해를 야기하는 잠재적인 위험요소

노트와 참조

노트 및 참조 표시는 다음의 경우에 표시됩니다.



무시할 경우 제품의 고장을 야기할 수 있는 사항



보다 나은 사용을 위한 부가정보

2 안전에 관한 정보

설치 시



경고

- 사용 전에 USB케이블 안에 먼지 등 이물질이 있는지 확인하시기 바랍니다. 감전의 위험이 있습니다.
- 발화물질 등에 제품을 가까이 두지 마십시오.
- 감전이나 기능적인 에러 등을 방지하기 위해 액체나 습기 등으로부터 제품을 보호하십시오.
- 제품을 동봉된 크래들이나 평평하고 안정된 곳에 위치해 두십시오. 제품을 떨어뜨릴 경우 내부적인 고장이나 발열, 화재 등의 위험이 있을 수 있습니다.
- USB케이블을 가스버너나 열기구 등 근처에 두지 마십시오. 케이블이 손상된 경우 구입처나 제조사로 연락 주십시오.



주의

- 제품을 온도가 높은 곳이나 직사광선이 비치는 곳에 두지 마십시오. 내부적인 기능문제, 발열 혹은 화재의 위험이 있습니다.
- 발열이나 발화를 방지하기 위해 제품 사용 시 환기가 잘 되는 곳에서 사용하십시오.

2 안전에 관한 정보

사용 시



경고

- 젖은 손으로 USB케이블을 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 피스메이커를 장착하고 있는 사람에게 사용하지 마십시오. 피스메이커의 고장을 일으킬 수 도 있습니다.
- 교차감염을 방지하기 위해 일회용커버를 반드시 사용하십시오.



주의

- 사용 중 USB케이블을 분리하지 마십시오. 감전이나 화재, 고장 등을 일으킬 수 있습니다.
- USB케이블에 불필요한 힘을 가하거나 충격으로부터 보호하십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 오랜 기간 동안 사용하지 않는 경우에는 PC로부터 분리를 해두십시오.
- 본 제품을 치과용 목적 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 방수가 되지 않는 제품입니다. 제품이 젖는 것을 방지하기 위해서 반드시 일회용커버를 사용하시기 바랍니다. 침수에 의한 고장은 제품보증에 대한 사항에서 적용되지 않습니다.

2 안전에 관한 정보

유지보수 시



경고

- 제품을 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오. 부상이나 감전, 혹은 화재의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 제품을 잡지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하기 전에 USB케이블을 반드시 분리하시기 바랍니다.




주의


- 제품의 OLED화면이 고장 난 경우에는, USB케이블을 분리한 후 다시 꽂아주시기 바랍니다.
- 솔벤트오일, 에탄올 혹은 아세톤 등은 사용하지 마십시오.
- 사용자는 제품 사용과 관리의 책임이 있습니다.

3 내용물


제품 개봉 후 다음과 같은 내용물들이 있는지 확인 바랍니다.

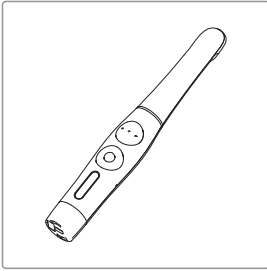

카메라
(Item no. DCAU071M10008)

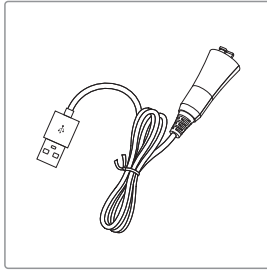


USB 케이블
(Item no. IC07004020)

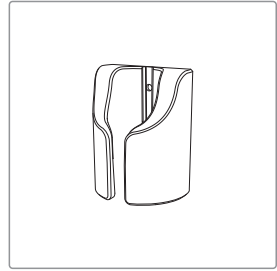


크라들
(Item no. IC06005010)



일회용커버 - 소(Smaller) x 2ea
(35x100mm 약 100매)
(Item no. IC06002010)

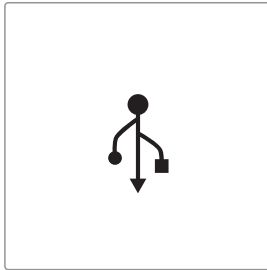


USB 메모리
(Item no. IC06009010)

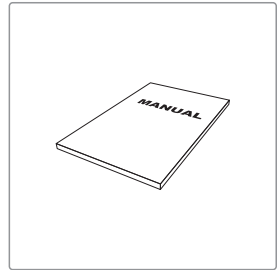

매뉴얼
(Item no. IC0907110)

4 부분 및 기능

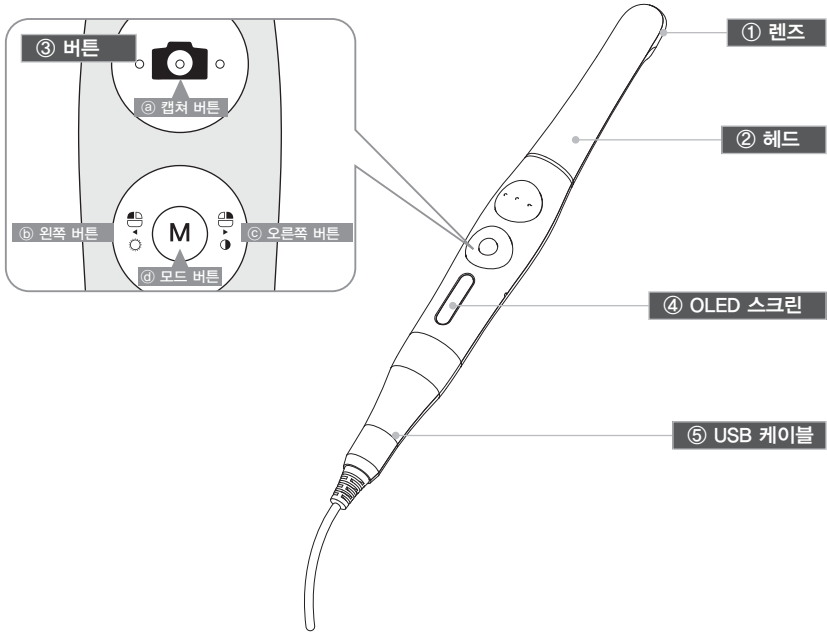

① 렌즈

② 헤드 - 280도 회전

③ 버튼

- ㉓ 캡처 버튼
- 이미지 캡처, 포커스 조절, 선택
- ㉔ 왼쪽 버튼
- 마우스 왼쪽 버튼
- ㉕ 오른쪽 버튼
- 마우스 오른쪽 버튼
- ㉖ 모드 버튼
- 마우스 움직임 활성화, 세팅 모드, 취소

④ OLED 스크린 - 제품 상태를 보여줌.





⑤ USB 케이블 - 카메라와 PC 연결

5 설치 방법

1. USB케이블 연결

그림과 같이 USB케이블을 연결해 주십시오.

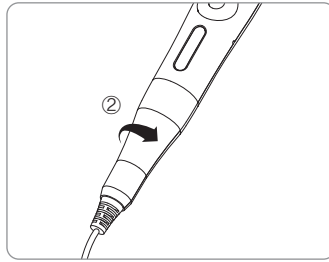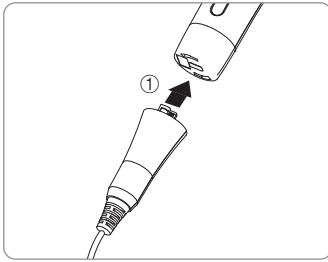


USB케이블을 카메라에 연결할 때는 너무 많은 힘을 주지 않도록 주의하십시오.

2. 카메라 연결

캡쳐 버튼을 누름과 함께 시작됩니다. 그리고 나서 장치는 화면을 인식합니다.



부팅로고

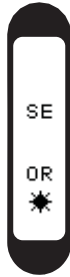

대기화면
(라이브스크린 꺼짐)




대기화면
(라이브스크린 켜짐)

5 설치 방법

3. DrsViewer2 설치

– 만약 다른 뷰어 소프트웨어가 없다면 DrsViewer2를 설치하십시오.

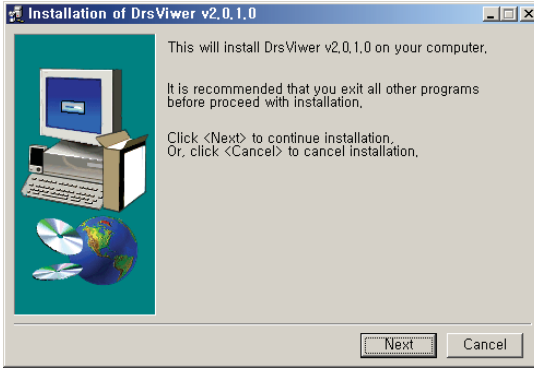

< DrsViewer2 설치화면 >




참조

다른 소프트웨어를 사용하는 경우에는 구입처에 연락 하십시오.

5 설치 방법

4. 카메라 장치 설정

- 왼쪽버튼과 오른쪽버튼을 동시에 3초 동안 누르고 있으면 설정 모드로 바뀝니다.

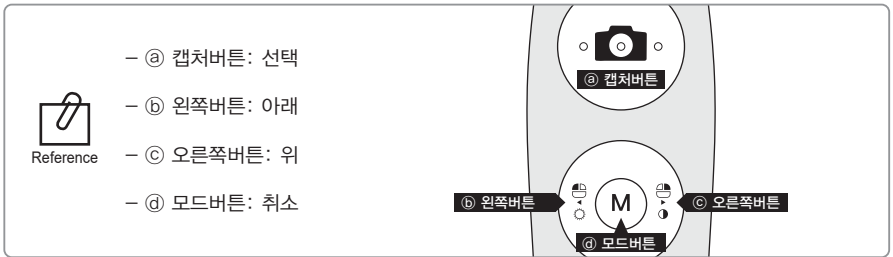

1) 캡처 키값 세팅

- 올바른 캡처키를 선택하십시오.
- 초기값은 스페이스입니다.



캡처키는 CD안에 있는 "HIDRs Manager"에서 바꿀수 있습니다.

2) 마우스 스피드

- 자기에 맞는 속도(5레벨)를 선택 하십시오.
- 초기값은 3레벨입니다.

3) 종료시간

- 장치의 꺼지는 시간을 선택하십시오.(5,10,15,20,30분)
- 초기값은 5분입니다.

4) 오토포커스와 오토캡처

- "Disable" 혹은 "Enable" 선택하십시오
- 초기값은 "Disable"입니다.



사진촬영 시, 흔들림을 방지하기 위한 자동캡처 기능이 있습니다.

* 자동캡처

- 세미 오토포커스 (Disable): 하프클릭으로 포커스를 맞춘 상태에서, 하프클릭을 유지하면 처음의 1초 뒤에 사진이 찍히며, 매 2초마다 사진이 찍힙니다.
- 풀 오토포커스 (Enable): 하프클릭으로 사진이 찍히며, 하프클릭을 유지하는 경우 매 2초마다 사진이 찍힙니다.

6 사용 방법

1. 전원켜기

- PC의 USB포트에 USB케이블을 연결하면 LED가 깜박거리고 삐소리가 나면서 켜집니다.

2. 이미지 캡처

- DrsViewer2에 카메라 아이콘을 클릭하십시오.
라이브 이미지가 보여 집니다.
- 포커스를 조절하기 위해서 카메라 아이콘을 살짝 눌러 주십시오.
누르면 이미지가 캡처 됩니다.
오토 포커스 모드에서는 반셔터 기능이 작동하지 않습니다.




참조

디폴트 설정은 세미 오토 포커스이고 캡처키는 "스페이스"입니다.
다른 회사소프트웨어는 캡처키를 체크 해보거나 트와인 드라이버를 사용해야만 합니다.


3. 마우스

- 마우스 커서를 움직이기 위해서는 모드 버튼을 누른 상태에서 카메라를 움직이십시오.
마우스 커서는 카메라가 움직이는 대로 움직입니다.

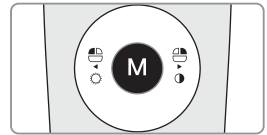



4. 색감 변화

- 모드 버튼과 캡처 버튼을 라이브 화면상에서 눌러주면 색감이 바뀝니다.
- Original ⇒ Warm ⇒ Cool 순서로 바뀝니다.

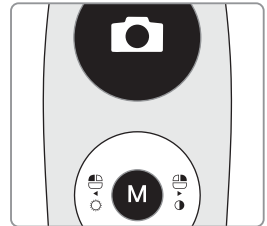

5. 밝기 조절

- 모드 버튼과 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 LED 밝기가 변합니다.

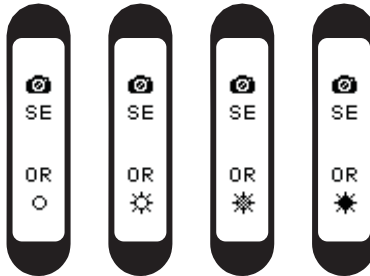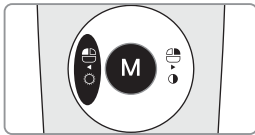

꺼짐 ⇒ 밝기1 ⇒ 밝기2 ⇒ 밝기3 순서로 바뀝니다.





참조

밝기조절은 카메라 기능이 활성화 되어있을 때만 작동합니다.

6 사용 방법

6. 흑백모드

- 마우스 오른쪽 버튼과 모드 버튼을 클릭 하십시오
LED가 꺼지고 라이브화면이 흑백으로 변합니다.

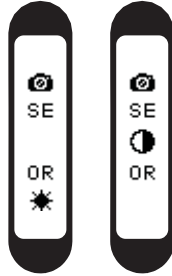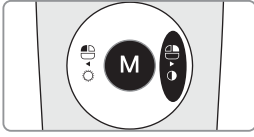

일반 ⇒ 흑백모드




참조

흑백모드는 라이브화면이 떠있을 때만 작동합니다.

7. 설정 모드

- 마우스 왼쪽 오른쪽 버튼을 동시에 3초 동안 클릭 하면
설정 모드가 나옵니다.
- 설정 모드는, "5. 설치방법 ⇒ 6. 카메라 장치 설정"을 참고 하십시오.

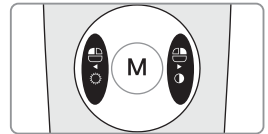

8. 꺼짐

- 캡처 버튼을 3초 동안 누르면 꺼집니다.
- 장치는 자동적으로 꺼집니다.
만약 몇 분 동안에도 신호가 없다면 설정 모드를 실행 해 보십시오




참조

- 사용자는 슬립모드 시간을 5,10,15,20,25,30분을 설정 모드에서 조절 할 수 있습니다.

9. 리셋

- 만약 기기가 정상적으로 작동하지 않는 경우, 리셋을 하십시오. 기기가 재부팅됩니다.

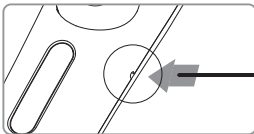

청소 및 소독

- 제품 청소 시, 부드럽고, 세정제 등이 첨가되어있지 않은 천 등으로 부드럽게 닦아 주십시오.
- 에탄올, 아세톤 등이 포함된 용매의 사용을 금합니다.
- 날카로운 기구 등으로 제품을 청소하지 마십시오. 제품에 스크래치나 고장 등을 일으킬 수 있습니다.
- 본 제품은 방수가 되지 않은 제품입니다. 물기나 습기로부터 주의해 주십시오.
- 교차 감염과 장치에 액체가 들어가는 일을 막기 위해서 일회용 커버를 사용하십시오.

유지보수

- 어떠한 경우라도 제품을 임의로 분해하지 마십시오.
- 제품 수리 시, 공인된 딜러 혹은 제조자에게 연락하십시오.
- 제품을 오랫동안 사용 안할 시 USB케이블을 PC에서 분리해 주십시오.

제품이 정상적으로 작동을 하지 않는 경우 다음을 참조하여 주십시오.

문제	원인 및 해결
버튼이 작동하지 않는 경우	<p>버튼에 무리한 힘이 가해졌을 경우, 버튼이 작동하지 않을 경우 제품이 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼을 천천히 눌러주시고, 버튼의 상태를 확인하여 주십시오.</p> <p>제품의 설치가 제대로 되지 않는 경우 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다. "5. 설치방법"과 "6. 사용법"을 참조하여 주십시오.</p>
OLED화면이 작동하지 않는 경우	<p>USB케이블이 제대로 연결되지 않을 경우, 작동이 제대로 되지 않을 수 있습니다. USB케이블의 연결상태를 확인하여 주십시오.</p> <p>USB포트의 전원이 낮아서 제품이 작동을 하지 않을 수 있습니다. 다른 USB포트에 연결하여 주십시오.</p>
사용 중 제품이 꺼지는 경우	<p>USB케이블이 제대로 연결되지 않을 경우, 제품이 꺼질 수 있습니다. USB케이블의 연결상태를 확인하여 주십시오.</p>
이미지 캡처가 되지 않는 경우	<p>다른 회사의 덴탈뷰어소프트웨어를 사용하는 경우 캡처 키 값이 올바르게 잡아 캡처가 되지 않을 수 있습니다. 해당 소프트웨어의 캡처를 위한 키보드 값을 확인하여 주십시오. 만약 해당 소프트웨어의 캡처 키 값을 모르는 경우 해당 소프트웨어 업체에 문의를 하시기 바랍니다.</p> <p>"HIDDrManager"파일을 이용하여 키 값을 변경 시켜주십시오.</p>
라이브화면이 보이지 않는 경우	<p>제품인식이 잘 되지 않는 경우에, 라이브화면이 보이지 않을 수 있습니다. USB연결상태를 확인해주시고, 장치관리자의 이미징장치를 확인하여 주십시오.</p> <p>만약 PC에 TV튜너가 설치되어 있다면 장치관리자에서 해당 TV튜너를 "사용안함"으로 설정하여 주시기 바랍니다.</p> <p>다른 회사의 덴탈뷰어소프트웨어를 사용하는 경우, 세팅의 문제와 관련이 있을 수 있습니다. 해당 덴탈뷰어소프트웨어 업체에 문의하시기 바랍니다.</p> <p>다른 회사의 덴탈뷰어소프트웨어를 사용하는 경우, 다른 이미징장치(웹캠 등)를 "사용안함"으로 설정하여 주시기 바랍니다.</p> <p>특정 코덱이 설치되어있는 경우 (예, KLite codec) 제품영상이 나오지 않을 수 있습니다. 해당 코덱을 지워주시기 바랍니다.</p>

* 상기의 조치를 취한 후에도 증상이 고쳐지지 않는 경우 구입처나 생산자에게 문의 해주시십시오.

9 기재 사항

- 제품명: 구강용카메라
- 형명: IC-DCAU71
- 상품명: Dr's Cam
- 제조업체: 주식회사 굿닥터스
- 주소: 인천광역시 부평구 부평대로 283 B동 208호 (청천동, 우림라이온스밸리) (우21315)
- 연락처: 032) 424-6325
- 제조업허가번호: 제2341호
- 제조품목신고번호: 제신 16-377호
- 제조년월 및 제조번호: 제품에 표시
- 사용목적: 구강 내를 비추어 확대해 볼 수 있는 카메라 장비
- 수량: 1 SET
- 사용방법 및 사용상의 주의사항: 사용자매뉴얼 참조
- 본 제품은 의료기기입니다.

■ 부가정보


카메라	작동 전압	5V
	치수	약 202 x 30 x 28 mm
	무게	약 56g
	해상도	HD(720P)
	센서/렌즈타입	CMOS / 액체렌즈
USB 케이블	길이	약 3 M
일회용커버	수량	약 100장 (무게기준) x 2 팩
	원재료	폴리에틸렌

■ 최소사양


PC환경	2.0 Ghz CPU, 1GB RAM
OS	Windows 7
USB포트	USB 2.0

* 상기의 스펙은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

10 악세서리

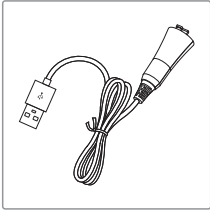

USB 케이블
(Item no. IC07004020)

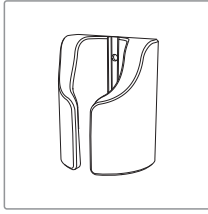

크라들
(Item no. IC06005010)



일회용커버 - 소(Smaller)
(35x100mm 약 100매)
(Item no. IC06002010)

11 품질 보증

본 제품은 엄격한 품질관리 하여 출고된 제품입니다. 정상적인 작동환경에서 문제없이 사용할 수 있습니다. 정상적인 작동환경에서 사용하여 문제가 생기는 경우 구입일로부터 1년간 무상으로 수리가 가능합니다. 그러나 소비재의 (일회용커버 등) 경우는 품질보증에서 제외됩니다. 자세한 사항은 첨부되어있는 품질 보증서를 참조하여 주시기 바랍니다.

시리얼 번호 확인방법



Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders



품질보증서

본제품에 대하여 아래와 같이 품질을 보증합니다

제품명			
모델명			
고객정보			
취급점			
보증기간	년	월	일부터
	본체는 일년, 단 소모품은 제외 * 배터리는 6개월		

- 〈보증 내용〉
- 1. 보증기간내에 제조사의 결함이나, 제품자체의 불량이나 발생할 경우 동일 제품으로의 교환, 혹은 소비자 피해 보상 규정에 따라 보상에 드립니다.
 - 2. 아래와 같은 경우는 보증기간 중이라도 무상 보상이 되지 않습니다.
 - * 사용자의 취급, 부주의로 인한 고장 및 손상
 - * 화재나 지진, 수해등 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - * 소비자의 고의적 또는 과실로 인한 고장 및 손상
 - 3. 알반작인 치과 용도이외의 목적으로 사용하는 경우는 무상 보증이 되지 않습니다.
 - 4. 보상방법은 소비자 보호법에 의한 소비자 피해보상기준에 따라 피해를 보상합니다.



주식회사 굿더스
 (우)21315 인천광역시 부평구 부평대로 283, B동 208호(정전동 우림라이온스밸리)
 Tel: 032-424-6325 Fax: 032-424-6326 Email: info@gooddrs.com Website: http://www.gooddrs.com

Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders Gooders

