

Vacuum Pump VP5



EN Operating Instructions
Page 3

DE Bedienungsanleitung
Seite 13

FR Mode d'emploi
Page 23

IT Istruzioni d'uso
Pagina 33

ES Instrucciones de uso
Página 43

PT Instruções Operacionais
Página 53



www.stomshop.pro

ivoclar
vivadent[®]

Vacuum Pump VP5

	Page
List of Parts	4
1. Introduction / Signs and Symbols	5
1.1 Preface	
1.2 Introduction	
1.3 Signs and symbols	
2. Safety First	6
2.1 Indications	
2.2 Health and safety instructions	
3. Product Description	7
3.1 Components	
3.2 Functional description	
3.3 Hazardous areas and safety equipment	
4. Installation	8
4.1 Unpacking and checking the contents	
4.2 Selecting the location	
4.3 Making the connections	
5. Start-Up	9
6. Operation	9
7. Maintenance, Cleaning, and Diagnosis	10
7.1 Monitoring and maintenance	
7.2 Cleaning	
7.3 Notes on maintenance	
8. What If...	11
8.1 Technical malfunctions	
8.2 Repairs	
9. Product Specifications	12
9.1 Delivery from	
9.2 Technical data	
9.3 Acceptable operating conditions	
9.4 Acceptable transportation conditions	

List of Parts

- 1 Cable connection with bend protection
- 2 Power cord
- 3 Air vents
- 4 Vacuum hose connection
- 5 Housing
- 6 Vacuum hose
- 7 Transportation grip
- 8 Sound absorber
- 9 Sound absorber connection
- 10 Protective cap
- 11 Rating plate
- 12 Rubber feet



1. Introduction / Signs and Symbols

1.1 Preface

Dear Customer

Thank you for having purchased the Programat® Vacuum Pump. This apparatus is a high-quality, technical product. Please read the Operating Instructions carefully and use the apparatus according to the Instructions. Should you have any further questions, please do not hesitate to contact your local distributor or Ivoclar Vivadent AG directly.

1.2 Introduction

Apparatus: Vacuum Pump VP5
Target group: Dental lab personnel

This vacuum pump is suitable for evacuating the firing chamber of the Programat ceramic furnace. It is a quietly-running double-diaphragm pump with high vacuum performance.

These Operating Instructions are designed to assure the correct, safe, and economic use of the VP5 vacuum pump. They are divided into several, clearly structured chapters to help you find specific topics quickly and easily.

Signs and symbols (pictographs) are used to inform you quickly and clearly about health risks, important details, and contraindications.

We recommend keeping the Instructions in a safe place near the pump so that they are immediately accessible if necessary. Should you lose the Operating Instructions, extra copies can be ordered at a nominal fee from your local Ivoclar Vivadent Service Center or downloaded from www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter.

1.3 Signs and symbols

The signs and symbols in these Operating Instructions and on the pump facilitate the finding of important points and have the following meanings:

Operating Instructions:



Risks and dangers



Information



Contraindication

Pump:



Alternating current

2. Safety First

This chapter is especially important for personnel who work with the VP5 vacuum pump or who have to carry out maintenance or repair work. This chapter must be read and the corresponding instructions followed.

2.1 Indications

This vacuum pump has been developed especially for the evacuation of Programat ceramic furnaces from Ivoclar Vivadent and it should be used for this purpose only.

Other uses than the ones stipulated are contraindicated. The manufacturer does not assume any liability for damage resulting from misuse. The user is solely responsible for any risk resulting from failure to observe these instructions.

Further instructions to assure proper use of the pump:


- The instructions, regulations, and notes in the vacuum pump's Operating Instructions must be observed.
- The pump must be operated under the indicated environmental and operating conditions (Chapter 9).
- The VP5 must be properly maintained.

2.1.1



Risks and dangers

Foreign objects or liquids must not enter the air vents, since this may block the motor or result in an electrical shock.

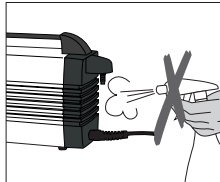

2.2 Health and Safety Instructions

- Make sure that the pump is only used for the indications stipulated in these Operating Instructions.
- Do not use the pump in areas where there is an explosion hazard.
- Components connected with the pump must comply with the pneumatic data of the pump.
- Observe the corresponding safety regulations when connecting the pump to the power supply.
- If the operation of the pump is interrupted by the thermostat because of over-heating, the pump starts automatically once it has cooled down. Make sure that no danger results from such an incidence.
- Use only original spare parts.
- The pump complies with the following directives:
 - Directive 2006/42/EC on machinery
 - Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility
- If the pump has been stored at very low temperatures or high atmospheric humidity, the pump has to be dried or left to adjust to the room temperature for approx. 1 hour (do not connect to the power yet).



Do not work with liquids near the pump. Should a liquid accidentally enter the pump, disconnect the power and consult Customer Service. Do not operate the pump.

- The pump is tested for use at altitudes of up to 2000 m above sea level.
- The pump may only be used indoors.
- The unit must not be technically modified.

3. Product Description



Any disruption of the protective conductor either inside or outside of the pump or any loosening of the protective conductor connection may lead to danger for the user in case of malfunction. Deliberate interruptions are not tolerated.



Do not use furnaces of other manufacturers that are not coordinated with the pump. Ask the corresponding manufacturer for further details. The vacuum pump has been especially developed for use with the Programat ceramic furnaces and must be used for this purpose only.

Disposal:



The pump must not be disposed of in the normal domestic waste. Please correctly dispose of old furnaces according to the corresponding EU council directive. Information regarding disposal may also be found on the respective national Ivoclar Vivadent homepage.

3.1 Components

The VP5 vacuum pump consists of the following components:

- Vacuum pump with power cord
- Vacuum hose (accessory)

3.2 Functional description

The diaphragm squeezed between the cylinder head and the housing is moved up and down by a con-rod. By means of this movement and by suction and eduction valves in the cylinder head, the firing and/or press chamber of the furnace is evacuated and the vacuum is built up.

3.3 Hazardous areas and safety equipment

Description of the hazardous areas of the pump:

Hazardous area	Type of risk
Fuse holder	Electrical shock
Ventilator	Injury

Safety equipment	Protective effect
Protective conductor	Protection from electrical shock
IP20 (protection type)	Protection from electrical shock
Thermoswitch	Protection from overheating
Ventilator cover	Protection from electrical shock and injury

4. Installation

4.1 Unpacking and checking the contents

Remove the pump from its packaging and check it for any transportation damage. We recommend keeping the original packaging for any transportation purposes. Use only the original packaging for shipping.



The electrical installation in the room where the pump is used must comply with the local and IEC requirements.

4.2 Selecting the location

Place the pump on a flat surface using the rubber feet (12). Make sure the pump is not exposed to direct sunlight. Do not place the pump in the immediate vicinity of heaters or other sources of heat. Make sure that there is enough space for air circulation between the wall and the air vents (3).

Make sure to select the location in such a way that the sound absorber is not knocked off by accidentally abutting against laboratory furniture.


4.3 Making the connections

Checking the rating plate and power supply

Make sure that the voltage indicated on the rating plate (11) complies with the local power supply. Should this not be the case, do not connect the pump.

Connecting the vacuum hose

Remove the protective cap (10) from the vacuum hose connection (4) and slip the vacuum hose on the vacuum hose connection (4).

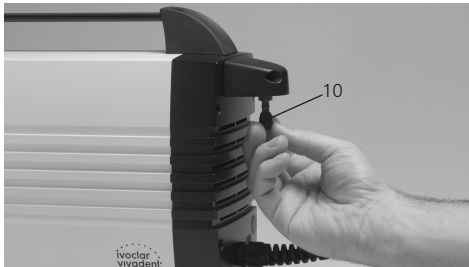

Connect the other end of the vacuum hose with the furnace.

Please check if the hose is properly connected.

Connecting the power

Plug the power plug of the power cord (2) into the corresponding socket in the Programat. This is the power supply at the same time.

5. Start-Up

The vacuum pump is automatically controlled by the furnace, once the power cord of the pump has been connected with the Programat furnace.

6. Operation

The pump is operated by the furnace programs.

7. Maintenance and Cleaning



For safety reasons, disconnect power plug before maintenance and cleaning.

7.1 Monitoring and maintenance

Basically, the diaphragm vacuum pump does not require maintenance unless the performance deteriorates due to contamination. Therefore, conduct a vacuum test at least once a year.

The time for maintenance procedures depends on the frequency of use and the location of the pump. For that reason the recommended times are only approximates.

What	Part	When
Check all plug-in connections for correct fit.	Connections	Weekly
Check the hose to make sure that no condensation water has accumulated in the system.	Vacuum hose	Weekly



This apparatus has been developed for typical use in the dental laboratory.

If the product is used in a production facility, for industrial applications, or in continuous operation, premature ageing of certain spare parts have to be expected.

These spare parts are e.g.:

- Sound absorber
- Diaphragm
- Valve reed

These spare parts are not covered by the warranty.

Please also observe the shorter service and maintenance intervals.

7.2 Cleaning

Remove dust from the pump from time to time. Use a vacuum cleaner with a cleaning brush for that purpose.

Item	Frequency	Cleaning material
Housing	if required	soft, dry cloth
Sound absorber (8)	if dirty	sound absorber has to be replaced

7.3 Notes on maintenance



The diaphragm may only be changed by an Ivoclar Vivadent Service Center. The fuse must be changed by qualified personnel.

Please observe the relevant rules and regulations for the prevention of accidents as well as the safety and medical regulations.

8. What If ...?

8.1 Technical malfunctions

Malfunction	Double-check	Action
1 The pump is not working	<ul style="list-style-type: none">– Is the pump correctly connected?– Has the thermostat been activated because of overheating?– Sound absorber clogged	<ul style="list-style-type: none">– Connect pump correctly.– Allow the pump to cool and switch on again.– Check pump location for adequate circulation of air.– If the problem cannot be solved, contact your local Ivoclar Vivadent Service Center.– Replace sound absorber.
2 The vacuum performance is declining or is bad	<ul style="list-style-type: none">– Has the test program for the pump been carried out?	<ul style="list-style-type: none">– Carry out the test program for the pump (PX1).– Send vacuum pump to Service Center for maintenance.
3 Vacuum pump is unusually noisy	<ul style="list-style-type: none">– Is the sound absorber defective or incorrectly mounted?– Is there a leak in the furnace system or the pump?	<ul style="list-style-type: none">– Connect sound absorber correctly or replace it, if it is defective.– Check connections and hose for tightness.– Clean sealing of the furnace head.– Check pump performance with the corresponding test program.

8.2 Repairs



Repairs may only be carried out by the personnel of a certified Ivoclar Vivadent Service Center. Please contact your Customer Service representative.

9. Product Specifications

9.1 Delivery form

- Vacuum pump VP5
- Operating Instructions
- Warranty Card
- Declaration of conformity

9.2 Technical data

Power supply:	230 V / 50–60 Hz / 0.40 A 200 V / 50–60 Hz / 0.50 A 115 V / 50–60 Hz / 0.85 A 100 V / 50–60 Hz / 0.95 A
Tolerated voltage fluctuations:	+/- 10%
Power consumption:	80 W
Suction strength:	15 l / min.
Final vacuum (measured with a 4-liter test container):	approx. 20 mbar
Dimensions:	415 x 122 x 230 mm (length, width, height)
Weight:	8.0 kg
Types of fuses:	230 V: T 1.0 A 250 V 200 V: T 1.25 A 250 V 115 V: T 2.5 A 250 V 100 V: T 2,5 A 250 V

Safety information :

- The pump complies with the following directives:
- Directive 2006/42/EC on machinery
 - Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility

9.3 Acceptable operating conditions

- Ambient temperature range of:
+5 °C to +40 °C (+41 °F to +104 °F)
- Acceptable height:
The pump is tested for use at altitudes of up to
2000 m above sea level.
- Pollution degree 2 Overvoltage category II

9.4 Acceptable transportation conditions

- Ambient temperature range of:
-10 °C to +55 °C (-4 °F to +131 °F)
- Maximum relative humidity: 80%



This apparatus has been developed for use in dentistry. Setup and operation should be carried out strictly according to the Operating Instructions. Liability cannot be accepted for damages resulting from misuse or failure to observe the Instructions. The user is solely responsible for testing the apparatus for its suitability for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes.

Vakuumpumpe VP5


Seite

deutsch

Teilverzeichnis	14
1. Einleitung und Zeichenerklärung	15
1.1 Vorwort	
1.2 Einleitung	
1.3 Zeichenerklärung	
2. Sicherheit geht vor	16
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	
2.2 Sicherheits- und Gefahrenhinweise	
3. Produktbeschreibung	17
3.1 Aufbau des Gerätes	
3.2 Funktionsbeschreibung	
3.3 Gefahrenstellen und Sicherheitseinrichtungen	
4. Installation	18
4.1 Auspacken und Lieferumfang prüfen	
4.2 Standortwahl	
4.3 Anschlüsse herstellen	
5. Inbetriebnahme	19
6. Bedienung	19
7. Unterhalt, Reinigung und Diagnose	20
7.1 Kontroll- und Unterhaltsarbeiten	
7.2 Reinigungsarbeiten	
7.3 Wartungshinweise	
8. Was ist, wenn...	21
8.1 Technische Störungen	
8.2 Reparaturarbeiten	
9. Produktspezifikationen	22
9.1 Lieferform	
9.2 Technische Daten	
9.3 Zulässige Betriebsbedingungen	
9.4 Zulässige Transportbedingungen	

Teilverzeichnis

- 1 Kabelverschraubung mit Knickschutz
- 2 Netzkabel
- 3 Lüftungsschlitze
- 4 Vakuumschlauchanschluss
- 5 Gehäuse
- 6 Vakuumschlauch
- 7 Transportgriff
- 8 Schalldämpfer
- 9 Schalldämpfer-Anschluss
- 10 Schutzkappe
- 11 Typenschild
- 12 Gummifüße

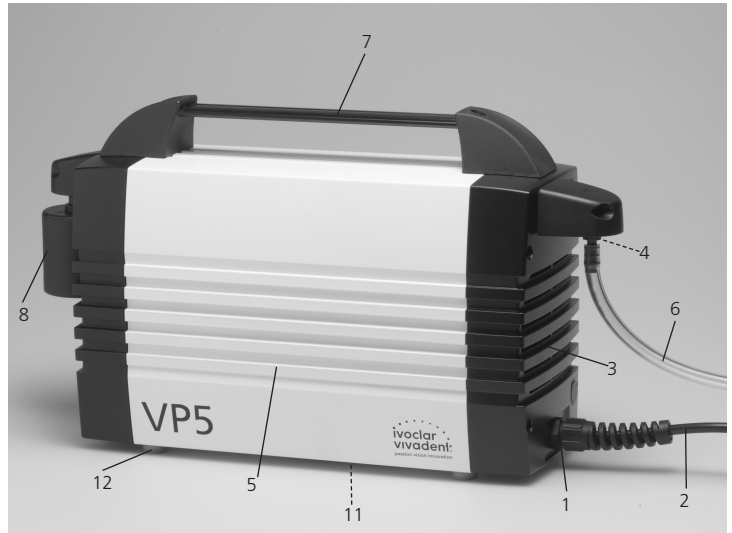

1. Einleitung und Zeichenerklärung

1.1 Vorwort

Sehr geehrter Kunde

Es freut uns, dass Sie sich für den Kauf der Programat-Vakuumpumpe entschieden haben. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein technisch hochstehendes Produkt. Wir bitten Sie, die Bedienungsanleitung zu lesen und das Gerät analog der Bedienungsanleitung in Betrieb zu nehmen.

Wenn Sie noch zusätzliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das entsprechende Depot oder direkt an Ivoclar Vivadent.

1.2 Einleitung

Zutreffendes Gerät: Vakuumpumpe VP5
Zielgruppe: Zahntechnisches Fachpersonal

Diese Vakuumpumpe eignet sich für die Evakuierung der Brennkammer beim Programat®-Keramikbrennofen. Bei dieser Pumpe handelt es sich um eine Membranpumpe mit guter Vakuulleistung und kompakten Abmessungen.

Die Bedienungsanleitung dient zur sicheren, sachgerechten und wirtschaftlichen Nutzung der Vakuumpumpe VP5. Die Bedienungsanleitung ist in mehrere Kapitel unterteilt, die klar gegliedert sind. Diese Aufteilung erleichtert ein schnelles Auffinden der gewünschten Punkte.

Um Sie schnell und übersichtlich über Gefahren, wichtige Informationen und nicht zulässige Anwendungen informieren zu können, werden an den Stellen entsprechende Symbole (Piktogramme) verwendet.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung an einem geschützten Ort in der Nähe des Gerätes aufzubewahren, sodass jederzeit ein schneller Informationszugriff möglich ist. Bei eventuellem Verlust kann die Bedienungsanleitung gegen eine Schutzgebühr über die entsprechende Service-stelle bezogen oder im Download-Center unter www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter heruntergeladen werden.

1.3 Zeichenerklärung

Die Symbole in der Bedienungsanleitung erleichtern Ihnen das Auffinden wichtiger Punkte und geben Ihnen folgende Hinweise:

In der Bedienungsanleitung:



Gefahren mit Risiken



Informationen



Nicht zulässige Verwendungen

Auf dem Gerät:



Wechselstrom

2. Sicherheit geht vor

Dieses Kapitel ist für alle Personen, die mit dem Gerät arbeiten oder am Gerät Unterhalts- oder Reinigungsarbeiten durchführen, zwingend zu lesen. Die Hinweise sind zu befolgen.

2.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Die Vakuumpumpe wurde speziell für die Evakuierung der Programat-Brennöfen von Ivoclar Vivadent entwickelt. Bitte verwenden Sie dieses Gerät ausschliesslich für diesen Zweck.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemässen Anwendung gehören zudem:


- Die Beachtung der Anweisungen, Vorschriften und Hinweise in der vorliegenden BA
- Der Betrieb unter den vorgeschriebenen Umwelt- und Betriebsbedingungen (siehe Kapitel 9)
- Die korrekte Instandhaltung des Gerätes

2.1.1



Gefahren und Risiken

Es dürfen keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in die Lüftungsschlitze gelangen. Es könnte dadurch ein Blockieren des Motors oder ein Stromschlag verursacht werden.

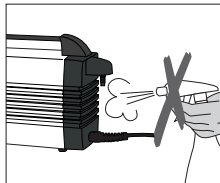

2.2 Sicherheits- und Gefahrenhinweise

- Beachten Sie, dass die Pumpe nur für den bestimmungsgemässen Gebrauch eingesetzt werden darf.
- Die Pumpen dürfen nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden.
- Komponenten, die man an die Pumpe anschliesst, müssen auf die pneumatischen Daten der Pumpen ausgelegt sein.
- Beachten Sie beim Anschluss der Pumpen an das Stromnetz die entsprechenden Sicherheitsregeln.
- Wird der Pumpenbetrieb durch den Thermoschutzschalter wegen Überhitzung unterbrochen, so startet die Pumpe nach der Abkühlung automatisch. Sorgen Sie dafür, dass hieraus keine Gefahrensituationen entstehen können.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Pumpe entspricht folgenden Richtlinien:
 - Richtlinie 2006/42/EG Maschinen
 - Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit.
- Wurde das Gerät bei grosser Kälte oder bei hoher Luftfeuchtigkeit gelagert, ist vor dem Anschluss an das Stromnetz (ohne Spannung) die Pumpe bei Raumtemperatur einer Austrocknungszeit bzw. einer Temperatur-Anpassungszeit von circa 1 Stunde zu unterziehen.



Nicht in der Nähe des Gerätes mit Flüssigkeiten hantieren. Sollte dennoch Flüssigkeit ins Gerät gelangen, Stecker ziehen und den Kundendienst konsultieren. Gerät nicht wieder in Betrieb setzen.

- Das Gerät ist in Höhen bis 2000 m N.N. geprüft.
- Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
- Es dürfen am Gerät keine technischen Veränderungen vorgenommen werden.

3. Produktbeschreibung



Jegliche Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder ausserhalb des Gerätes oder das Lösen des Schutzleiteranschlusses kann dazu führen, dass bei einem auftretenden Fehler das Gerät für den Betreiber eine Gefahr darstellt. Absichtliche Unterbrechung ist nicht zulässig.



Verwenden Sie keine Fremdöfen, die nicht auf das Gerät abgestimmt sind. Erkundigen Sie sich dabei beim entsprechenden Hersteller. Die Vakuumpumpe wurde speziell für die Programat-Brennöfen entwickelt und darf nur für die dafür bestimmten Zwecke verwendet werden.

Entsorgung:



Die Geräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte ausgediente Geräte gemäss der EU-Richtlinie fachgerecht entsorgen. Informationen zur Entsorgung finden Sie auf der jeweiligen nationalen Ivoclar Vivadent-Homepage.

3.1 Aufbau des Gerätes

Die Vakuumpumpe VP5 besteht aus folgenden Komponenten:

- Vakuumpumpe mit Netzkabel
- Vakuumschlauch (Zubehör)

3.2 Funktionsbeschreibung

Die zwischen dem Zylinderkopf und dem Gehäuse eingeklemmte Membrane wird über einen Pleuel auf- und abbewegt. Durch diese Bewegung und die Ein- und Auslassventile im Zylinderkopf wird die Luft aus der Brenn- bzw. Presskammer des Ofens abgesaugt, sodass ein Vakuum entsteht.

3.3 Gefahrenstellen und Sicherheitseinrichtungen

Bezeichnung der Gefahrenstellen:

Gefahrenstelle	Art der Gefährdung
Sicherungshalter	Stromschlag
Lüfterrad	Verletzung

Sicherheitseinrichtungen	Schutzwirkung
Schutzleiter	Schutz vor Stromschlag
IP20 (Schutzart)	Schutz vor Stromschlag
Thermoschutzschalter	Schützt Pumpe vor Überlastung
Abdeckung Lüfterrad	Schutz vor Stromschlag und Verletzung

4. Installation

4.1 Auspacken und Lieferumfang prüfen

Gerät aus der Verpackung nehmen und auf eventuelle Transportschäden überprüfen. Wir empfehlen, dass Sie die Originalverpackung für eventuelle Versandzwecke aufbewahren. Für den Versand verwenden Sie bitte nur die Originalverpackung.



Die elektrischen Installationen des Raumes, in dem sich das Gerät befindet, müssen den landesüblichen und den IEC-Normen entsprechen.

4.2 Standortwahl

Stellen Sie das Gerät mit den Gummifüßen (12) auf eine ebene Ablagefläche. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht einer direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist. Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbare Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen. Beachten Sie, dass zwischen Wand und Lüftungsschlitzen (3) genügend Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist. Achten Sie beim Aufstellen auch darauf, dass der Platz so gewählt wird, dass der Schalldämpfer durch das versehentliche Anstossen an Labormöbeln nicht abgeschlagen werden kann.


4.3 Anschlüsse herstellen

Typenschild mit Spannung überprüfen

Bitte prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (11) angegebene Spannung mit derjenigen Ihres Netzes übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, darf das Gerät nicht angeschlossen werden.

Vakuumschlauch anschliessen

Die Schutzkappe (10) des Vakuumschlauch-Anschlusses (4) entfernen und den Vakuumschlauch auf den Vakuumschlauch-Anschluss (4) stecken.

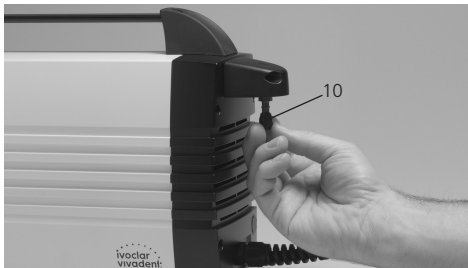

Das andere Schlauchende mit dem Ofen verbinden. Bitte prüfen Sie, ob der Schlauch einwandfrei aufgesteckt ist.

Netzanschluss herstellen

Netzstecker des Netzkabels (2) in die entsprechende Gerätesteckdose des Programats stecken. Dies ist zugleich der Netzanschluss.

5. Inbetriebnahme

Die Vakuumpumpe wird automatisch über den Ofen angesteuert, wenn Sie das Netzkabel der Pumpe mit dem Programat-Ofen verbinden.

6. Bedienung

Die Bedienung erfolgt über das Ofenprogramm.

7. Unterhalt, Reinigung und Diagnose



Aus sicherheitstechnischen Gründen bei sämtlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Netzstecker aus der Gerätesteckdose ziehen.

7.1 Kontroll- und Unterhaltsarbeiten

Die Membran-Vakuumpumpe benötigt grundsätzlich keine Wartung, ausser die Leistung der Vakuumpumpe verschlechtert sich durch Verschmutzung. Führen Sie aus diesem Grund mindestens einmal pro Jahr einen Vakuumtest aus.

Wann eine Wartungsarbeit durchgeführt werden soll, hängt stark von der Gebrauchsintensität und dem Standort der Pumpe ab. Aus diesem Grund stellen die empfohlenen Werte nur Richtwerte dar.

Was	Teil	Wann
Prüfen Sie, ob die Steckverbindung einwandfrei ist	Stecker	wöchentlich
Überprüfen Sie den Schlauch, damit kein Kondenswasser im Leitungssystem ist	Vakuumschlauch	wöchentlich



Dieses Gerät ist für den typischen Einsatz im Detaillabor entwickelt worden.

Falls das Produkt in einem Produktionsbetrieb, einer Industrieanwendung oder im Dauerbetrieb eingesetzt wird, muss mit einer vorzeitigen Alterung bzw. Verschmutzung gerechnet werden.

Verschleissteile sind z. B.:

- Schalldämpfer
- Strukturmembrane
- Ventilplatte

Verschleissteile sind von der Garantieleistung ausgenommen. Bitte beachten Sie dazu auch die verkürzten Service- und Wartungsintervalle.

7.2 Reinigungsarbeiten

Die Pumpe gelegentlich von Staub befreien. Verwenden Sie dazu zum Beispiel einen Staubsauger mit Reinigungspinsel.

Was	Wann	Mit was
Gehäuse	nach Bedarf	mit trockenem, weichem Lappen
Schalldämpfer (8)	bei starker Verschmutzung	austauschen

7.3 Wartungshinweise



Der Membranwechsel darf nur von einer Ivoclar Vivadent-Servicestelle durchgeführt werden. Der Sicherungswechsel darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Beachten Sie bitte die einschlägigen Unfallverhaltensvorschriften sowie die sonstigen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln.

8. Was ist, wenn ...?

8.1 Technische Störungen

Fehlerbeschreibung	Hinweise für den Anwender	Massnahme
1 Pumpe läuft nicht	<ul style="list-style-type: none">– Ist die Pumpe richtig angeschlossen?– Hat der Thermoschalter wegen Überhitzung angesprochen?– Schalldämpfer verstopft	<ul style="list-style-type: none">– Pumpe richtig anschliessen.– Pumpe abkühlen lassen und nochmals einschalten.– Pumpenstandort auf ausreichende Belüftung überprüfen.– Falls das Problem nicht gelöst werden kann, muss die zuständige Servicestelle kontaktiert werden.– Schalldämpfer austauschen.
2 Vakuumeistung verschlechtert sich oder ist schlecht	<ul style="list-style-type: none">– Wurde das Pumpen-Testprogramm durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none">– Pumpen-Testprogramm durchführen.– Vakuumpumpe zur Wartung an Servicestelle senden.
3 Vakuumpumpe erzeugt ungewöhnlich hohen Lärmpegel	<ul style="list-style-type: none">– Ist der Schalldämpfer defekt oder nicht richtig montiert?– Ist im Ofensystem oder in der Pumpe ein Leck vorhanden?	<ul style="list-style-type: none">– Schalldämpfer richtig aufschrauben oder bei Defekt ersetzen.– Anschlüsse und Schlauch auf Dichtheit prüfen.– Ofenkopfdichtung reinigen.– Pumpenleistung mit dem Testprogramm überprüfen.

8.2 Reparaturarbeiten



Reparaturarbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Ivoclar Vivadent-Servicestelle durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an den Kundenservice.

9. Produktspezifikationen

9.1 Lieferform

- Vakuumpumpe VP5
- Bedienungsanleitung
- Garantieschein
- Konformitätserklärung

9.2 Technische Daten

Netzanschluss: 230 V / 50–60 Hz / 0,40 A
200 V / 50–60 Hz / 0,50 A
115 V / 50–60 Hz / 0,85 A
100 V / 50–60 Hz / 0,95 A

Zulässige Spannungsschwankungen: +/- 10 %

Leistungsaufnahme: 80 W

Saugvermögen: 15 l / min.

Endvakuum
(gemessen mit 4 Liter Prüfbehälter): ca. 20 mbar

Masse: 415 x 122 x 230 mm (Länge, Breite, Höhe)

Gewicht: 8,0 kg

Sicherungstyp: 230 V: T 1,0 A 250 V
200 V: T 1,25 A 250 V
115 V: T 2,5 A 250 V
100 V: T 2,5 A 250 V

Sicherheitshinweise:

Die Pumpe entspricht folgenden Richtlinien:

- Richtlinie 2006/42/EG Maschinen
- Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit.

9.3 Zulässige Betriebsbedingungen

- Umgebungstemperatur im Betrieb: +5°C bis +40°C
- Zulässige Höhe:
Das Gerät ist für Höhen bis 2000 m geprüft.
- Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

9.4 Zulässige Transportbedingungen

- Umgebungstemperaturbereich: -10°C bis +55°C
- Maximale relative Feuchte: 80 %




Das Gerät wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Inbetriebnahme und Bedienung müssen gemäss Bedienungsanleitung erfolgen. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemässer Handhabung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Benutzer verpflichtet, das Gerät eigenverantwortlich vor Gebrauch auf Eignung und Einsetzbarkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

Pompe à vide VP5

	Page
Désignation des pièces	24
1. Introduction et explication des symboles	25
1.1 Préambule	
1.2 Introduction	
1.3 Explication des symboles	
2. La sécurité avant tout	26
2.1 Utilisation appropriée	
2.2 Consignes en matière de sécurité et de risque	
3. Désignation du produit	27
3.1 Conception de l'appareil	
3.2 Description du fonctionnement	
3.3 Zones de danger et dispositifs de sécurité	
4. Installation	28
4.1 Déballage et contrôle de la livraison	
4.2 Choix de l'emplacement	
4.3 Branchement	
4.4 Montage du silencieux	
5. Mise en service	29
6. Utilisation	29
7. Entretien, Nettoyage et Diagnostics	30
7.1 Travaux de contrôle et d'entretien	
7.2 Travaux de nettoyage	
7.3 Notices d'entretien	
8. Que faire si...	31
8.1 Défaillance technique	
8.2 Travaux de réparation	
9. Spécifications du produit	32
9.1 Présentation	
9.2 Fiche technique	
9.3 Conditions d'utilisation admises	
9.4 Conditions de transport	

Désignation des pièces

- 1 raccord du câble avec protection contre le pliage
- 2 câble secteur
- 3 fentes d'aération
- 4 raccord du tuyau de pompe
- 5 carter
- 6 tuyau de connexion
- 7 poignée de transport
- 8 silencieux
- 9 raccord du silencieux
- 10 capuchon de protection
- 11 plaque constructeur
- 12 pieds en caoutchouc

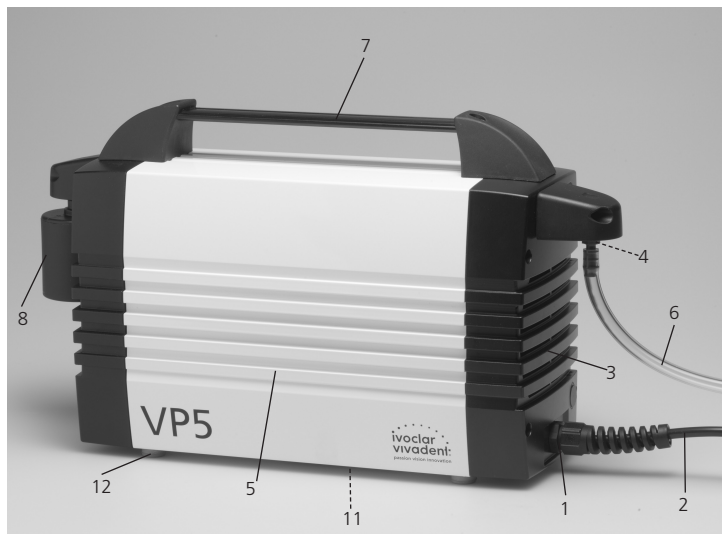

1. Introduction et explication des symboles

1.1 Préambule

Cher Client

Nous sommes très heureux que vous ayez choisi une pompe à vide Programat®. Il s'agit ici d'un appareil d'une grande qualité technique. Aussi, nous vous demandons de bien lire le mode d'emploi et d'utiliser l'appareil correctement.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre Dépôt ou directement Ivoclar Vivadent.

1.2 Introduction

Appareil concerné: Pompe à vide VP5
Groupe d'utilisateurs: Personnel qualifié en prothèse dentaire

Cette pompe à vide est adaptée à l'évacuation de l'air de la chambre de cuisson des fours à céramique Programat. Il s'agit ici d'une pompe à membrane ayant une capacité de vide élevée et un encombrement réduit.

Le mode d'emploi (ME) permet un usage sûr, fonctionnel et économique de la pompe VP5.

Le ME est divisé en plusieurs chapitres clairement désignés, ce qui permet de retrouver rapidement les sujets souhaités.

Pour attirer votre attention rapidement et clairement sur les dangers, les informations importantes et les utilisations non autorisées, les symboles (pictogrammes) correspondants seront indiqués à l'endroit voulu.

Nous vous recommandons de garder le ME dans un endroit protégé à proximité de l'appareil afin de pouvoir y accéder rapidement. En cas de perte du mode d'emploi, ce dernier peut être commandé auprès du service après-vente, ou vous pouvez le télécharger sur le site internet : www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter.

1.3 Explication des symboles

Les symboles contenus dans ce mode d'emploi vous facilitent la recherche des points importants et vous donnent les informations suivantes :

Dans le Mode d'emploi :



Risques de danger



Informations



Utilisation non Autorisée

Sur l' Appareil :



Courant alternatif

2. La sécurité avant tout

Ce chapitre est à lire obligatoirement par toutes les personnes qui travaillent avec l'appareil ou qui effectuent des travaux d'entretien ou de réparation. Les indications sont à suivre.

2.1 Utilisation appropriée

La pompe à vide a été spécialement conçue pour l'évacuation de l'air des fours de cuisson Programat Ivoclar Vivadent. Veuillez utiliser cet appareil uniquement pour cet effet.

Une autre utilisation ou allant au-delà de cette indication est considérée comme inappropriée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une telle utilisation. Le risque est supporté uniquement par l'utilisateur.

Une utilisation appropriée comprend en outre:


- le respect des instructions, des prescriptions et des informations contenues dans le présent ME
- l'utilisation suivant les conditions d'environnement et de fonctionnement de rigueur (voir chapitre 9)
- l'entretien correct de l'appareil

2.1.1




Risques de danger

Aucun objet ou liquide ne doit parvenir dans les événements d'aération. Cela pourrait bloquer le moteur ou occasionner une décharge électrique.

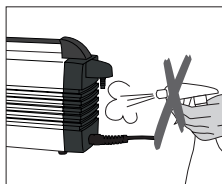

2.2 Consignes en matière de sécurité et de risque

- veillez à ce que la pompe soit utilisée uniquement d'après les prescriptions
 - la pompe ne doit pas être installée dans un endroit où il y a un risque d'explosion
 - les éléments sur lesquels la pompe est branchée doivent correspondre aux données pneumatiques de celle-ci
 - respecter les règles de sécurité correspondantes lors du branchement de la pompe au réseau électrique
 - si le fonctionnement de la pompe est interrompu à la suite du déclenchement du disjoncteur thermique à cause d'une surchauffe, la pompe se réactive automatiquement après refroidissement. Veillez à ce que ce mode de fonctionnement n'entraîne pas de situation de danger.
 - utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine
 - la pompe est conforme aux directives suivantes :
 - Directive 2006/42/EC sur les machines
 - Directive 2004/108/EC sur la compatibilité électromagnétique
 - si l'appareil a été stocké par grand froid ou humidité élevée, avant son utilisation, il faudra le laisser sécher ou le laisser à température ambiante pendant 1 heure environ (hors tension)
-  Ne pas manipuler de liquide au-dessus de l'appareil. Si toutefois, du liquide parvenait à s'introduire dans celui-ci, débrancher l'appareil du secteur et consulter le service après-vente. Ne plus mettre l'appareil en marche.
- l'appareil est contrôlé jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer.
 - l'appareil ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
 - l'appareil ne doit pas subir de modifications techniques.

3. Description du produit



Toute interruption du fil de protection terre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil ou le détachement du fil de protection terre peut représenter un danger pour l'utilisateur en cas de panne. Une interruption volontaire n'est pas admise.



Ne pas utiliser d'autres fours qui ne sont pas adaptés à la pompe. Renseignez-vous auprès du fabricant. La pompe à vide a été conçue spécialement pour les fours de cuisson Programat et doit uniquement être utilisée pour les usages prévus à cet effet.

Elimination en fin de vie :



L'appareil ne peut être jeté avec les ordures ménagères. L'appareil usagé doit être recyclé par des professionnels selon la directive CE. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des déchets sur la page d'accueil du site Ivoclar Vivadent de votre pays.

3.1 Conception de l'appareil

La pompe à vide VP5 est composée de :

- pompe à vide avec câble secteur
- tuyau (accessoire)

3.2 Description du fonctionnement

La membrane située entre la tête du cylindre et le carter est activée de haut en bas par une bielle. Grâce aux valves d'entrée et de sortie placées dans la tête du cylindre l'air de la chambre de chauffe du four est aspiré, créant ainsi le vide.

3.3 Zones de danger et dispositifs de sécurité

Désignation des endroits dangereux :

Endroits dangereux	Types de danger
porte-fusibles	décharge électrique
ventilateur	blessure

Dispositifs de sécurité	Type de protection
fil de protection terre	protection contre la décharge électrique
IP20 (type de protection)	protection contre la décharge électrique
Disjoncteur thermique	protège la pompe de surcharge
Cache de ventilateur	protection contre la décharge électrique et la blessure

4. Installation

4.1 Déballage et contrôle de la livraison

Sortir l'appareil de son emballage et contrôler son bon état. Nous vous conseillons de conserver l'emballage d'origine et de l'utiliser pour tout envoi éventuel.



Les installations électriques de la pièce où se trouve l'appareil doivent être conformes aux normes en vigueur du pays et aux normes IEC.

4.2 Choix de l'emplacement

Positionner les pieds en caoutchouc (12) de l'appareil sur une surface plate. Veiller à ce que celui-ci ne soit pas exposé directement aux rayons solaires. Ne pas installer l'appareil à proximité de radiateurs ou de toute autre source de chaleur.

Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour la circulation de l'air entre le mur et les fentes d'aération (3). Faire attention aussi à ce que l'emplacement choisi n'expose pas le silencieux à un risque de détachement ou de cassure.

4.3 Branchement

Contrôle du voltage indiqué sur la plaque signalétique
Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique (11) corresponde bien à celle du secteur. Le cas échéant, ne pas brancher l'appareil.

Branchement du tuyau de vide

Retirer les protecteurs (10) du raccord du tuyau de la pompe (4) et pousser le tuyau de la pompe sur le raccord de celui-ci.



Relier l'autre extrémité du tuyau au four.
Contrôler si le tuyau est enfoncé correctement.

Branchement au secteur

Introduire la fiche de branchement de la pompe (2) du câble secteur (3) dans la prise de courant correspondante du Programat.

5. Mise en service

La pompe à vide est activée automatiquement par le four si vous reliez le câble secteur de la pompe avec le four.

6. Utilisation

L'utilisation s'effectue par le programme du four

7. Entretien, nettoyage et diagnostics



Pour des raisons techniques de sécurité, il est obligatoire de retirer la fiche de branchement (2) de la pompe de la prise de courant de l'appareil pour tous les travaux de maintenance et d'entretien.

7.1 Travaux de contrôle et d'entretien

La membrane de la pompe à vide ne nécessite aucune maintenance, à moins que la performance de la pompe se détériore par salissure. Pour cette raison réalisez au moins une fois par an un test de vide.

La périodicité des travaux d'entretien dépend de l'intensité d'utilisation et de l'emplacement de la pompe. De ce fait, les valeurs indiquées sont données à titre d'orientation.

Quoi	Partie	Quand
Vérifier si le branchement secteur est en bon état	Fiche de l'appareil	hebdomadaire
Vérifier le tuyau afin qu'il n'y ait pas d'eau de condensation dans le circuit	Tuyau de pompe	hebdomadaire



Cet appareil a été conçu pour une utilisation bien définie au laboratoire de prothèse dentaire.

Pour le cas où cet appareil est utilisé dans une entreprise de production, pour une application industrielle ou en fonctionnement continue, il faut s'attendre à un vieillissement précoce et/ou à une salissure plus importante.

Des pièces d'usure sont p. ex. :

- silencieux
- membrane
- plaque de valves

Les pièces d'usure sont exclues de la garantie. Respecter aussi dans ce contexte les intervalles raccourcis de service et d'entretien.

7.2 Travaux de nettoyage

Dépoussiérer de temps en temps la pompe en utilisant par ex. un aspirateur avec un pinceau de nettoyage.

Quoi	Quand	Moyens
carter	si nécessaire	chiffon sec et doux
silencieux (8)	souillure importante	remplacer

7.3 Notice d'entretien



Le changement de la membrane ne peut être effectué que par le Service technique Ivoclar Vivadent. Le remplacement des fusibles ne peut être fait que par du personnel qualifié.

Respecter les prescriptions de prévention des accidents ainsi que les autres règles techniques de sécurité et de médecine du travail.

8. Que faire si ...

8.1 Défaillance technique

Description des erreurs	Indication pour l'utilisateur	Mesures
1 La pompe ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">– Est-ce que la pompe est bien branchée?– Le disjoncteur thermique de surchauffe s'est-il déclenché?– le silencieux est obstrué	<ul style="list-style-type: none">– Bien brancher la pompe.– Laisser refroidir la pompe et allumer à nouveau.– Contrôler que l'endroit où est installée la pompe soit suffisamment aéré.– Si le problème ne peut être résolu, contacter le Service technique responsable.– remplacer le silencieux.
2 La capacité du vide est altérée ou est de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none">– Est-ce que le programme-test de la pompe a été effectué?	<ul style="list-style-type: none">– Effectuer le programme test de la pompe– Envoyer la pompe au Service Technique pour maintenance
3 Le niveau sonore de la pompe est trop élevé	<ul style="list-style-type: none">– Est-ce que le silencieux n'est-il pas défectueux et est-il monté correctement?– Y a-t-il une fuite dans le système du four ou dans la pompe?	<ul style="list-style-type: none">– Visser correctement le silencieux ou le remplacer s'il est défectueux– Contrôler l'étanchéité des raccords et du tuyau.– Nettoyer le joint du couvercle du four.– Contrôler la capacité de la pompe en effectuant le programme-test

8.2 Travaux de réparation



Les travaux de réparation ne doivent être réalisés que par un Service technique qualifié Ivoclar Vivadent. Veuillez vous adresser pour cela au Service clientèle.

9. Spécifications du produit

9.1 Présentation

- pompe à vide VP5
- mode d'emploi
- bon de garantie
- certificat de conformité

9.2 Fiche technique

Branchement au secteur : 230 V / 50–60 Hz / 0,40 A
200 V / 50–60 Hz / 0,50 A
115 V / 50–60 Hz / 0,85 A
100 V / 50–60 Hz / 0,95 A

Variations de tension admise : +/- 10%

Puissance absorbée : 80 W

Capacité d'aspiration : 15 l / min.

Vide final (mesuré avec un contenant
de test de 4 l) : env. 20 mbar

Encombrement : 415 x 122 x 230 mm
(Longueur, largeur, hauteur)

Poids : 8,0 kg

Fusibles : 230 V: T 1,0 A 250 V
200 V: T 1,25 A 250 V
115 V: T 2,5 A 250 V
100 V: T 2,5 A 250 V

Recommandation de sécurité :

La pompe est conforme aux directives suivantes :

- Directive 2006/42/EC sur les machines
- Directive 2004/108/EC sur la compatibilité électromagnétique

9.3 Conditions d'utilisation admises

- Température ambiante au moment de l'utilisation :
+5 °C à +40 °C
- Hauteur admise :
L'appareil a été testé à une altitude jusqu'à 2000 m
- Indice de pollution 2
Indice de protection II

9.4 Conditions de transport et de stockage

- Température ambiante de : -10 °C à +55 °C
- Humidité relative de l'air max. : 80%




Cet appareil a été développé pour un usage dans le domaine dentaire. La mise en service et l'utilisation doivent s'effectuer conformément au mode d'emploi. L'utilisation de l'appareil pour un usage autre que celui mentionné dans la documentation et le mode d'emploi est à proscrire. Les dommages résultant du non-respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation de l'appareil à l'utilisation prévue et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode d'emploi.

Pompa per il vuoto VP5

	Pag.
Elenco particolari	34
1. Introduzione e descrizione dei simboli	35
1.1 Premessa	
1.2 Introduzione	
1.3 Descrizione dei simboli	
2. La sicurezza innanzitutto	36
2.1 Utilizzo secondo le prescrizioni	
2.2 Avvertenze di sicurezza e di pericolo	
3. Descrizione prodotto	37
3.1 Costruzione dell'apparecchio	
3.2 Descrizione delle funzioni	
3.3 Indicazioni di pericolo e protezioni	
4. Installazione	38
4.1 Disimballaggio e controllo del contenuto	
4.2 Scelta del luogo d'installazione	
4.3 Montaggio ed allacciamenti	
4.4 Montaggio del silenziatore	
5. Messa in funzione	39
6. Utilizzo pratico	39
7. Manutenzione, pulizia e diagnosi	40
7.1 Lavori di manutenzione e di controllo	
7.2 Pulizia dell'apparecchio	
7.3 Avvertenze di manutenzione	
8. Cosa succede, se...	41
8.1 Disturbi tecnici	
8.2 Riparazioni	
9. Specifiche del prodotto	42
9.1 Presentazione	
9.2 Dati tecnici	
9.3 Condizioni ammesse per il funzionamento	
9.4 Condizioni ammesse per il trasporto	

Elenco particolari

- 1 avvitamento cavo con protezione
- 2 cavo di allacciamento
- 3 fessure di areazione
- 4 allacciamento tubo del vuoto
- 5 intelaiatura
- 6 tubo di collegamento
- 7 maniglia per il trasporto
- 8 silenziatore
- 9 collegamento per silenziatore
- 10 cappuccio di protezione
- 11 targhetta
- 12 piedini

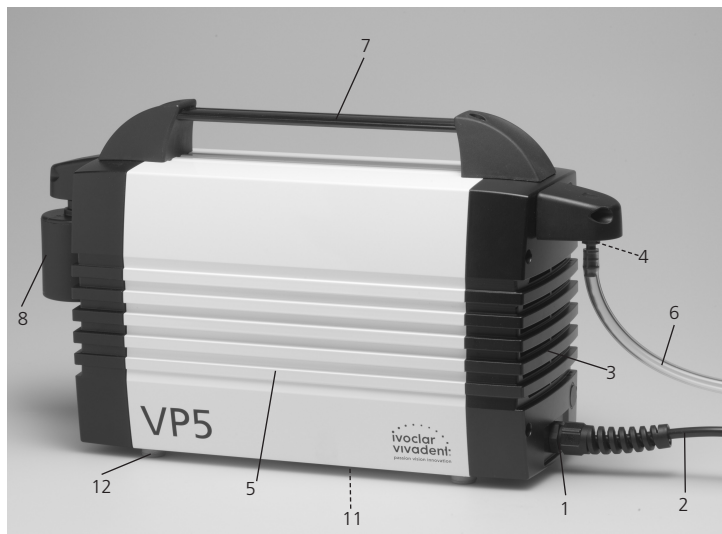

1. Introduzione e descrizione dei simboli

1.1 Premessa

Egregio Cliente

Siamo lieti che abbia acquistato una pompa per il vuoto Programat®. Questo apparecchio è un prodotto di elevata tecnologia. La preghiamo di leggere le istruzioni d'uso e di impiegare l'apparecchio secondo quanto riportato in esse. Nel caso abbia ulteriori domande in merito, la preghiamo di rivolgersi al Suo concessionario di fiducia o direttamente alla Ivoclar Vivadent.

1.2 Introduzione

Apparecchio: Pompa per il vuoto VP5
Destinatari: personale odontotecnico qualificato

La presente pompa per il vuoto è indicata per l'evacuazione della camera di cottura dei forni per cottura di ceramica Programat®. Si tratta di una pompa a membrana di elevata capacità.

Le istruzioni d'uso servono ad un impiego sicuro, corretto ed economico della pompa VP5. Le istruzioni d'uso sono suddivise in diversi capitoli. In questo modo è possibile una ricerca veloce dei diversi temi contenuti.

Per poter informare in modo veloce e chiaro sui pericoli, informazioni importanti ed impieghi non ammessi, vengono utilizzati i relativi simboli (pittogrammi).

Le consigliamo di conservare le istruzioni d'uso in luogo protetto nelle vicinanze del forno, in modo da averle sempre a portata di mano per ogni consultazione. In caso di smarrimento delle istruzioni d'uso, La preghiamo di rivolgersi al Servizio Assistenza Ivoclar che provvederà all'inoltrare oppure potrà scaricarle dal nostro Download-Center dal sito www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter.

1.3 Descrizione dei simboli

I simboli riportati nelle istruzioni d'uso e sull'apparecchio facilitano la ricerca di punti importanti ed hanno il seguente significato:

Nelle istruzioni d'uso:



Pericoli con rischi



Informazioni



Impieghi non ammessi

Sull'apparecchio:



Corrente alternata

2. La sicurezza innanzitutto

Questo capitolo deve essere letto da tutte le persone che lavorano con l'apparecchio o che eseguono lavori di manutenzione o pulizia. E' assolutamente necessario attenersi alle indicazioni ed avvertenze!

2.1 Utilizzo secondo le prescrizioni

La pompa per il vuoto VP5 è stata espressamente sviluppata per l'evacuazione dei forni per cottura di ceramica Programat della Ivoclar Vivadent. Si prega di utilizzare questo apparecchio soltanto per questo scopo.

Un impiego diverso, corrisponde ad un uso non conforme. Per i danni che ne derivano il produttore non è responsabile. Il rischio è ad esclusivo carico dell'utilizzatore.

Per un uso corretto sono necessari inoltre:


- L'osservanza delle avvertenze, indicazioni e prescrizioni della presente istruzione d'uso.
- L'impiego in osservanza delle normative ambientali e di utilizzo (vedi capitolo 9).
- La corretta manutenzione dell'apparecchio.

2.1.1




Pericoli e rischi

Non devono penetrare corpi estranei o liquidi nelle fessure di areazione. In tal caso si potrebbe causare un blocco del motore o una scarica di corrente.

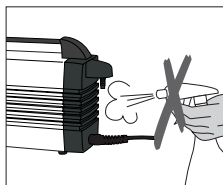

2.2 Avvertenze di sicurezza e di pericolo

- Consideri che l'apparecchio può essere impiegato soltanto per l'uso previsto
 - La pompa non deve essere impiegata in ambiente esposto a pericolo di esplosioni.
 - Componenti che si collegano alla pompa devono corrispondere ai dati pneumatici della pompa.
 - Nell'allacciamento della pompa alla rete elettrica, osservare le relative regole di sicurezza.
 - Se il funzionamento della pompa viene interrotto dall'interruttore di sicurezza termica a causa di surriscaldamento, dopo il raffreddamento la pompa si riavvia automaticamente. Provvedere affinché in questi casi non nascano situazioni di pericolo.
 - Possono essere utilizzati soltanto ricambi originali.
 - La pompa corrisponde alle seguenti direttive:
 - Direttiva 2006/42/CE macchine
 - Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica
 - Se l'apparecchio è stato conservato in luogo molto freddo o con un'elevata umidità dell'aria, prima dell'utilizzo, è necessario sottoporre l'apparecchio (senza tensione) ad un tempo di asciugatura di ca. 1 ora a temperatura ambiente.
-  Attenzione: non manipolare liquidi sull'apparecchio; in caso di versamento accidentale di liquidi nell'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente e consultare il servizio assistenza. Non mettere in funzione l'apparecchio.
- L'apparecchio è stato testato per altitudini fino a 2000 m s.l.m.
 - L'apparecchio può essere utilizzato soltanto in locali interni.
 - L'apparecchio non deve essere sottoposto a modifiche tecniche.

3. Descrizione prodotto



Qualsiasi interruzione del conduttore di protezione all'interno o all'esterno dell'apparecchio, oppure il distacco dell'allacciamento del conduttore di protezione può rappresentare un pericolo per l'utilizzatore in caso di riscontro di difetto. Non è ammessa l'interruzione volontaria.



Non utilizzare forni di altra fabbricazione, non calibrati con il presente apparecchio. Si informi presso il relativo produttore. La pompa per il vuoto è stata sviluppata espressamente per i forni Programat e può essere impiegata soltanto per gli usi previsti.

Smaltimento:



L'apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti urbani. Smaltire l'apparecchio in modo corretto secondo la Direttiva CE. Si trovano informazioni in merito allo smaltimento sul sito nazionale Ivoclar Vivadent.

3.1 Costruzione dell'apparecchio

La pompa per il vuoto VP5 si compone come segue:

- Pompa per il vuoto con cavo di allacciamento corrente
- Tubo per il vuoto (accessori)

3.2 Descrizione della funzione

La membrana situata fra testa del cilindro e carcassa viene mossa in alto ed in basso da una biella. Attraverso le valvole di entrata e uscita nella testa del cilindro viene creato il vuoto.

3.3 Indicazioni di pericolo e protezioni

Descrizione dei punti di pericolo:

Punto di pericolo	Tipo di pericolo
Portafusibile	Scarica di corrente
Ventola di areazione	Ferita

Tipo di protezione	Effetto protettivo
Conduttore di protezione	Protezione da scarica di corrente
IP20 (tipo di protezione)	Protezione da scarica di corrente
Interruttore di protezione termica	Protegge la pompa da sovraccarico
Copertura ventola di areazione	Protezione da scarica di corrente

4. Installazione

4.1 Disimballaggio e controllo del contenuto

Prelevare l'apparecchio dall'imballaggio e controllare l'eventuale presenza di danni dovuti al trasporto. Si consiglia di conservare l'imballaggio originale per eventuali successivi trasporti. Per trasporti si prega di utilizzare l'imballaggio originale.



L'installazione elettrica del locale nel quale si trova l'apparecchio, deve corrispondere alle norme locali vigenti ed alle norme IEC.

4.2 Scelta del luogo di installazione


Posizionare l'apparecchio con i piedini in gomma (12) su una superficie piana. Fare attenzione a non posizionare l'apparecchio in luogo esposto ai raggi diretti del sole o nelle dirette vicinanze di caloriferi o altre fonti di calore. Controllare che fra la parete e le fessure di areazione (3) vi sia sufficiente spazio per la circolazione dell'aria. Prestare attenzione che il silenziatore non venga involontariamente staccato urtando oggetti o mobili.

4.3 Allacciamenti

Controllare la targhetta con i dati della tensione.
Controllare che la tensione riportata sulla targhetta (11) corrisponda a quella della sua rete. Nel caso in cui non corrisponda, l'apparecchio non deve essere collegato.

Allacciamento tubo per il vuoto

Togliere il cappuccio di protezione (10) dell'allacciamento del tubo del vuoto (4) ed inserire il tubo del vuoto sull'allacciamento.

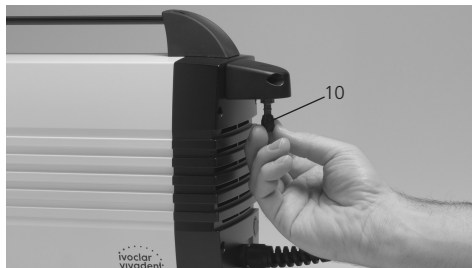

Collegare l'altra parte del tubo al forno.
Controllare che il tubo sia collegato correttamente.

Allacciamento alla rete

Inserire la spina del cavo di allacciamento (2) nella relativa presa del Programat. Questo è contemporaneamente anche il collegamento alla rete.

5. Messa in funzione

La pompa per il vuoto viene messa in funzione automaticamente attraverso il forno, dopo aver collegato il cavo della pompa con il forno.

6. Utilizzo pratico

L'utilizzo avviene attraverso i programmi del forno.

7. Manutenzione, pulizia e diagnosi



Per motivi tecnici di sicurezza, per qualsiasi lavoro di manutenzione o pulizia staccare la spina dalla presa di corrente.

7.1 Lavori di controllo e manutenzione

La pompa a membrana generalmente non necessita di manutenzione, eccetto nel caso in cui la prestazione della pompa diminuisca in seguito a impurità. Si consiglia pertanto di effettuare un test del vuoto almeno una volta all'anno.

La necessità di un lavoro di manutenzione dipende notevolmente dall'intensità di utilizzo e dal luogo di installazione della pompa. Per questo motivo i valori riportati sono soltanto indicativi.

Cosa	Particolare	Quando
Controllare che i collegamenti siano intatti	Spina	Settimanalmente
Controllare l'eventuale presenza di acqua di condensa nel tubo	Tubo del vuoto	Settimanalmente



Questo apparecchio è stato sviluppato espressamente per l'impiego in laboratorio odontotecnico.

Nel caso in cui l'apparecchio venga impiegato in un'impresa di produzione, per un impiego industriale o per un funzionamento continuato è necessario tenere in considerazione un precoce invecchiamento (logorio) dei componenti di usura.

Sono considerati componenti soggetti ad usura p.e.:

- silenziatore
- membrana
- piastra della valvola

Questi componenti soggetti ad usura sono esclusi dalla prestazione della garanzia.

Si prega di considerare anche intervalli di assistenza e manutenzione più brevi.

7.2 Pulizia

Rimuovere occasionalmente la polvere dalla pompa. Utilizzare a tal scopo per esempio un aspirapolvere ed un pennellino per pulizia.

Cosa	Quando	Con cosa
Intelaiatura	Secondo necessità	con un panno morbido ed asciutto
Silenziatore (8)	In caso di forte imbrattamento	sostituirlo

7.3 Avvertenze di manutenzione



La membrana può essere sostituita soltanto dal servizio assistenza Ivoclar Vivadent. Il fusibile può essere sostituito soltanto da personale qualificato.

Si prega di attenersi a tutte le prescrizioni di anti-infortunistica nonché a tutte le riconosciute regole di sicurezza tecnica e di medicina del lavoro.

8. Cosa succede, se ...

8.1 Segnalazioni di errori

Descrizione dell'errore	Avvertenze per l'operatore	Provvedimenti
1 La pompa non funziona	<ul style="list-style-type: none">- La pompa è collegata correttamente?- Si è acceso l'interruttore di sicurezza termica a causa di surriscaldamento?- Silenziatore intasato	<ul style="list-style-type: none">- Collegare correttamente la pompa.- Lasciar raffreddare la pompa e riaccenderla nuovamente.- Controllare che nel luogo di installazione vi sia sufficiente aerazione.- Se il problema non viene risolto, contattare il servizio assistenza.- Sostituire il silenziatore.
2 Potenza del vuoto sta' peggiorando o è peggiorata	<ul style="list-style-type: none">- E' stato eseguito il programma di test della pompa?	<ul style="list-style-type: none">- Eseguire il programma di test della pompa- Inviare la pompa per il vuoto al servizio assistenza per la manutenzione
3 Pompa per il vuoto eccessivamente rumorosa	<ul style="list-style-type: none">- Il silenziatore è difettoso e non montato correttamente?- Vi è una perdita nel sistema del forno o nella pompa?	<ul style="list-style-type: none">- Avvitare correttamente il silenziatore o se difettoso sostituirlo.- Controllare l'ermeticità degli allacciamenti e del tubo.- Pulire la guarnizione della cappa del forno.- Controllare la capacità di vuoto della pompa con il programma di test.

8.2 Riparazioni



Le riparazioni possono essere eseguite soltanto dal servizio assistenza Ivoclar Vivadent o tecnici qualificati. Si prega di rivolgersi quindi al servizio assistenza Ivoclar Vivadent.

9. Specifiche del prodotto

9.1 Presentazione

- Pompa per il vuoto VP5
- Istruzioni d'uso
- Certificato di garanzia
- Dichiarazione di conformità

9.2 Dati tecnici Daten

Allacciamento elettrico: 230 V / 50–60 Hz / 0,40 A
200 V / 50–60 Hz / 0,50 A
115 V / 50–60 Hz / 0,85 A
100 V / 50–60 Hz / 0,95 A

Oscillazioni di tensione ammesse: +/- 10%

Assorbimento di potenza: 80 W

Potenza di aspirazione: 15 l / min.

Vuoto finale (misurazione con
contenitore di prova da 4 litri): ca. 20 mbar

Dimensioni: 415 x 122 x 230 mm
(lunghezza, larghezza, altezza)

Peso: 8,0 kg

Tipo di fusibili: 230 V: T 1,0 A 250 V
200 V: T 1,25 A 250 V
115 V: T 2,5 A 250 V
100 V: T 2,5 A 250 V

Avvertenze di sicurezza:

La pompa corrisponde alle seguenti direttive:

- Direttiva 2006/42/CE macchine
- Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica

9.3 Condizioni ammesse per il funzionamento

- Campo di temperatura ambientale nel funzionamento:
+5 °C fino a +40 °C
- Altitudine ammessa:
L'apparecchio è ammesso per altitudini fino
a 2000 m s.l.m.
- Grado di inquinamento 2
Categoria di sovratensione II

9.4 Condizioni ammesse per il trasporto

- Campo di temperatura ambientale da:
-10 °C fino a +55 °C
- Umidità relativa massima di: 80%



L'apparecchio è stato realizzato per l'impiego nel campo dentale e deve essere utilizzato secondo le istruzioni d'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da diverso o inadeguato utilizzo. L'utente è tenuto a controllare personalmente l'idoneità del prodotto per gli impieghi da lui previsti soprattutto, se questi impieghi non sono riportati nelle istruzioni d'uso.


Bomba de vacío VP5

Página

Aparato, Despiece	44
1. Introducción y explicación de los símbolos	45
1.1 Prefacio	
1.2 Introducción	
1.3 Indicadores y símbolos	
2. La seguridad, lo primero	46
2.1 Indicaciones	
2.2 Instrucción sanitarias y de seguridad	
3. Descripción del aparato	47
3.1 Componentes del aparato	
3.2 Funcionamiento	
3.3 Zonas peligrosas y equipamiento de seguridad	
4. Instalación	48
4.1 Desembalaje y revisión del contenido	
4.2 Elección del lugar de instalación	
4.3 Conexiones	
4.4 Montaje del silenciador	
5. Puesta en marcha	49
6. Funcionamiento	49
7. Mantenimiento, limpieza y diagnóstico	50
7.1 Seguimiento y mantenimiento	
7.2 Limpieza	
7.3 Notas acerca del mantenimiento	
8. ¿Qué sucede, sí ...?	51
8.1 Fallos técnicos	
8.2 Reparaciones	
9. Especificación del producto	52
9.1 Suministro	
9.2 Datos técnicos	
9.3 Condiciones de funcionamiento aceptables	
9.4 Condiciones de transporte aceptables	

Despiece

- 1 Conexión de cable con protección de unión.
- 2 Cable eléctrico
- 3 Rejilla de ventilación
- 4 Conexión para el tubo de vacío
- 5 Carcasa
- 6 Tubo de conexión
- 7 Asa de transporte
- 8 Silenciador
- 9 Conexión del silenciador
- 10 Protector
- 11 Placa de especificaciones
- 12 Patas de goma

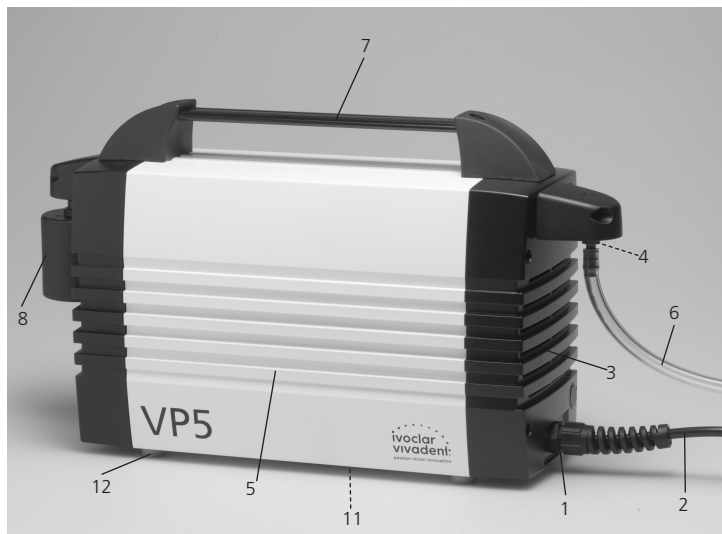

1. Introducción / Indicadores y símbolos

1.1 Prefacio

Estimado cliente,

Gracias por haber comprado la bomba de vacío Programat® VP5. Este aparato es un producto técnico de alta calidad. Por favor, lea con atención las instrucciones de uso y utilice la bomba respetando dichas instrucciones. Si le surgiera cualquier pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con su distribuidor local o, directamente con Ivoclar Vivadent.

1.2 Introducción

Aparato: Bomba de vacío VP5
Grupo objetivo: Personal de laboratorios dentales

Esta bomba de vacío está indicada para evacuar la cámara de cocción del horno de cerámica Programat. Se trata de una silenciosa bomba de doble diafragma con un alto rendimiento de vacío.

Estas instrucciones de uso están pensadas para asegurar el correcto, seguro y económico uso de la bomba de vacío VP5 y están divididas en varios capítulos claramente estructurados para ayudarle a encontrar tópicos específicos de forma rápida y fácil.

Los indicadores y símbolos (pictogramas) se utilizan para informarle rápida y claramente acerca de los riesgos de salud, importantes detalles y contraindicaciones.

Le recomendamos que conserve estas instrucciones de uso en un lugar seguro, próximo a la bomba, con el fin de tenerlas siempre a mano en el caso en que las necesite. En caso de pérdida de las instrucciones de uso, solicítelas, a precio nominal, al Departamento de atención al cliente o descárguelas de la página www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter.

1.3 Indicadores y símbolos

Los indicadores y símbolos utilizados en estas instrucciones de uso y en la bomba, facilitan la localización de puntos importantes y tienen el siguiente significado:

Instrucciones de uso:



Riesgos y peligros



Información



Contraindicación

Bomba:



Corriente alterna

2. La seguridad lo primero

Este capítulo es especialmente importante para el personal que trabaja con la bomba de vacío VP5 o los que tienen que realizar trabajos de mantenimiento o reparaciones. Este capítulo debe leerse y se deben respetar las correspondientes instrucciones.

2.1 Indicaciones

Esta bomba de vacío ha sido especialmente desarrollada para la evacuación de los hornos de cerámica Programat de Ivoclar Vivadent y sólo deberá utilizarse para dicho propósito.

Cualquier otro uso distinto de los especificados, está contraindicado. El fabricante no asume responsabilidad alguna de daños que puedan producirse de un mal uso. El usuario es el único responsable de los riesgos que puedan producirse por el fallo de la no observancia de estas instrucciones en uso.

Instrucciones adicionales para asegurar un uso apropiado de la bomba:


- Se deben respetar las instrucciones, regulaciones y notas de las instrucciones de uso de la bomba.
- La bomba debe funcionar bajo las condiciones ambientales y condiciones de funcionamiento indicadas (capítulo 9).
- VP5 se debe conservar adecuadamente.

2.1.1



Riesgos y peligros

Se debe evitar que se introduzcan objetos extraños o líquidos en las rejillas de ventilación, ya que esto podría provocar un bloqueo del motor o una descarga eléctrica.

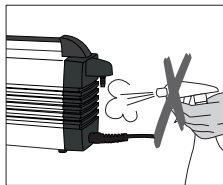

2.2 Instrucciones sanitarias y de seguridad

- Asegúrese de que la bomba solo se utiliza para las indicaciones especificadas en estas instrucciones de uso.
- No utilizar la bomba en zonas dónde exista peligro de explosión.
- Los componentes conectados con la bomba deben cumplir con los datos neumáticos de la misma.
- Cuando se conecte la bomba a una red eléctrica, se deben observar las correspondientes regulaciones de seguridad.
- Si el funcionamiento de la bomba se interrumpe por el interruptor térmico por un sobrecalentamiento, la bomba vuelve a funcionar tan pronto como se haya enfriado. Asegúrese de que no se producido ningún daño debido a dicho incidente.
- Utilizar únicamente piezas de repuesto originales.
- La bomba cumple con las siguientes directivas:
 - Directiva 2006/42/CE de maquinaria
 - Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética
- Si la bomba se ha almacenado a bajas temperaturas o alta humedad atmosférica, ésta se debe secar o dejar en reposo durante aproximadamente 1 hora hasta que alcance temperatura ambiente (no conectar a la red durante ese tiempo).



No trabajar con líquidos cerca de la bomba. Si accidentalmente entrara líquido en la bomba, desconectarla de la red y consultar el servicio de atención al cliente. No poner en marcha la bomba.

- La bomba está probada para su funcionamiento hasta una altitud de 2000 metros por encima del nivel del mar.
- La bomba sólo se puede utilizar en el interior de edificios.
- La bomba no se debe modificar técnicamente.



Cualquier rotura del conductor protector (toma de tierra), bien dentro o fuera de la bomba o cualquier pérdida de la conexión del conductor protector, puede provocar peligro para el usuario en el caso de avería. El horno no tolera interrupciones deliberadas.



No utilizar hornos de otros fabricantes que no estén coordinados con la bomba. Para más detalles consultar con el fabricante correspondiente. La bomba de vacío se ha desarrollado especialmente para su uso con los hornos de cerámica Programat y sólo debe utilizarse con ese propósito.

Eliminación:



El aparato no se debe eliminar con la basura doméstica común. Elimine los viejos hornos correctamente, de acuerdo con las correspondientes directrices de la UE. También puede encontrar información sobre la correcta eliminación en la página de Ivoclar Vivadent de su país.

3. Descripción del Producto

3.1 Componentes del aparato

La bomba de vacío VP5 se compone de los siguientes componentes:

- Bomba de vacío con cable eléctrico
- Manguera de vacío (accesorio)

3.2 Descripción funcional

El diafragma encajado entre el cabezal del cilindro y la carcasa se mueve hacia arriba o hacia abajo mediante una biela. Mediante dicho movimiento y por medio de válvulas de succión y educación en el cabezal del cilindro, se evacua la cámara de cocción y/o inyección del horno y se forma el vacío.

3.3 Zonas peligrosas y equipamiento de seguridad

Descripción de las zonas peligrosas de la bomba:

Zona peligrosa	Tipo de riesgo
Portafusible	Descarga eléctrica
Ventilador	Lesión

Equipamiento de seguridad	Efecto protector
Conductor protector (toma de tierra)	Protección frente a una descarga eléctrica
IP20 (tipo de protección)	Protección frente a una descarga eléctrica
Interruptor térmico	Protección frente al sobrecalentamiento
Tapa de ventilador	Protección frente a una descarga eléctrica y lesiones

4. Instalación

4.1 Desembalaje y revisión del contenido

Sacar la bomba de su embalaje y revisar por si hubiera sufrido daños de transporte. Recomendamos conservar el embalaje original para futuros transportes. Utilizar únicamente el embalaje original para envíos.



La instalación eléctrica del habitáculo donde se instale la bomba, debe cumplir con los requisitos locales y de IEC.


4.2 Elección del lugar de instalación

Colocar la bomba sobre una superficie plana, utilizando las patas de goma (12) y asegurándose de que la bomba no quede expuesta a luz solar directa. No colocar la bomba próxima a radiadores u otras fuentes de calor, teniendo en cuenta que quede suficiente espacio para la circulación de aire entre la pared y las rejillas de ventilación (3). Asimismo, asegúrese seleccionar la ubicación de tal manera que el silenciador no se salga accidentalmente, chocando contra el mobiliario del laboratorio.

4.3 Conexiones

Revisión de la placa de características y suministro eléctrico
Cerciórese de que el voltaje indicado en la placa de característica (11) concuerda con el suministro energético local. En caso contrario, no conectar la bomba.

Conexión de la manguera de vacío
Retirar el protector (10) de la conexión del tubo de vacío (4) y deslizar el tubo de vacío en la conexión del tubo (4).

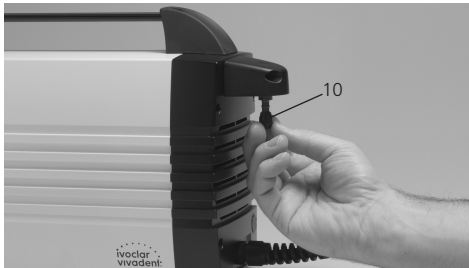

Conectar el otro extremo del tubo de vacío con el horno. Por favor, revise si la manguera está adecuadamente conectada.

Conexión de la fuerza
Conecte el enchufe del cable eléctrico (2) en el zócalo correspondiente del Programat, que es al mismo tiempo el suministro eléctrico.

5. Puesta en marcha

El horno controla automáticamente la bomba de vacío, una vez que se conecta el cable eléctrico con el horno Programat.

6. Funcionamiento

La bomba funciona con los programas del horno.

7. Mantenimiento y limpieza



Por razones de seguridad, desconectar sacar el enchufe de la red antes de realizar las tareas de mantenimiento y limpieza.

7.1 Seguimiento y mantenimiento

Básicamente, el diafragma de la bomba de vacío no requiere mantenimiento a no ser que el funcionamiento se deteriore debido a contaminación. Por ello, realizar una prueba de vacío al menos una vez al año.

El tiempo para las tareas de mantenimiento depende de la frecuencia de uso y la ubicación de la bomba. Por dicha razón, los tiempo recomendados son sólo aproximados.

¿Qué?	Parte	¿Cuándo?
Revise todas las conexiones para su correcto funcionamiento	Conexiones	Semanalmente
Revise la manguera para asegurarse de que no se ha acumulado agua de condensación en el sistema	Manguera de vacío	Semanalmente



Esta bomba ha sido desarrollado para uso típico en el laboratorio dental.

Si el producto se utiliza en una instalación de producción, para aplicaciones industriales o, para un funcionamiento continuo, se debe esperar un envejecimiento prematura de ciertas piezas de recambio.

Dichas piezas de recambio son:

- Silenciador
- Diafragma
- Contactos de válvulas

La garantía no cubre las piezas de repuesto anteriormente citadas. Por favor, observe también intervalos más cortos de revisión y mantenimiento.

7.2 Limpieza

Eliminar el polvo de la bomba de cuando en cuando. Para dicho fin se utiliza un limpiador de vacío con un cepillo de limpiar.

Pieza	Frecuencia	Medio de limpieza
Carcasa	según necesidad	Con un paño suave seco
Silenciador (8)	cuando esté muy sucio	cambiar

7.3 Notas acerca del mantenimiento



El diafragma sólo deberá ser cambiado por un Centro de Servicio de Ivoclar Vivadent. El fusible tiene que ser cambiado por personal cualificado.

Por favor, tenga en cuenta las pertinentes reglas y regulaciones para la prevención de accidentes, así como las regulaciones de seguridad y médicas.

8. ¿Qué sucede si... ?

8.1 Fallos técnicos

Fallo	Revisión doble	Solución
1 La bomba no funciona	<ul style="list-style-type: none">– ¿Está la bomba correctamente conectada?– ¿Se ha activado el interruptor térmico debido a un sobrecalentamiento?– El silenciador está atascado	<ul style="list-style-type: none">– Conectar la bomba correctamente– Deje que la bomba se enfríe y vuelva a conectarla– Revisar la ubicación de la bomba para ver si existe una adecuada circulación del aire– Si el problema persiste, contacte con su Centro de Servicio local de Ivoclar Vivadent.– Reemplazar el silenciador.
2 El rendimiento de vacío está disminuyendo o es malo	<ul style="list-style-type: none">– ¿Se ha llevado a cabo el programa de prueba de la bomba?	<ul style="list-style-type: none">– Realice el programa de prueba de la bomba.– Envíe la bomba de vacío al Centro de Servicio para su revisión.
3 La bomba de vacío hace más ruido de lo usual	<ul style="list-style-type: none">– ¿Está el silenciador dañado o montado incorrectamente?– ¿Existe un escape en el sistema del horno o de la bomba?	<ul style="list-style-type: none">– Conectar correctamente el silenciador o reemplácelo, si estuviera dañado.– Revise las conexiones y manguera en cuanto a estanqueidad.– Limpie el cierre del cabezal del horno.– Revise el rendimiento de la bomba con el correspondiente programa de prueba.

8.2 Reparaciones



Las reparaciones sólo las puede realizar personal de un Centro de Servicio cualificado de Ivoclar Vivadent. Por favor, contacte con su representante de Servicio al cliente.

9. Especificaciones del Producto

9.1 Forma de suministro

- Bomba de vacío VP5
- Instrucciones de uso
- Tarjeta de Garantía
- Declaración de Conformidade

9.2 Datos técnicos

Suministro eléctrico: 230 V / 50-60 Hz / 0,40 A
200 V / 50-60 Hz / 0,50 A
115 V / 50-60 Hz / 0,85 A
100 V / 50-60 Hz / 0,95 A

Tolerancia de fluctuaciones de voltaje: +/- 10%

Consumo energético: 80 W

Resistencia a la succión: 15 l / min.

Vacío final (medición realizada en un contenedor de prueba de 4 litros): ca. 20 mbar

Dimensiones: 415 x 122 x 230 mm (largo, ancho, alto)

Peso: 8,0 kg

Tipos de fusibles: 230 V: T 1,0 A 250 V
200 V: T 1,25 A 250 V
115 V: T 2,5 A 250 V
100 V: T 2,5 A 250 V

Información sobre seguridad:

La bomba cumple con las siguientes directivas:

- Directiva 2006/42/CE de maquinaria
- Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética

9.3 Condiciones de funcionamiento aceptables

- Margen de temperatura ambiente de:
+5 °C hasta +40 °C (+41 °F hasta +104 °F)
- Altura aceptable:
La bomba está probada para poder ser utilizada en alturas de hasta 2000 metros por encima del nivel del mar
- Grado de contaminación 2
Categoría de sobrevoltaje II

9.4 Condiciones de transporte aceptables

- Margen de temperatura ambiente de:
-10 °C hasta +55 °C (-4 °F hasta +131 °F)
- Máxima humedad relativa: 80%




Este aparato ha sido desarrollado para su uso en odontología. La puesta en marcha y funcionamiento deberá realizarse estrictamente de acuerdo con las Instrucciones de uso. No se aceptará responsabilidad alguna por los daños que resulten de un uso incorrecto o no observancia de las instrucciones de uso. El usuario es el único responsable de revisar el aparato en cuanto a su idoneidad para cualquier otro propósito no expresado explícitamente en las instrucciones de uso. Las descripciones y datos no constituyen garantía o atributo alguno.

Bomba de vácuo VP5

	Página
Lista de partes	54
1. Introdução / Sinais e Símbolos	55
1.1 Prefácio	
1.2 Introdução	
1.3 Sinais e símbolos	
2. Segurança em primeiro lugar	56
2.1 Indicações	
2.2 Saúde e instruções de segurança	
3. Descrição do produto	57
3.1 Componentes	
3.2 Descrição funcional	
3.3 Áreas de risco e equipamento de segurança	
4. Instalação	58
4.1 Desembalando e conferindo o conteúdo	
4.2 Selecionando o local	
4.3 Efetuando as conexões	
4.4 Montando o amortecedor de ruídos	
5. Início de operação	59
6. Operação	59
7. Manutenção, Limpeza e Diagnóstico	60
7.1 Monitoramento e manutenção	
7.2 Limpeza	
7.3 Notas sobre manutenção	
8. E se ...	61
8.1 Funcionamentos técnicos incorretos	
8.2 Reparos	
9. Especificações do produto	62
9.1 Forma de apresentação	
9.2 Dados técnicos	
9.3 Condições aceitáveis de operação	
9.4 Condições aceitáveis de transporte	

Lista de Partes

- 1 Cabo de conexão com proteção contra flexão
- 2 Cabo de força
- 3 Aberturas de ar
- 4 Conexão da mangueira do vácuo
- 5 Carcaça
- 6 Tubo de conexão
- 7 Dispositivo para transporte
- 8 Amortecedor de ruídos
- 9 Conexão do amortecedor de ruídos
- 10 Tampa protetora
- 11 Placa de classificação
- 12 Pés de borracha

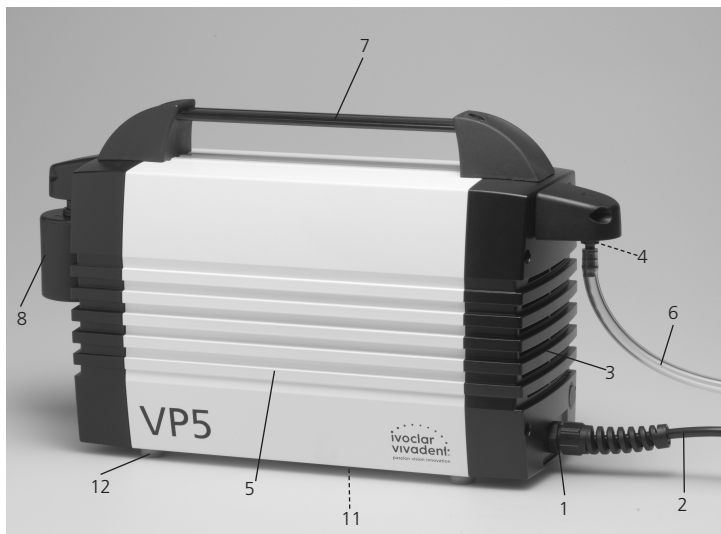

1. Introdução / Sinais e Símbolos

1.1 Prefácio

Prezado usuário

Obrigado por ter adquirido a Bomba de Vácuo Programat®. É um aparelho de alta qualidade técnica. Por favor, leia, de modo cuidadoso, e siga estas Instruções Operacionais. Caso necessite qualquer outra informação, entre em contato com o seu representante local ou procure a Ivoclar Vivadent diretamente

1.2 Introdução

Aparelho: Bomba de vácuo VP5
Grupo designado: Técnicos em prótese dental

A bomba de vácuo é adequada para o esvaziamento da câmara de queima dos fornos cerâmicos Programat. É uma bomba de vácuo silenciosa, com diafragma duplo, que apresenta alta performance de vácuo.

Estas Instruções Operacionais foram projetadas para assegurar o seguro, correto e econômico uso da Bomba de Vácuo VP5. Elas estão divididas em vários e estruturados Capítulos para possibilitar que tópicos específicos sejam encontrados, de modo fácil e rápido.

Os sinais e símbolos (pictográficos) são usados para informar os riscos de saúde, detalhes importantes e contra-indicações.

É recomendado manter estas Instruções Operacionais em lugar seguro, perto da bomba, para manter fácil acesso às informações necessárias. Se você perder as instruções de funcionamento, cópias extras podem ser encomendadas por um preço simbólico no seu Centro de Serviços Ivoclar Vivadent local ou baixado www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter.

1.3 Sinais e símbolos

Os sinais e símbolos, encontrados nas Instruções Operacionais e na bomba de vácuo, facilitam a identificação dos pontos mais importantes e possuem os seguintes significados:

Instruções Operacionais:



Riscos e perigos



Informação



Contra-indicação

Bomba de vácuo:



Corrente alternada

2. Segurança em primeiro lugar

Este Capítulo é particularmente importante para o pessoal que trabalha com a Bomba de Vácuo VP5 e que realiza manutenção ou reparo da bomba. Este Capítulo deve ser lido e as respectivas instruções devem ser seguidas.

2.1 Indicações

Esta bomba de vácuo foi especialmente desenvolvida para promover vácuo na câmara de queima dos fornos cerâmicos Programat e deve ser usada somente para este propósito.

Outros quaisquer usos são contra-indicados. O fabricante não assume qualquer responsabilidade pelos danos causados por estes abusos. O usuário é o único responsável por riscos que decorram da falta de observação destas Instruções.

Normas para assegurar o adequado uso da bomba:


- Instruções, notas e regulamentos, contidos nestas Instruções Operacionais, devem ser observados
- A bomba deve ser utilizada dentro das condições ambientais e operacionais indicadas (Capítulo 9).
- A VP5 deve receber apropriada manutenção

2.1.1



Riscos e perigos

Objetos estranhos ou líquidos não devem entrar nas aberturas de ar, porque podem bloquear o motor ou podem causar choque elétrico.

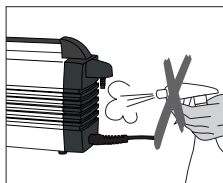

2.2 Saúde e instruções de segurança

- Usar a bomba somente para as indicações estipuladas nestas Instruções Operacionais.
- Não usar a bomba em áreas com risco de explosão.
- Os componentes, a serem conectados na bomba, devem cumprir os dados pneumáticos exigidos pela bomba.
- Observar os correspondentes regulamentos de segurança, quando ligar a bomba com a fonte de alimentação.
- Se a operação da bomba é interrompida pela ocorrência de superaquecimento, o reinício é automático, tão logo ela seja esfriada. Verificar os danos que podem resultar da continuada repetição deste fato.
- Usar somente partes originais de reposição.
- A bomba está em conformidade com as seguintes diretivas:
 - Diretiva 2006/42/EC sobre maquinários
 - Diretiva 2004/108/EC sobre compatibilidade eletromagnética
- Quando mantida sob temperatura muito baixa ou umidade atmosférica alta, a bomba deve ser secada ou deixada para ajuste na temperatura ambiente, durante aproximadamente 1 hora (não ligar a força neste período).



Não trabalhar com líquidos perto da bomba. Se, acidentalmente, um líquido entrar na bomba, desligar a força e consultar o serviço técnico. Enquanto isto, não trabalhar com a bomba.

- A bomba pode ser operada em altitudes de até 2000 m, acima do nível do mar.
- A bomba somente deve ser usado em locais fechados.
- A unidade não deve ser tecnicamente modificada.

3. Descrição do Produto



Qualquer rompimento do condutor de proteção (interno ou externo) ou afrouxamento da conexão do condutor de proteção pode constituir perigo para o usuário, nos casos de mau funcionamento. Interrupções deliberadas não são toleradas.



Não usar fornos de outros fabricantes, que não são coordenados com a bomba. Procurar conhecer os detalhes com os respectivos fabricantes. A bomba de vácuo foi especialmente desenvolvida para ser empregada com os fornos cerâmicos Programat e deve ser usada somente para este propósito.

Descarte:



A bomba não pode ser descartado com o lixo doméstico comum. Favor descartar corretamente os fornos antigos de acordo com a diretiva do Conselho da UE correspondente. Informações sobre descarte também podem ser encontradas na respectiva homepage nacional Ivoclar Vivadent.

3.1 Componentes

A Bomba de Vácuo VP5 é constituída pelos seguintes componentes:

- Bomba de vácuo, com cabo de força.
- Mangueira de vácuo (acessório).

3.2 Descrição funcional

O diafragma, posicionado entre a cabeça do cilindro e a carcaça, é movimentado para cima e para baixo, à custa de uma biela. Por intermédio deste movimento e por meio das válvulas de sucção e de extração, existentes na cabeça do cilindro, o ar pode ser evacuado e o vácuo é produzido na câmara de queima ou de injeção do forno.

3.3 Áreas de risco e equipamento de segurança

Descrição das áreas de risco da bomba:

Áreas de risco	Tipo de risco
Porta-fusível	Choque elétrico
Ventilador	Ferimento

Equipamento de segurança	Efeito protetor
Condutor de proteção	Proteção contra choque elétrico
IP20 (tipo de proteção)	Proteção contra choque elétrico
Termostato	Proteção contra superaquecimento
Tampa do ventilador	Proteção contra ferimento e choque elétrico

4. Instalação

4.1 Desembalando e conferindo o conteúdo

Remover a bomba da embalagem e verificar possíveis danos de transporte. É recomendado guardar a embalagem original para futuros propósitos de transporte. Empregar somente a embalagem original para o transporte da bomba de vácuo.



A instalação elétrica do ambiente de trabalho, onde a bomba está sendo usada, deve cumprir as exigências locais e as normas do IEC.


4.2 Selecionando o local

Colocar a bomba sobre uma superfície plana, apoiada com os pés de borracha (12). A bomba não deve ficar exposta à luz solar direta. Nunca posicionar a bomba nas vizinhanças de aquecedores ou de outras fontes de calor. Sempre deve existir um suficiente espaço entre a parede e as aberturas de ar (3). A localização deve ser escolhida de tal modo que a ação do amortecedor de ruídos não seja neutralizada pela mobília do laboratório.

4.3 Efetuando as conexões

Checando a placa de classificação e o suprimento de força: Verificar se a voltagem, indicada na placa de classificação (11), está de acordo com a voltagem do suprimento de força local. Caso isto não ocorra, a bomba não deve ser ligada.

Conectando a mangueira de vácuo: Remover a tampa de proteção (10) da conexão da mangueira de vácuo (4) e ligar a mangueira de vácuo nesta conexão (4).

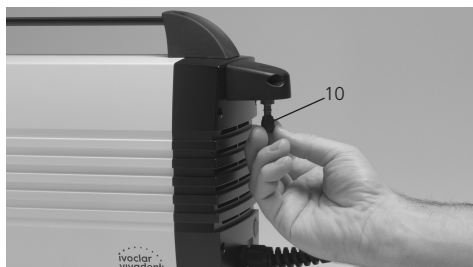

A outra extremidade da mangueira de vácuo deve ser ligada ao forno cerâmico. Por favor, verificar se a mangueira de vácuo está conectada, de modo correto e apropriado.

Ligando a força:

Colocar o plugue de força do cabo de força (2) no respectivo soquete do forno Programat. Esta conexão também corresponde ao suprimento de força.

5. Início de operação

A bomba de vácuo é controlada, de modo automático, pelo forno cerâmico, desde que o cabo de força da bomba de vácuo esteja conectado com o forno Programat.

6. Operação

A bomba de vácuo é operada pelos programas do forno.

7. Monitoramento e Manutenção



Por razões de segurança, desligar o plugue de força, antes de efetuar manutenção e limpeza.

7.1 Monitoramento e manutenção

Basicamente, o diafragma da bomba de vácuo não requer manutenção, a não ser que sua performance seja deteriorada devido à contaminação. Por esta razão, um teste de vácuo deve ser conduzido, pelo menos, uma vez por ano.

A periodicidade da manutenção depende da frequência do uso e da localização da bomba. Deste modo, os tempos, recomendados e indicados abaixo, são apenas aproximados.

O quê	Parte	Quando
Verificar o ajuste de todas as conexões	Conexões	Semanalmente
Verificar a mangueira para checar o acúmulo de água de condensação no sistema.	Mangueira de vácuo	Semanalmente



Este aparelho foi desenvolvido para típico uso em laboratório de prótese dental.

Se este produto for utilizado para aplicações industriais ou empregado em operação contínua, pode acontecer o desgaste prematuro das partes sobressalentes.

Estas partes sobressalentes são, p.ex.:

- Amortecedor de ruídos.
- Diafragma.
- Válvulas de torque.

Estas partes sobressalentes não são cobertas pela garantia. Por favor, observar curtos intervalos para monitoramento e manutenção.

7.2 Limpeza

Periodicamente, eliminar a sujeira da bomba. Para tal propósito, usar aspirador de pó e uma escova limpa.

Item	Frequência	Material de limpeza
Carçaça	Quando necessário	Pano suave e seco
Amortecedor de ruídos (8)	Quando está sujo	O amortecedor de ruídos deve ser substituído

7.3 Notas sobre manutenção



O diafragma somente pode ser substituído por um "Service Center" da Ivoclar Vivadent. O fusível deve ser trocado por pessoal qualificado.

Por favor, observar as regras e regulamentos para a prevenção de acidentes, bem como as normas médicas e de segurança.

8. E se ... ?

8.1 Funcionamentos técnicos incorretos

Descrição	Confirmação	Ação
1 A bomba não funciona.	<ul style="list-style-type: none">– A bomba está corretamente conectada ?– O termostato foi ativado porque ocorreu um superaquecimento ?– O amortecedor de ruídos está entupido.	<ul style="list-style-type: none">– Conectar a bomba corretamente.– Deixar a bomba esfriar e iniciar novamente.– Posicionar a bomba para adequada circulação de ar.– Se o problema não foi resolvido, contatar o “Service Center” local da Ivoclar Vivadent– Substituir o amortecedor de ruídos.
2 A performance de vácuo diminuiu ou está muito pobre.	<ul style="list-style-type: none">– Foi realizado o programa de teste da bomba ?	<ul style="list-style-type: none">– Efetuar o programa de teste para a bomba– Enviar a bomba de vácuo para manutenção no „Service Center“.
3 A bomba de vácuo não é normalmente silenciosa.	<ul style="list-style-type: none">– O amortecedor de ruídos está com defeito ou está montado de modo incorreto ?– Existe vazamento no sistema do forno ou na bomba ?	<ul style="list-style-type: none">– Conectar corretamente o amortecedor de ruídos ou, se necessário, efetuar a sua substituição.– Verificar o ajuste das conexões e da mangueira.– Limpar a vedação da cabeça do forno.– Verificar a performance da bomba, com o respectivo programa de teste.

8.2 Reparos



Os reparos somente devem ser realizados por pessoal de um qualificado “Service Center” da Ivoclar. Por favor, contatar o seu representante local.

9. Especificações do produto

9.1 Forma de apresentação

- Bomba de vácuo VP5
- Instruções Operacionais
- Cartão de garantia
- Declaração de Conformidade

9.2 Dados técnicos

Suprimento de força: 230 V / 50–60 Hz / 0,40 A
200 V / 50–60 Hz / 0,50 A
115 V / 50–60 Hz / 0,85 A
100 V / 50–60 Hz / 0,95 A

Flutuações toleradas de voltagem: +/- 10%

Consumo de força: 80 W

Intensidade de sucção: 15 l / min.

Vácuo final (medido com um recipiente de teste de 4 litros): ca. 20 mbar

Dimensões: 415 x 122 x 230 mm
(comprimento, largura, altura)

Peso: 8,0 kg

Tipos de fusíveis: 230 V: T 1,0 A 250 V
200 V: T 1,25 A 250 V
115 V: T 2,5 A 250 V
100 V: T 2,5 A 250 V

Informação de segurança:

A bomba está em conformidade com as seguintes diretivas:

- Diretiva 2006/42/EC sobre maquinários
- Diretiva 2004/108/EC sobre compatibilidade eletromagnética

9.3 Condições aceitáveis de operação

- Faixa de temperatura ambiente de: +5 °C até +40 °C
- Altura de uso aceitável:
A bomba é testada para o uso em altitudes de até 2000 m, acima do nível do mar.
- Nível de poluição 2
Categoria de sobretensão II

9.4 Condições aceitáveis de transporte

- Temperatura ambiente de: -10 °C até +55 °C
- Umidade relativa máxima: 80%



Este aparelho foi desenvolvido somente para uso dental. Montagem e operação devem ser conduzidas de acordo com estas Instruções Operacionais. O fabricante não é responsável pelos danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta. Além disso, o usuário está obrigado a comprovar, antes do uso e sob sua responsabilidade, se o aparelho é compatível com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada nestas Instruções. Descrições e dados não constituem nenhum tipo de garantia e, por isto, não possuem qualquer vinculação.

Ivoclar Vivadent – worldwide

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pty. Ltd.
1 – 5 Overseas Drive
P.O. Box 367
Noble Park, Vic. 3174
Australia
Tel. +61 3 9795 9599
Fax +61 3 9795 9645
www.ivoclarvivadent.com.au

Ivoclar Vivadent Ltda.
Alameda Caiapós, 723
Centro Empresarial Tamboré
CEP 06460-110 Barueri – SP
Brazil
Tel. +55 11 2424 7400
Fax +55 11 3466 0840
www.ivoclarvivadent.com.br

Ivoclar Vivadent Inc.
1-6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario
L5T 2Y2
Canada
Tel. +1 905 670 8499
Fax +1 905 670 3102
www.ivoclarvivadent.us

Ivoclar Vivadent Shanghai Trading Co., Ltd.
2/F Building 1, 881 Wuding Road,
Jing An District
200040 Shanghai
China
Tel. +86 21 6032 1657
Fax +86 21 6176 0968
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Calle 134 No. 7-B-83, Of. 520
Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 3399
Fax +57 1 633 1663
www.ivoclarvivadent.co

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 4 50 88 64 00
Fax +33 4 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Germany
Tel. +49 7961 889 0
Fax +49 7961 6326
www.ivoclarvivadent.de

Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Strasse 13
D-75179 Pforzheim
Germany
Tel. +49 7231 3705 0
Fax +49 7231 3579 59
www.wieland-dental.com

Ivoclar Vivadent Marketing (India) Pvt. Ltd.
503/504 Raheja Plaza
15 B Shah Industrial Estate
Veera Desai Road, Andheri (West)
Mumbai, 400 053
India
Tel. +91 22 2673 0302
Fax +91 22 2673 0301
www.ivoclarvivadent.in

Ivoclar Vivadent s.r.l.
Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel. +39 051 6113555
Fax +39 051 6113565
www.ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent K.K.
1-28-24-4F Hongo
Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033
Japan
Tel. +81 3 6903 3535
Fax +81 3 5844 3657
www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent Ltd.
12F W-Tower, 1303-37
Seocho-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-855
Republic of Korea
Tel. +82 2 536 0714
Fax +82 2 596 0155
www.ivoclarvivadent.co.kr

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 863,
Piso 14, Col. Napoles
03810 México, D.F.
México
Tel. +52 55 5062 1000
Fax +52 55 5062 1029
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent BV
De Fruittuinen 32
2132 NZ Hoofddorp
Netherlands
Tel. +31 23 529 3791
Fax +31 23 555 4504
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Ltd.
12 Omega St, Rosedale
PO Box 303011 North Harbour
Auckland 0751
New Zealand
Tel. +64 9 914 9999
Fax +64 9 914 9990
www.ivoclarvivadent.co.nz

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 635 5496
Fax +48 22 635 5469
www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Prospekt Andropova 18 korp. 6/
office 10-06
115432 Moscow
Russia
Tel. +7 499 418 0300
Fax +7 499 418 0310
www.ivoclarvivadent.ru

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Qlaya Main St.
Siricon Building No.14, 2nd Floor
Office No. 204
P.O. Box 300146
Riyadh 11372
Saudi Arabia
Tel. +966 11 293 8345
Fax +966 11 293 8344
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pte. Ltd.
171 Chin Swee Road
#02-01 San Centre
Singapore 169877
Tel. +65 6535 6775
Fax +65 6535 4991
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.
C/ Ribera del Loira nº 46, 5ª planta
28042 Madrid
Spain
Tel. +34 913 757 820
Fax +34 913 757 838
www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent AB
Dalvägen 14
S-169 56 Solna
Sweden
Tel. +46 8 514 939 30
Fax +46 8 514 939 40
www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent Liaison Office
: Tesvikiye Mahallesi
Sakayik Sokak
Nisantas Plaza No:38/2
Kat:5 Daire:24
34021 Sisli – Istanbul
Turkey
Tel. +90 212 343 0802
Fax +90 212 343 0842
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Limited
Ground Floor Compass Building
Feldspar Close
Warrens Business Park
Enderby
Leicester LE19 4SE
United Kingdom
Tel. +44 116 284 7880
Fax +44 116 284 7881
www.ivoclarvivadent.co.uk

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, N.Y. 14228
USA
Tel. +1 800 533 6825
Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us