

ajax

Quality Creates Value Detail Makes Difference



ajax

AJAX MEDICAL GROOP CO., LTD



CE 0120
ISO 13485:2003
ISO 9001

European
Free Sells
certificate



Головной офис в Гонконге
AJAX Medical Groop(HK) Co., Ltd.
FLAT/RM CC1-D 6/F WING HING
INDUSTRIAL BLDG.,
14 HING YIP ST, KWUN TONG KL, HONG

Производство в Гуанчжоу:
Guangzhou AJAX Medical
Equipment Co., Ltd.
Адрес: 514447, КНР, Гуанчжоу, район
Панью, город ШилоуKONG

AJ15

8 800 775 90 38
www.anhel.ru

<https://stomshop.pro>

Безопасность. Эффективность.
Здоровье. Комфорт




AJ15

«Гарантия безопасности и охраны здоровья, высокое качество стоматологии в четыре руки» - такова концепция высококачественной стоматологической установки AJ15, изготовленной из прочных и надежных материалов, с применением самых совершенных технологий и новейших дизайнерских разработок.

Гарантия безопасности и охраны здоровья

В слюне и крови пациента содержится множество возбудителей заболеваний, таких как гепатит, герпес, СПИД и др. Поэтому в процессе лечения чрезвычайно важно правильно произвести дезинфекцию и изоляцию, чтобы защитить персонал и пациентов.

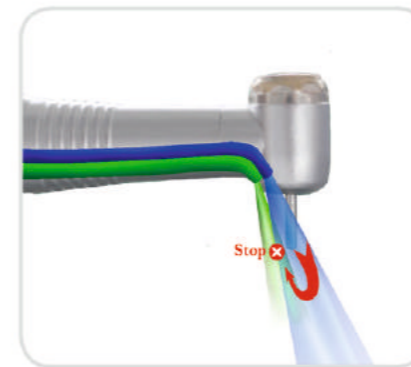

Клапан анти-СПИД

Предотвращает перекрестное заражение в шланге, полностью исключает возможность перекрестного заражения от пациента к пациенту.



Система отсроченной аспирации

Обеспечивает 5-секундную отсрочку, чтобы удостовериться, что шланги аспирации полностью очищены.



Система подачи чистой воды из бутылки и система дезинфекции

Сводит к минимуму вероятность перекрестного заражения в шланге и поддерживает чистоту оборудования.

Новая конструкция фильтра аспирационной системы

Обеспечивает повышенное качество фильтрации, защиту от протекания, увеличенную мощность всасывания, легкую разборку и очистку, увеличенный срок службы.



Силиконовый коврик модулей врача и ассистента

Модули врача и ассистента снабжены силиконовым ковриком и системой дезинфекции силикона при высоких температурах.

Поворотная плевательница

Пациенту удобно сплевывать, оптимальная высота расположения плевательницы предотвращает распыление слюны и жидкости.



Съемная обивка

Пластиковое основание обивки спинки сидения крепится стандартным способом, обивка легко устанавливается и снимается. При изготовлении сидений используются материалы, безопасные для окружающей среды и не подвергающиеся воздействию плесени во влажной среде.



Стоматология высшего уровня

«в четыре руки»

«Стоматология в четыре руки» - это более эффективная техника по сравнению с традиционной самостоятельной работой врача. Помощь ассистента при выполнении различных операций в процессе лечения позволяет увеличить эффективность работы врача-стоматолога на 30-78%. При этом пациент испытывает повышенное чувство удовлетворения и комфорта при лечении.



Поворотный гидроблок
Удобство при работе в четыре руки и комфорт в процессе эксплуатации.



Мультиподвижный модуль ассистента
Более широкий диапазон движения, больше гибкости, ассистенту легко занять удобную позицию.



Панель управления с 10 функциями
Ассистенту удобно контролировать функции стоматологической установки.



Новый дизайн бутылки для воды
Большая бутылка легко наполняется водой и тимеросалом, большая продолжительность работы обеспечивается за счет увеличенного объема.



Одна кнопка для бутылки с водой
Кнопка расположена под бутылкой с водой, в отличие от традиционной бутылки, легко и удобно работать (включается одной кнопкой). Легко найти и работать.



Многофункциональная педаль управления
Обеспечивает управление креслом, панелью инструментов, наполнение стакана и смыв чаши.



Металлический корпус элементов аспирации
Изготовлены из сплава алюминия, легкие, крепкие и долговечные. Снабжены выключателем, регулятором силы всасывания.



Ближе к пациенту

Благодаря узкому дизайну верхней части спинки ассистент может находиться максимально близко к зоне медицинского вмешательства в процессе лечения.



Пространство для ног

Высота изгиба от края до середины составляет 8 см, а толщина края - всего 2,5 см. Пространство для ног врачей и ассистентов максимально увеличено. Стоматологи могут находиться ближе к пациентам.



Система подачи

Эргономичное расположение позволяет врачу с легкостью использовать стол для инструментов.




Светодиодная подсветка

Новый дизайн стоматологических светодиодных светильников с 3-х осевым вращением позволяет приблизить освещение к естественному солнечному освещению, что комфортнее для пациента.

Безопасная рабочая среда для врача

Комфорт при выполнении служебных обязанностей является жизненно необходимым для высокого качества жизни, высокой продуктивности и долгой профессиональной деятельности.

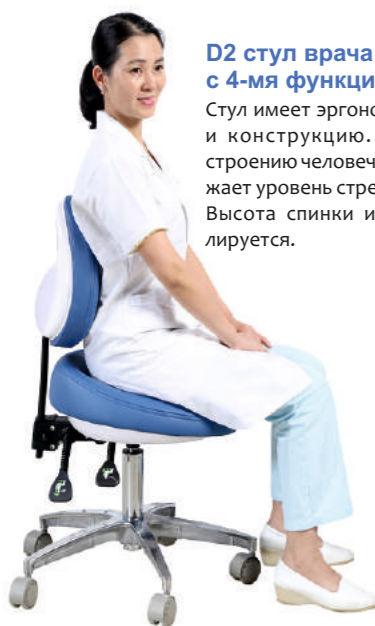

D2 стул врача с 4-мя функциями

Стул имеет эргономичный дизайн и конструкцию. Соответствие строению человеческого тела снижает уровень стресса и усталости. Высота спинки и сидения регулируется.


Система контроля с функцией запоминания

Независимые запоминаемые предустановки положения кресла P1, P2, и P3 повышают эффективность работы.




Комфортное лечение для пациентов

Комфортная медицинская среда и, в особенности, удобство стоматологического кресла, позволяют пациентам расслабиться во время лечения, помогают избавиться от страха и повышают чувство удовлетворенности лечением.

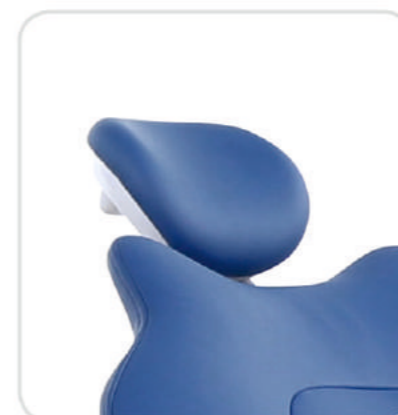

Подголовник

Новый, более массивный по сравнению с традиционной конструкцией, подголовник позволяет избежать тряски, обеспечивая поддержку для шеи пациента и позволяя чувствовать себя комфортно.

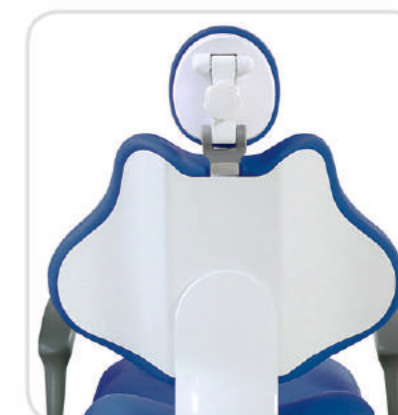

Удобная обивка спинки сидения

Дизайн спинки в форме арки идеально подходит пациенту, представляет собой отличную опору для спины.



Эргономичное кресло

Позиция кресла легко регулируется, пациент в процессе лечения не испытывает дискомфорта.



Положение кресла

Минимальное: 350 мм. Позволяет пациенту с легкостью сесть в стоматологическое кресло или встать с него.



Бесшовная обивка

Используется износостойкая бесшовная обивка, мягкая и дышащая. Для подушки используется высокоэластичный губчатый наполнитель, подходящий для любого пациента. При длительном лечении все это позволяет пациенту принять удобное и расслабленное положение.

Надежность. Устойчивость. Долговечность

Цельно-алюминиевый гидроблок
Обладает повышенной устойчивостью, проще в эксплуатации.



Устойчивый гидроблок

Новый гидроблок имеет более жесткое основание из алюминиевого сплава. Для соединения деталей используется 18-миллиметровая стальная пластина, что повышает устойчивость и снижает тряску кресла.



Металлическая спинка

Тонкий штампованный край спинки позволяет высвободить намного больше места для врача и обеспечивает комфортное положение спины пациента.

Цельно-алюминиевая опора спинки

Придает больше устойчивости и оказывает более мощную поддержку.

Одна кнопка для бутылки с водой
Кнопка расположена под бутылкой с водой, в отличие от традиционной бутылки, легко и удобно.



Шланги американского производства

Все внутренние воздушные и водные шланги изготовлены лучшими мировыми производителями, что позволяет предотвратить перегибы шлангов и образование налета биологического происхождения.



Клапан контроля подачи воздуха
Клапан контроля подачи воздуха, используемый в наконечнике, обеспечивает более длительный срок эксплуатации.



Объединенный выключатель подачи воды/воздуха/электропитания
Обеспечивает защиту от высокого водяного давления ночью по окончании работы врача, продлевает срок эксплуатации шлангов.



Система авто-дренажа

Автоматическая фильтрация воды в клапане сброса давления воздуха. Предотвращает западание воздушного компрессора внутрь трубки.

Безопасная система блокировки инструментов

Во время работы врача движение кресла заблокировано, что позволяет предотвратить несчастные случаи с пациентами в процессе лечения, возникающие из-за неправильного движения кресла.

Защищенный источник питания

Разработанная в соответствии с европейскими требованиями безопасности, система защиты от влаги, брызг и электромагнитных помех продлевает срок службы источника питания.



Стоматологический светильник

Великолепный стоматологический светильник с сенсором

Кресло пациента:

Кресло с системой Ergomotion –согласованное движение спинки и сидения кресла
DC24 Вт электромеханический привод с функцией запоминания
Бесшовная обивка
Регулируемый подголовник
Левый подлокотник
Правый подлокотник – поворотный
Система безопасности – отключение кресла при работе инструмента

3 программируемые положения кресла
Многофункциональная педаль управления

Система подачи:

Система навесных шлангов
Силиконовый коврик модулей врача и ассистента
Шланг пневматической турбины x 3
3-х функциональный пистолет
Панорамный негатоскоп

Гидроблок:

Поворотная стеклянная плевательница
Система подачи чистой воды из бутылки
Система дезинфекции
Водонагреватель мощностью 24 Вт
Высококачественная система подачи воздуха и воды

Панель ассистента:

3-х функциональный пистолет с теплой водой
Аспиратор высокой производительности с регулируемым переключателем
Слюноотсос

Панель управления с 10 функциями

Распределительная коробка:

Единая распределительная коробка
Объединенный выключатель подачи воды/воздуха/электропитания
Стул врача:


D2 стул врача с 4-мя функциями

Опции:

- Светодиодные светильники Faço (производство Италии)
- Обивка кресла из эко-кожи
- Монитор на штанге
- Встроенный скалер
- Встроенная светополимеризационная лампа
- Высокоскоростные наконечники
- Стол для инструментов с верхним расположением
- Стул ассистента
- Система роликов

Образцы цвета:

Эко-кожа

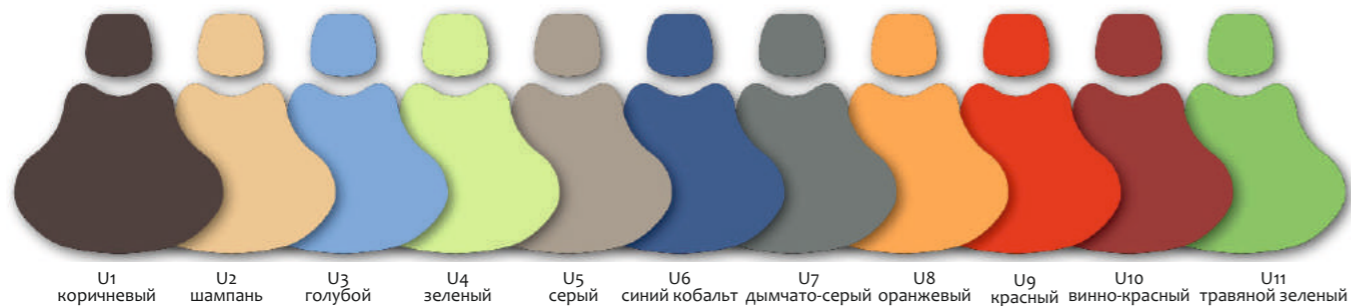

Полиуретан

