




ПЛАТФОРМА ПОДКАТНАЯ ДЛЯ ВЫТЯЖЕК модель ПЛАТФОРМА 7.2 УПЗ

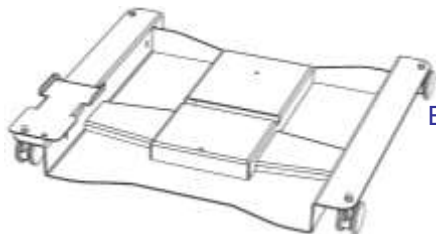

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.01242 от 23.05.2017

Этикетка
АВЕ 525.600.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей
технической документации

Исправления не допускаются

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ПЛАТФОРМА 7.2 УПЗ | |
| Контролер ООО «ВЕГА-ПРО» | _____ м.п. (подпись) |
| Дата выпуска _____ | Упаковщик м.п. _____ |
| Дата продажи _____ | Продавец м.п. _____ |

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ПЛАТФОРМА 7.2 УПЗ (далее – Платформа) предназначена для легкого перемещения вытяжки УПЗ 7.2 КОМБИ (далее – УПЗ) из-под столешницы при техническом обслуживании. ТО 5621-039-52331864-2017.

1.2 Условия эксплуатации

окружающая температура 10...35°С

влажность при 25°С, не более 80%

1.3 Основные технические характеристики

габариты, мм510x450x70

масса, не более, кг6

1.4 Комплектность


Платформа – 1 шт

Площадка для педали – 1 шт

Этикетка АВЕ 525.600.000 ЭТ

Винт М4х10 пр/ш – 2 шт

Ключ от роликовых опор – 1шт


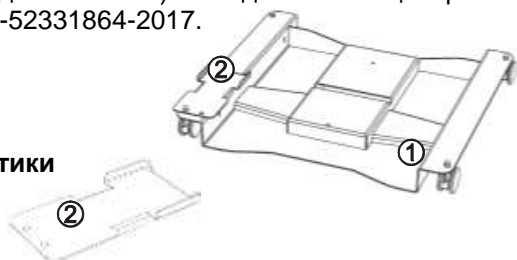


2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Закрепить Платформу (1) снизу корпуса УПЗ (3) винтами М4.

Роликовые опоры у Платформы поворотные.

Площадка (2) для педали устанавливается слева или справа на боковые полки платформы. Крепится гайкой совместно с роликовой опорой.

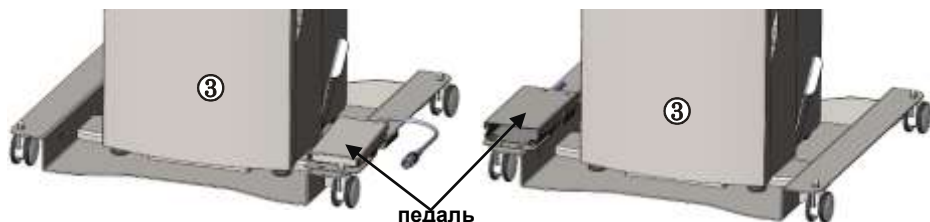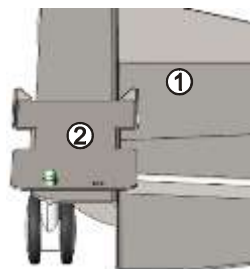

3 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург

Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»

www.averon.ru

feedback@averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские