

Пусть Ваш кабинет озарится светом


DENTAL PLUS

Фрезерный станок CAD/CAM

X5



Воспарите над собой

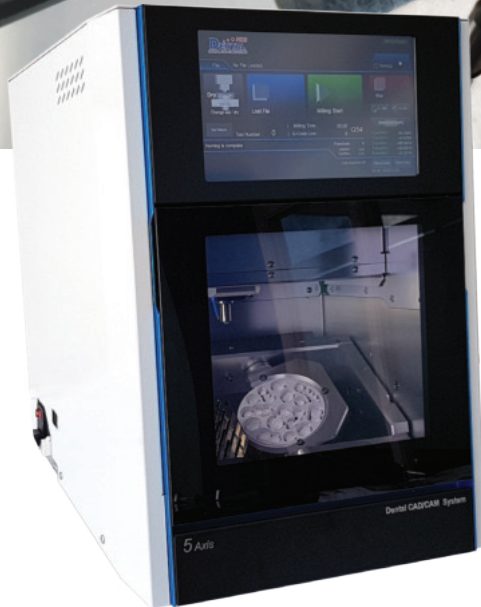

PLUS MILL X5

Фрезерный станок CAD/CAM

Элегантная цифровая машина
под стать Цифровому веку

Материал	Цирконий, гибридная керамика, ПММА, воск
Управление	5 независимых осей
Принцип работы	Сухая фрезеровка
Инструментальный бокс	9
Шпиндель	50,000 об./мин (встроенный мотор)
Размеры (Ш x Г x В) мм	392 x 549 x 575 (мм)
Вес	36 кг

Стабильная система


Данный фрезерный станок создан на основе опыта профессионалов

Мы повысили стабильность аппаратуры и использовали удобное программное обеспечение, чтобы наши клиенты могли получать более точные результаты фрезерования.



Непревзойденная уверенность

Мы создаем премиальные цифровые машины

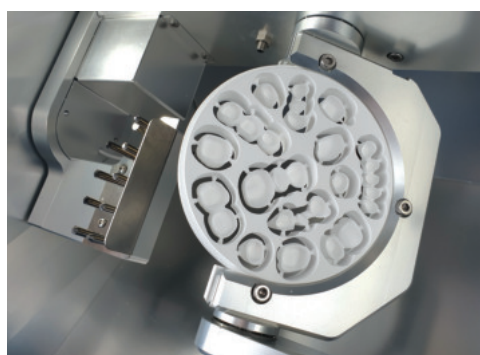

Можно сделать более широкий угол наклона, используя полулунный зажим и одновременное движение по 5 осям. Точные и качественные результаты могут быть получены без коррекции после фрезерования путем минимизации подрезов.


Сенсорный экран

Для удобства пользователя станок оснащен сенсорным экраном.



Бокс на 9 инструментов

Расположите фрезеровочные инструменты в соответствии с материалами и затем используйте их в той же последовательности.

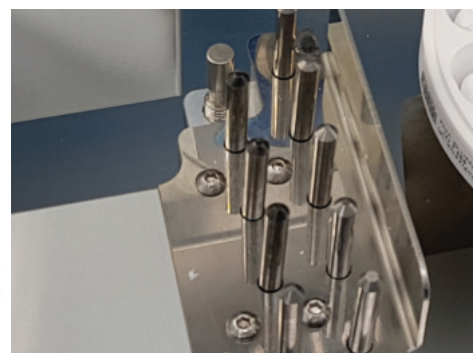

Современный дизайн и просторная рабочая камера

Благодаря простому и стильному дизайну аппарат прекрасно вписывается в любом помещении клиники или лаборатории. Комфорт в работе обеспечивает объемная рабочая камера.



Нет техническим трудностям

Визуальный помощник

Даже не обладая профессиональным опытом работы с CAD/CAM системами, оператор может стать экспертом по фрезеровке, последовательно выполняя операции согласно подсказкам "Визуального помощника".

<Конечный пользователь>

Работать со станком сможет даже новичок.


Экономия времени и трудовых затрат.

Превосходные результаты.

<Дилеры>

Установка, обслуживание и техподдержка без каких-либо неудобств.

Не требуется помощь профессионалов. Станьте экспертом с **X5**.

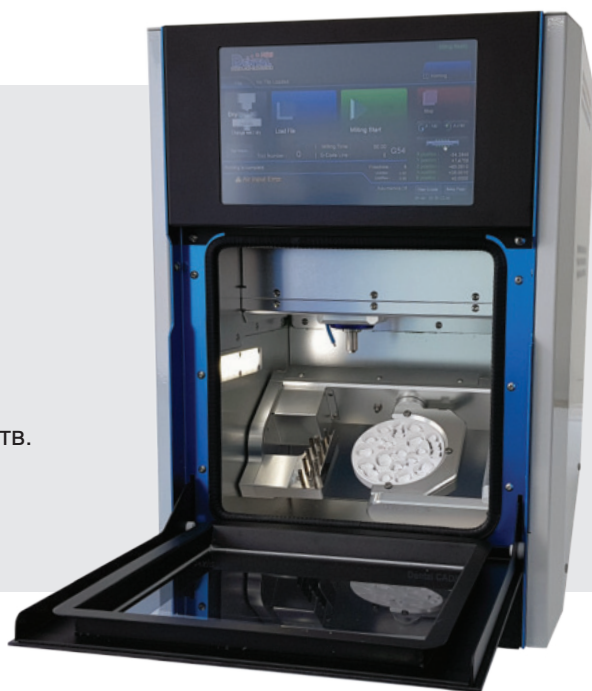


Визуальный помощник


Простая установка и авто-калибровка



Шаг 1

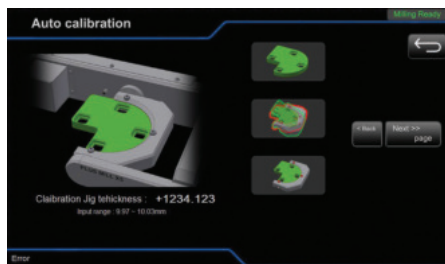


Шаг 2

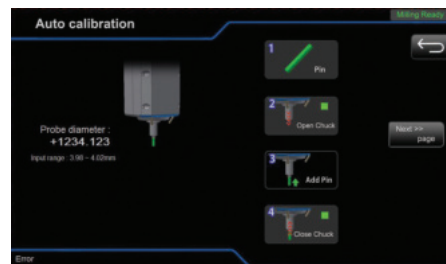


Шаг 3



Шаг 4

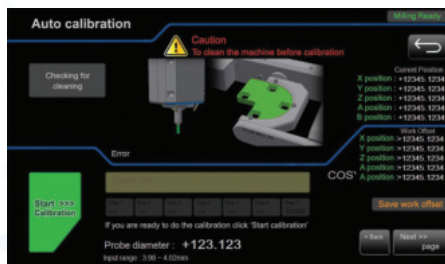

Шаг 5

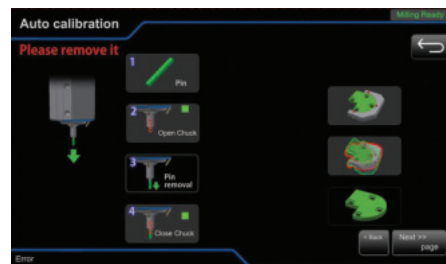

Шаг 6


Если Вы беспокоитесь по поводу сложной калибровки станка X5, используйте функцию авто-калибровки.

На базе Windows

На встроенном ПК легко найти любые файлы. Передавать и импортировать файлы просто – через Интернет или порт USB.




Загрузить файл

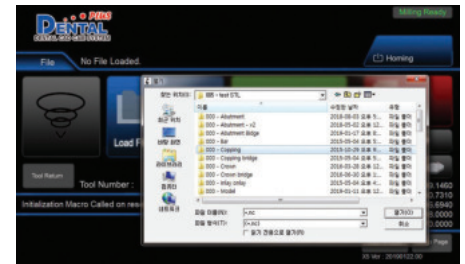


Найти файл и начать работу

Командный режим и поддержка через TeamViewer

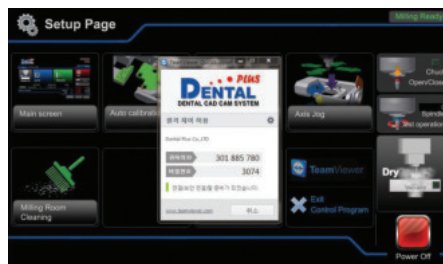


Возможно удаленное управление встроенным компьютером.

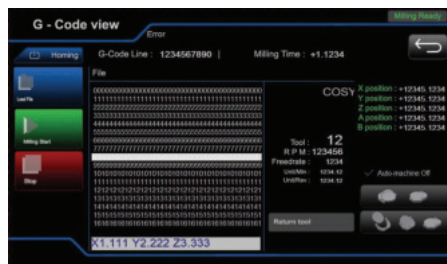

Простое управление на странице "Setup Page": проверка всех датчиков, тест шпинделя, проверка работы по каждой из осей.

Положение для очистки

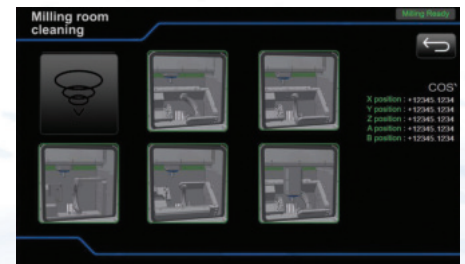

Удобное управление благодаря контролю соответствующего положения для обслуживания и очистки.



Станьте экспертом с X5




Полная авто-калибровка

Авто-калибровка существенно облегчает работу со станком X5



<https://stomshop.pro>



X5 сделает из Вас Эксперта!

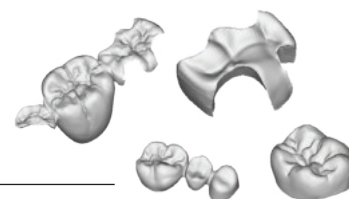

- Мы всегда заботились об удобстве пользователя и простоте управления.
- Любой новичок может управлять аппаратом как эксперт.
- X5 это новая концепция фрезерного станка, отличающая его от ранее существующих.
- Техническое совершенство
- Мы использовали нашу собственную технологию шпиндельного двигателя

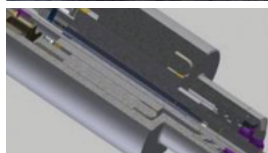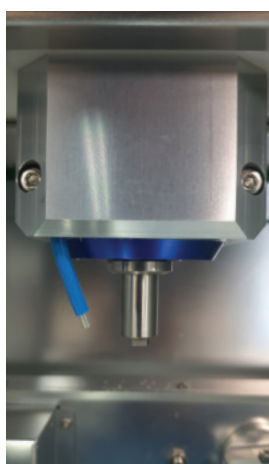

Мы постоянно используем собственную систему управления двигателем шпинделя, это приводит к снижению затрат на техническое обслуживание и гарантирует лучшие результаты для наших клиентов.

С нашей собственной технологией Dental Plus производит и настраивает двигатели шпинделя для каждого типа продуктов с целью их максимальной производительности.

Фрезерный станок CAD/CAM мирового класса

DENTAL PLUS – линейка премиальных фрезерных станков CAD/CAM

