


25 цветов доступны
для вашего
PLAY SAFE®



Отметьте номера цветов:

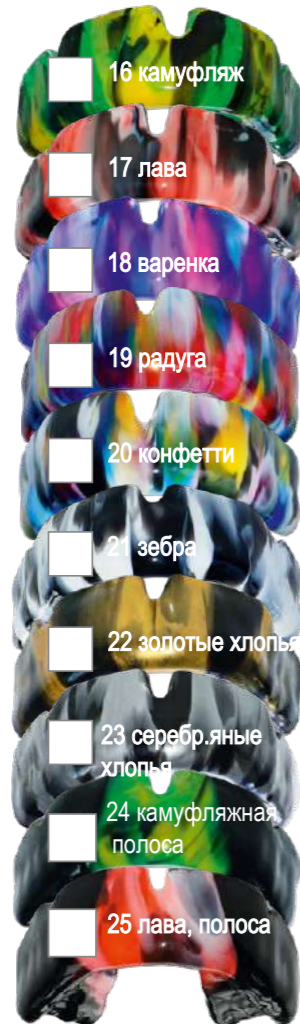

отклонения в цветах возможны



Каппа Playsafe - до 4 цветов!
Вы можете составить свою собственную разноцветную
каппу из цветов от 1 до 15.
Пожалуйста, укажите цветовые номера:


Пример: → 4 8 9 4




Проверьте требуемый тип Playsafe:




PLAY SAFE® triple + **PLAY SAFE® triple-light**

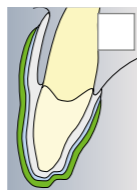

Playsafe triple и **triple light** годятся
для любого вида спорта.
Трехслойная спортивная каппа с
жестким средним слоем. Triple
light подходит в случае более
тесного пространства во рту.

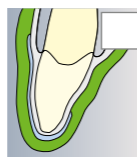


PLAY SAFE® heavy-pro, 3 слоя с жестким
средним слоем для: Хоккей на траве - Сквош
- Поло - Хоккей на льду - Каратэ - Регби -
Кикбоксинг и т.д. Для случаев сильного и
резкого воздействия.

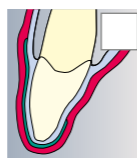

PLAY SAFE® light-pro, 3 слоя с жестким
средним слоем. Подходит в случае стесненного
пространства во рту. Та же область применения,
что и **Playsafe heavy-pro**.



PLAY SAFE® medium, 2 слоя Бокс - Футбол -
Велоспорт - Баскетбол - Дзюдо и т.д. Спорт,
где челюсть может столкнуться с объектами с
большой площадью поверхности.

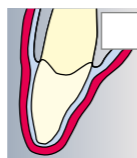

PLAY SAFE® light, два слоя, для случая тесной
ситуации во рту: те же виды спорта, что **medium**
Playsafe light защищает противоположные зубы
от интраоральных травм при взаимном ударном
контакте.

Уважаемый Атлет,
Каждая каппа Playsafe будет изготовлена для Вас
профессионалами и в соответствии с технологиями
Playsafe.

- Вы получите Ваши каппы Playsafe в вашей клинике в соответствии со слепками верхней и нижней челюсти, которые будут здесь сделаны.
- Пластиковые модели, а по ним каппы будут изготовлены в специальной лаборатории
- Контроль за подгонкой кап при их передаче Вам будет осуществляться в стоматологической клинике.

Оригинальные спортивные каппы
Playsafe всегда ламинированы
(мин. 2 слоя) и показывают
тип Playsafe и имя атлета.

Ваш изготовитель Playsafe:

Playsafe 4 u : индивидуализация Playsafe




Процедура:

- Выберите предпочитаемый дизайн э и определите, где они должны быть прикреплены, в основном на видимой стороне каппы. Не рекомендуется помещать эмблемы на окклюзионной стороне каппы.
- Дизайн необходимо присылать в формате .jpg or .pdf.

Все о Playsafe 4u на сайте производителя www.erkodent.de

ERKODENT®

PLAY SAFE®
+
PLAY SAFE® triple

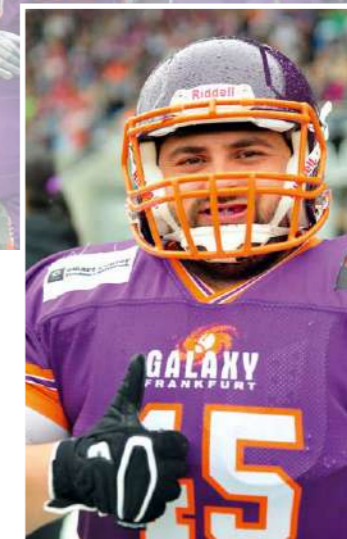

Спортивные каппы

ERKODENT®

Почему правильный выбор - это индивидуально произведенные спортивные капы Playsafe?

Спортивные капы Playsafe прилегают точно к зубам, не двигаются и позволяют свободно дышать и говорить.

Спортивные капы не все одинаковы!

Капы, принимающие форму при нагревании (Boil&Bite), прилегают неплотно и могут быть потеряны. Атлет должен придерживать их на зубах, и это очень неудобно.



Капы Playsafe



Капы Boil & Bite

Многие научные исследования показывают, что капы Boil & Bite обеспечивают ложное чувство защиты из-за резкого уменьшения их толщины, когда спортсмен прикусывает их, чтобы придать форму во время их смягченного состояния.

Капы Playsafe всегда многослойные:

Двух- или трехслойные PLAYSAFE® спортивные капы



Playsafe heavy-pro: **1.** База - гибкая (2.0 mm) **2.** Укрепление - жесткое (0.8 mm) **3.** Покрывающий слой - гибкий (4.0 mm)

Трехслойные PLAYSAFE® triple-light спортивные капы

гибкие с жестким средним слоем: жесткий мягкий, гибкий (Полная толщина triple 5.5 mm, triple light 4.1 mm)



Когда PLAYSAFE® triple ?

Playsafe triple применимы во всех видах спорта.

Жесткий средний слой обеспечивает полную защиту

Самая высокая защита с наименьшими размерами.


Немного более жесткое чем Playsafe heavy-pro.

Когда PLAYSAFE® ?

Типы кап Playsafe выбираются для специальных видов спорта.

Только Playsafe heavy-/light-pro содержит жесткий слой, ограниченный внешней областью зубов.

Следовательно, это немного более комфортно, чем Playsafe triple.

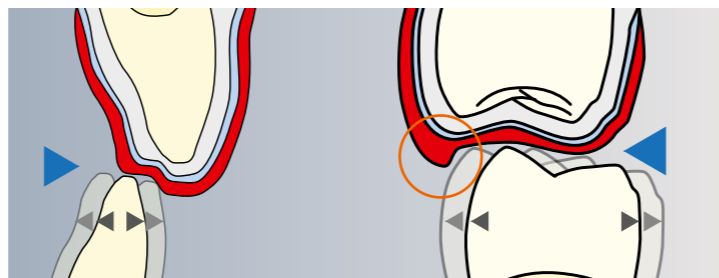

Как и все Playsafe, спортивные капы Playsafe triple обеспечивают „щечный щит“, несмотря на подвижность антагониста.

Эта циркулирующая защитная граница (оранжевый круг) предотвращает слишком большие движения нижней челюсти в случае бокового воздействия.





... Кстати, каждая капа Playsafe может быть приспособлена к изменению пропорций зубов.

https://www.erkodent.de/wp-content/documents/products/PSRefix_EN_web.pdf



Тесты: интенсивные тесты на выносливость показывают высокий защитный эффект спортивных кап Playsafe.

Тест на сопротивление деформации или раскачивание для измерения поглощения и распределения энергии.

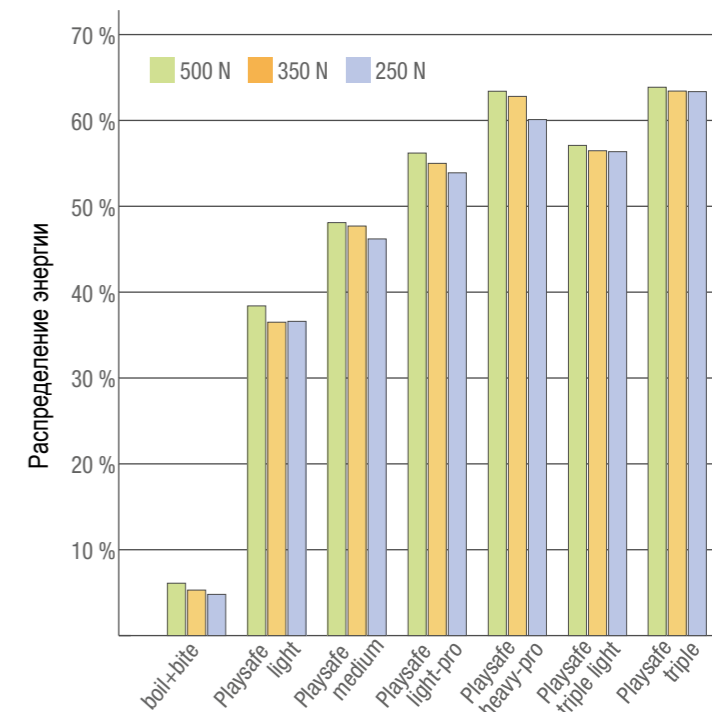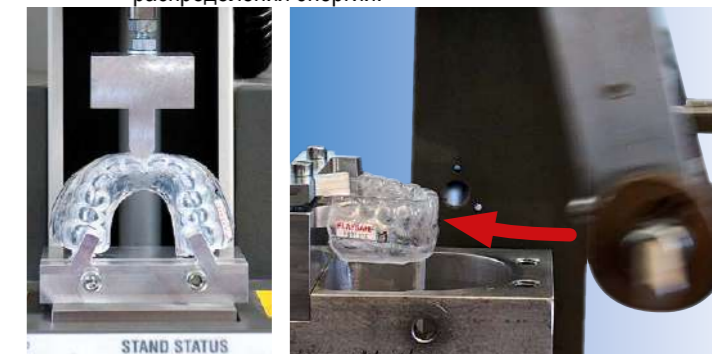

На этой диаграмме показан процент распределения энергии до первого моляра. Высокий процент является условием для эффективного распределения остроконечных жестких ударов по всей спортивной капе.