



AS 200E

Беспроводной
интраоральный сканер



<https://stomshop.pro/>

Инновации пользуются популярностью

Представляем AS 200E, беспроводной интраоральный сканер, оставляющий конкурентов далеко позади. Благодаря своему филигранному дизайну, автономной работе в течение дня, непревзойденным ощущениям и изящной экосистеме это лучший интраоральный сканер для новичка и профессионала.

Профессиональные характеристики

Сканирование всего зубного ряда за 20 секунд
Оптимизация изображения с помощью ИИ
Первозданная точность
Реалистичный цвет

Неповторимые ощущения

Компактная форма
Без калибровки
Две кнопки сканирования
Взаимодействие с пациентом
Удаленное управление



Расширяемая платформа


Перспективная экосистема
Облачное хранилище
3D просмотр онлайн

Передовая беспроводная технология

Первый сканер с беспроводной зарядкой
Минимальная задержка
До 2 часов непрерывного сканирования
Спящий режим и мгновенное пробуждение



Непревзойденный опыт

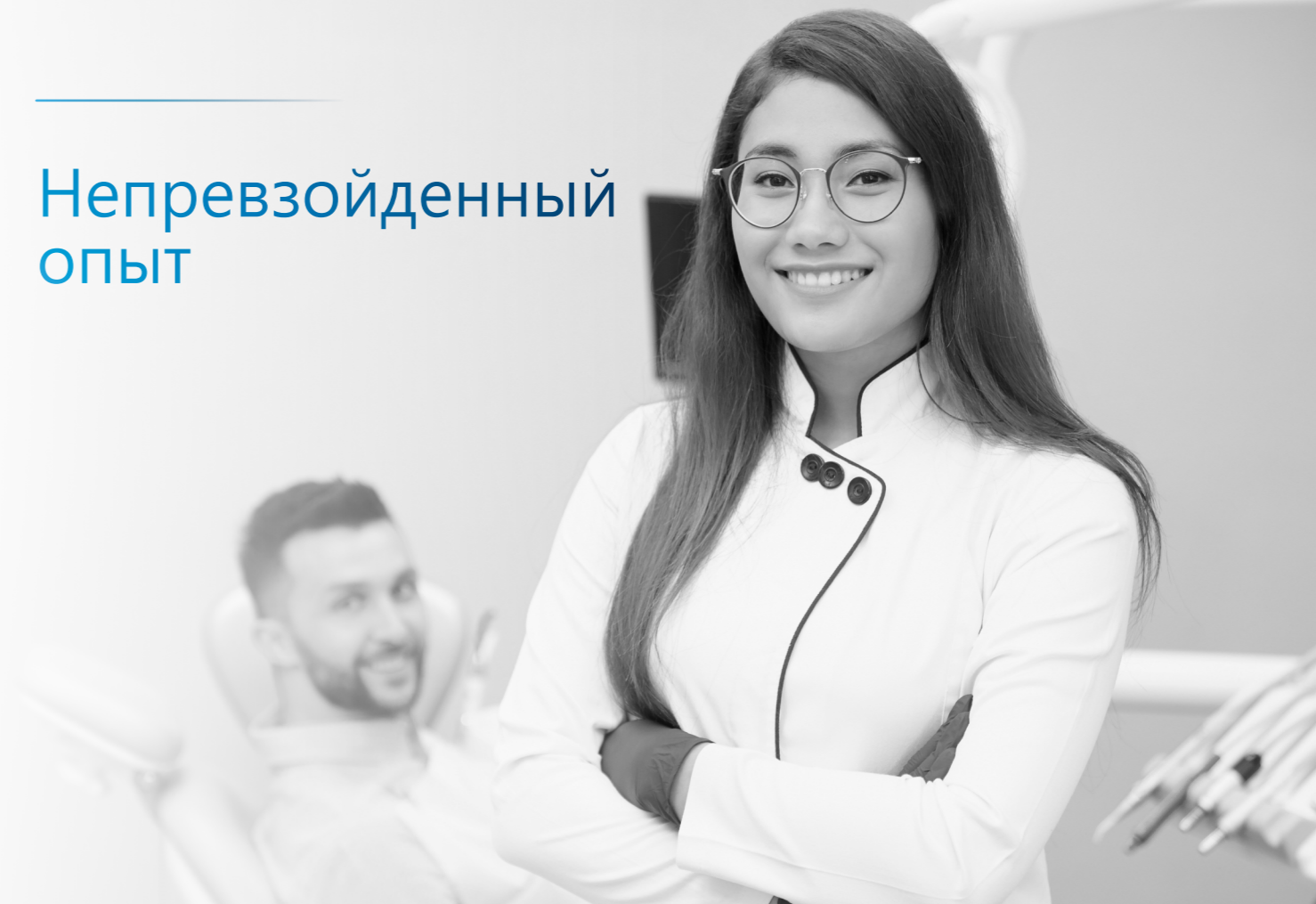

Маленький размер, огромный потенциал

Мы нашли способ вложить все новейшие технологии в невероятно маленький форм-фактор одного из самых компактных и легких беспроводных интраоральных сканеров на рынке.

Сканер в форме пера удобно лежит в руке стоматолога и сводит к минимуму усталость при длительных процедурах.

Сравнение формы и массы

со стандартной насадкой и аккумулятором



Модель	AS 200E	TRIOS 5	i700 беспроводной	CS 3800
Масса	258 г	299 г	328 г	240 г



Две кнопки сканирования

Две кнопки сканирования эргономично размещены с разных сторон устройства.

И когда нужно переключиться, можно легко повернуть устройство, нажать привычным пальцем и продолжить. Не нужно запоминать расположение кнопок или переставлять наконечник.



Без калибровки

AS 200E не требует калибровки, чем устраняет необходимость в дорогих калибровочных инструментах и не прерывает рабочий процесс. Мы достигли этой невероятной цели, переработав весь процесс, и сохраняя единообразие компонентов на всем сроке службы устройства.

Поэтому устройство готово к точному сканированию "из коробки" и в любой последующий момент.



Удаленное управление

Наслаждайтесь комфортным и гигиеничным рабочим процессом от начала до конца, не касаясь компьютера.

Вы можете просматривать полученную модель, масштабировать, панорамировать и вращать ее в любом направлении, входить в меню и применять другие опции, просто двигая сканер, благодаря встроенному датчику движения.



Подлинная точность

Сочетание улучшенного сенсора изображений и собственного технологического процесса позволило достичь точности 20 мкм при сканировании полного ряда



Реалистичный цвет

Совершенные алгоритмы захватывают и воссоздают реальные цвета.



Сжатие изображений без потерь



Быстрая беспроводная передача



Наконечники двух размеров



Поддержка сенсорного дисплея

Профессиональное качество



Скорость сканирования

Свобода беспроводного движения не означает компромисс в производительности и скорости. AS 200E - самое быстрое наше устройство на данный момент.

Вы можете завершить сканирование полного ряда за 20 с и получить невероятно быструю подачу изображений в процессе, быстрее, чем у традиционных проводных сканеров на рынке.



20 секунд
на полный
зубной ряд



60 секунд
Ряды и прикус



Оптимизация с помощью ИИ


Автономные самообучающиеся алгоритмы ускоряют процесс сканирования и создают более высокоточные модели.



Взаимодействие с пациентом

Создавайте контакт с пациентами с помощью этого мощного инструмента. Наблюдайте за историей, показывайте варианты и перспективы лечения, развивайте бизнес с новыми возможностями при потрясающей рентабельности.

Аккумулятора хватит на весь день

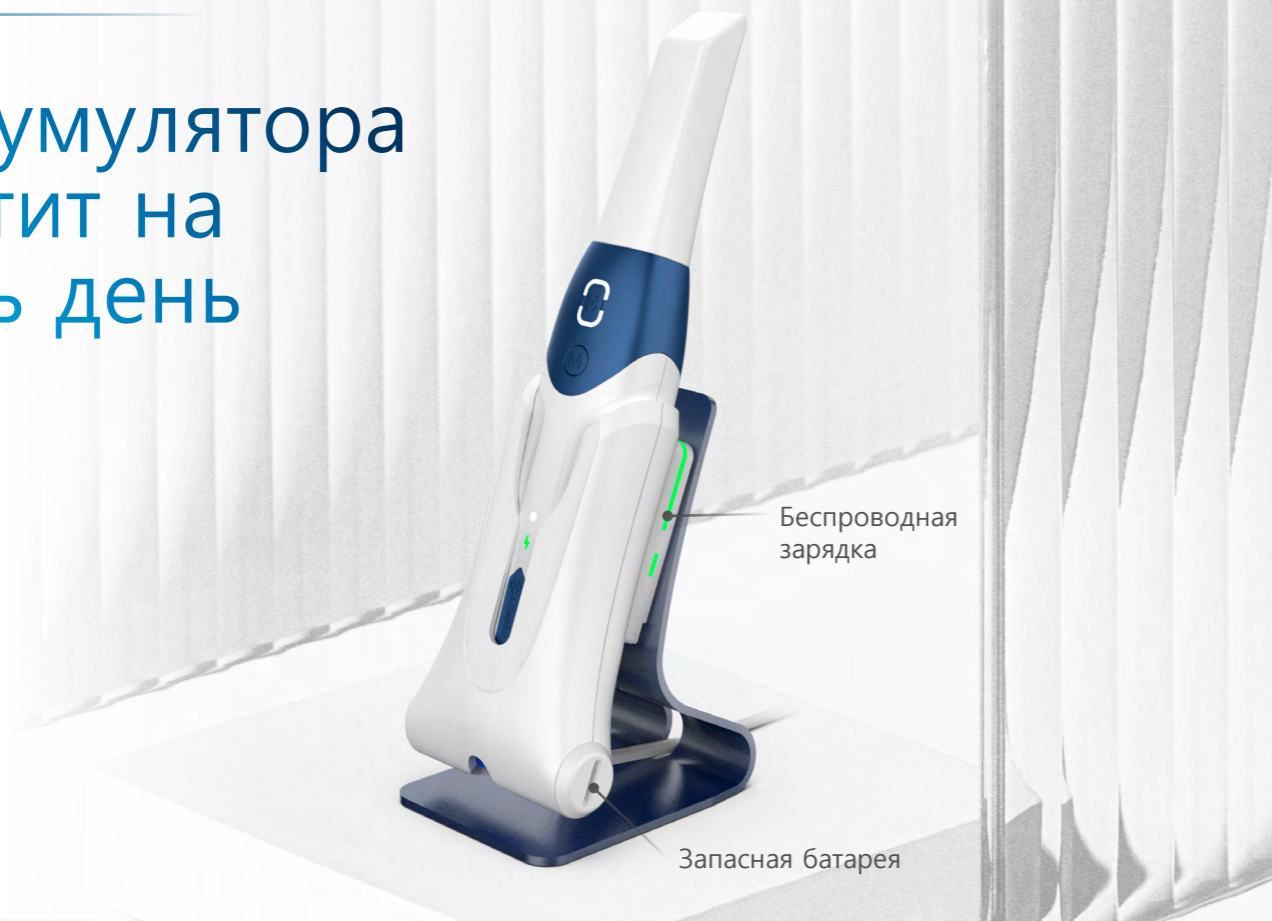

Беспроводная зарядка

Запасная батарея

Расширяемая платформа



До 2 часов непрерывного сканирования

AS 200E - максимально энергоэффективен. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного сканирования, или 60 типичных случаев, так вы можете пользоваться весь день без подзарядки.



60 пациентов на одном заряде



Беспроводная зарядка



Спящий режим и мгновенное пробуждение

Чтобы дополнить невероятно эффективное потребление энергии и продлить время в режиме ожидания, в AS 200E применены интенсивные стратегии энергосбережения. Устройство уходит в спящий режим в простое и мгновенно выходит из него, когда вам нужно.



Запасной аккумулятор

AS 200E поставляется с двумя аккумуляторами. Когда нужно заменить батарею после длительных случаев, достаньте запасную из зарядной подставки и замените.



Экосистема с заделом на будущее

Программная платформа продуктов Alliedstar задает новые стандарты в категории. Благодаря функциям, таким как сканирование без ошибок и инструменты редактирования, панель мониторинга, облачное хранилище, онлайн-просмотр и т.д., он максимально реализует потенциал клинических данных и задает новый стандарт взаимодействия между рабочими системами.

Мы стремительно расширяем сотрудничество с партнерами по отрасли. Все больше стоматологических клиник, лабораторий и производителей присоединяются к нашему яркому сообществу, чтобы вы могли реализовать весь потенциал!



Облачное хранилище и онлайн-просмотр

Свободное хранилище предоставляется с каждым продуктом Alliedstar, освобождая вас от рамок физического накопителя. Процесс загрузки данных онлайн упрощен благодаря авто-синхронизации.

Вы также можете напрямую отправлять и просматривать 3D модели в браузере в рамках коллекции Cloud Storage. Это значительно расширит ваши возможности сотрудничества с партнерами.

Характеристики

Ручной блок	Размеры	248 x 48 x 37 мм	Насадка	Размер	22 x 18 мм (L) 18 x 16 мм (S)
	Масса	258 г (с аккумулятором)		Стерилизация	До 60 раз 134°C 4 мин
Сканирование	Полный ряд Точность	20 мкм	Аккумулятор	Длительность сканирования	120 мин
	Поле обзора	16 x 14 мм (L) 12 x 12 мм (S)		Зарядка	Беспроводная
	Кнопка захвата	Две кнопки	Калибровка	Не требуется	

Об Alliedstar

Основанная в 2019 г. в Шанхае, компания Alliedstar Medical Equipment Co., Ltd. специализируется на цифровой стоматологии и медицинской визуализации. Основатели имеют фундаментальные знания и навыки в отрасли.

Наша цель - создавать продукты мирового класса с исключительным качеством и надежностью, чтобы помочь стоматологам предоставлять лучшее лечение и дарить людям улыбки.



Контакты

Главный офис в России
Ставропольский край, с.
Верхнерусское, ул.
Батайская 24Г

Отдел продаж
novgodent.pro@gmail.com

<https://stomshop.pro/>