


Руководство по установке Бесколлекторного мотора BL-1000

1. Компоненты:

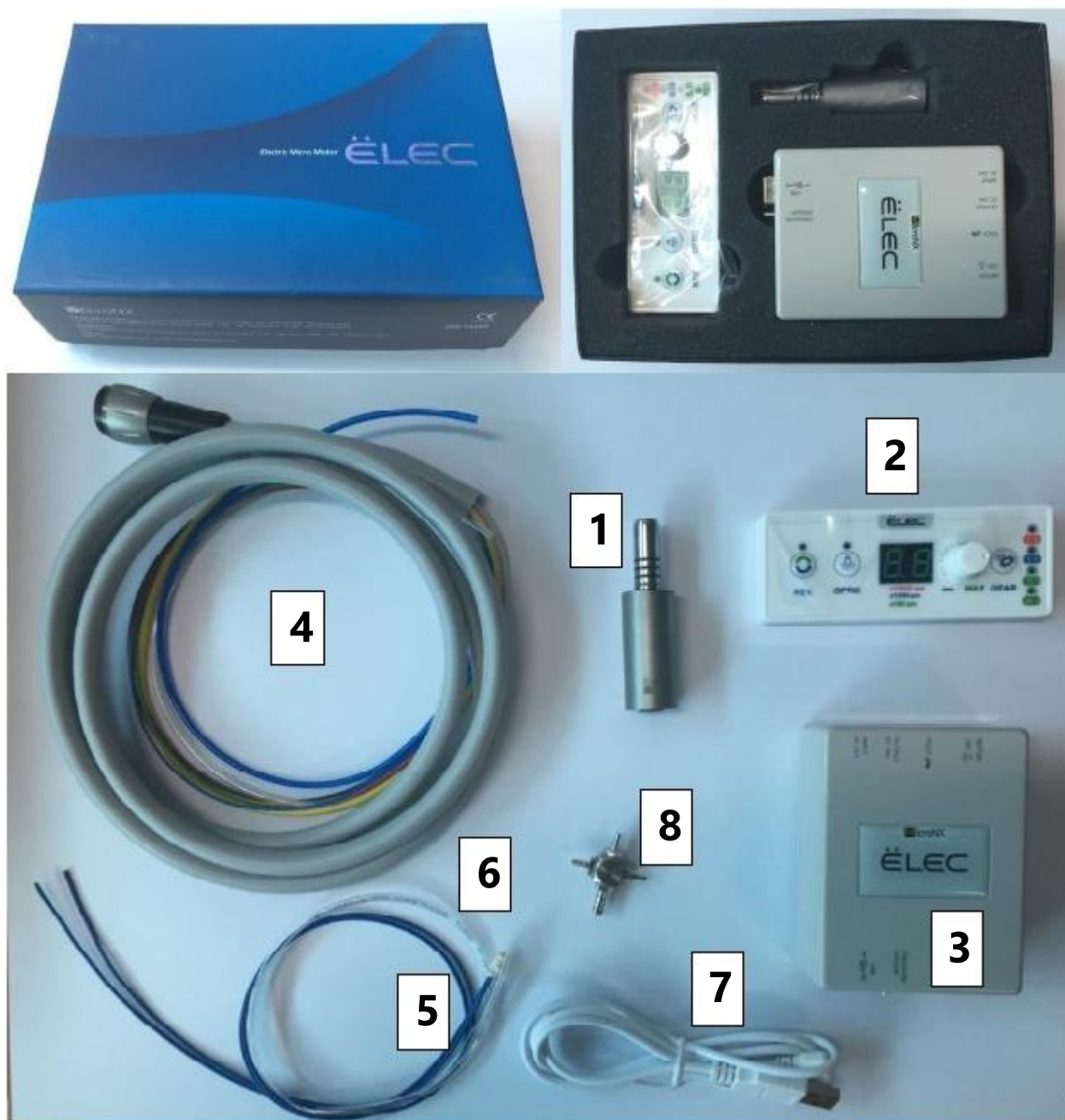

№	Наименование	№	Наименование
1	Бесколлекторный мотор	5	24 AC Кабель(синий)
2	Панель управления	6	Тюбинг воздуха
3	Основная панель	7	USB Кабель
4	Тюбинг	8	Штуцер (доп.опция)

2. Установка


2-1. Откройте панель установки



2-2. Выберите какой наконечник удалить. Обычно, установка комплектуется 2-мя высокоскоростными и 1-м пневмодвигателем. В таком случае рекомендуется убрать один высокоскоростной наконечник.



2-3. При удалении наконечника обязательно проверьте каналы подачи воды и воздуха, это поможет вам при установке микромотора.

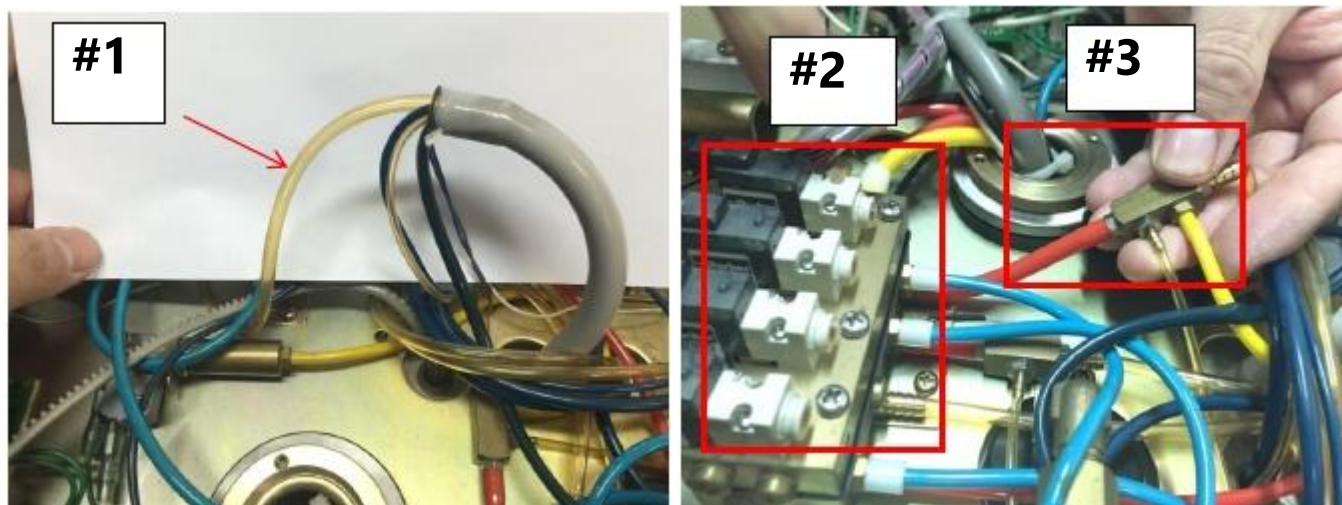


#1 Тюбинг воздуха для наконечника удаляется. Этот тюбинг соединяется со штуцером №3.


#2 Гребенка: Устройство для регулировки подачи воды и воздуха от установки до инструментов

#3 Штуцер: Устройство для объединения воздуха, идущего от гребенки.


2-4 Для установки мотора вам понадобится штуцер-тройник. Удалите прежний тюбинг для замены на штуцер, который объединяет подачу воздуха от 3 каналов. (если старый штуцер подходит, можете его не удалять)

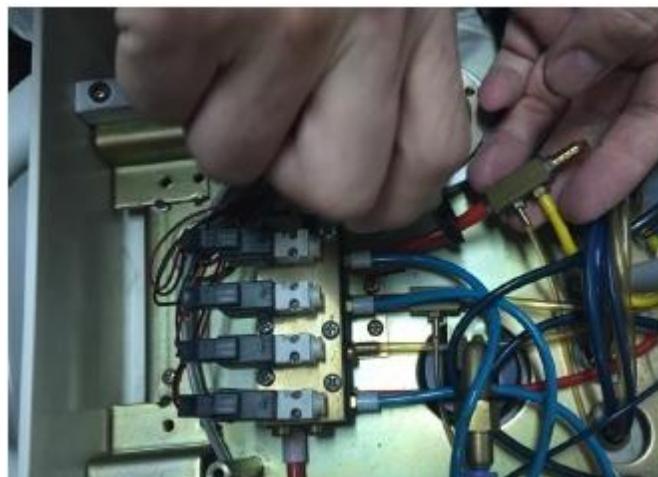

2-5 Удалите прежний тубинг для подачи воды. Запомните этот пункт, потому что тубинг для подачи воды микромотора будет подсоединен.

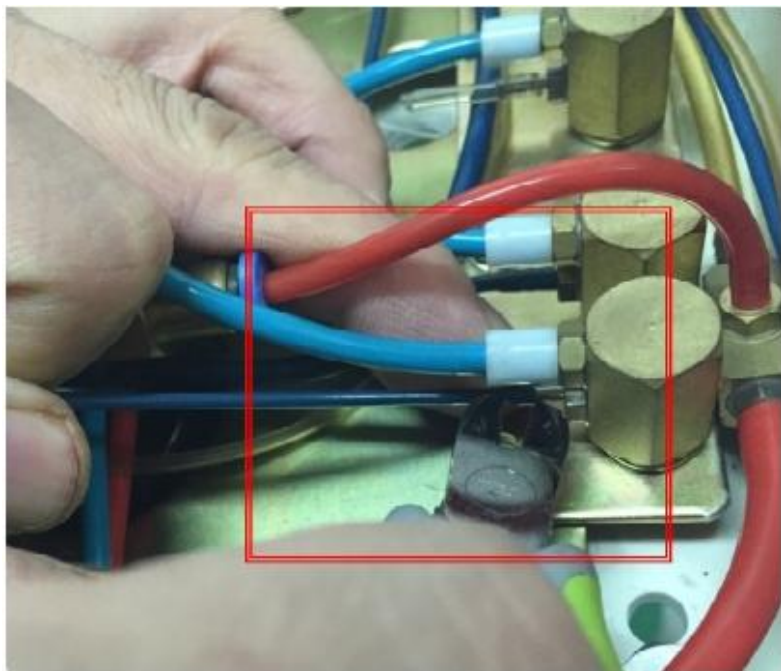


2-6. Вставьте тубинг микромотора в стол врача установки. Если разъем не подходит, согните пластиковый разъем, как на картинке ниже.

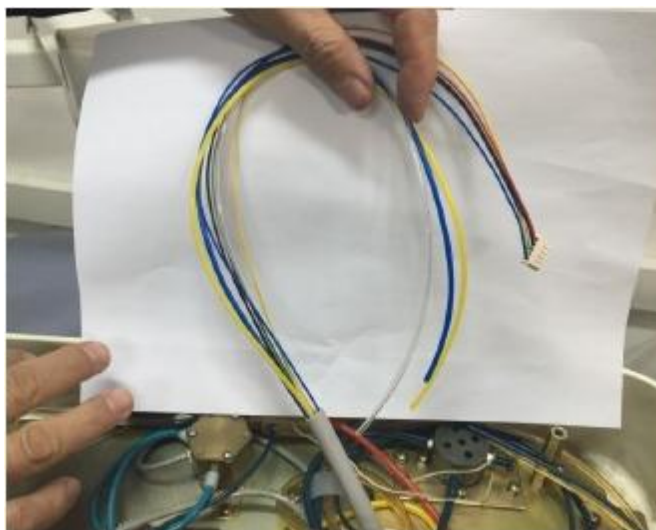


2-7 Закрепите тьюбинг, чтобы он не вылетел из столика врача.






2-8 Соедините основную панель с тьюбингом воздуха.

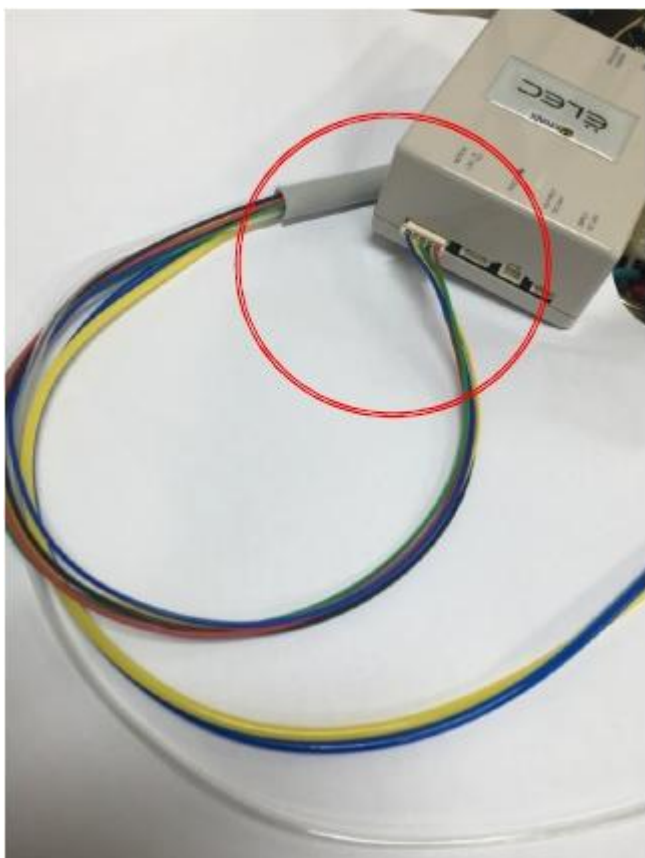



2-9 Соедините 1. тубинг охлаждения мотора (прозрачный), 2. спрей (желтый), 3. тубинг пневматики к штуцеру (П. 2-4)

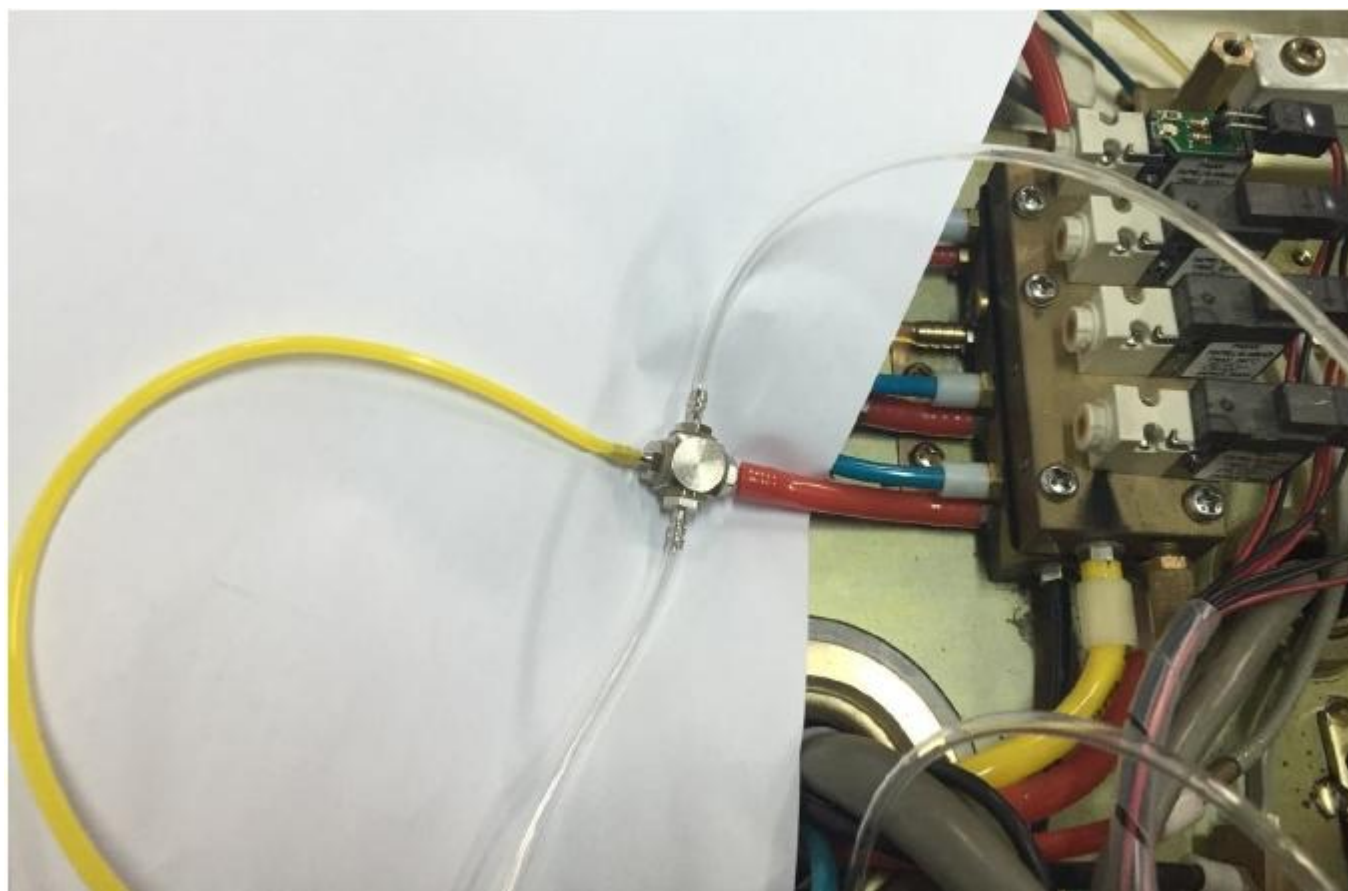

2-10 Соедините тубинг внутренней подачи воды (голубой) к подаче воды (П. 2-5).

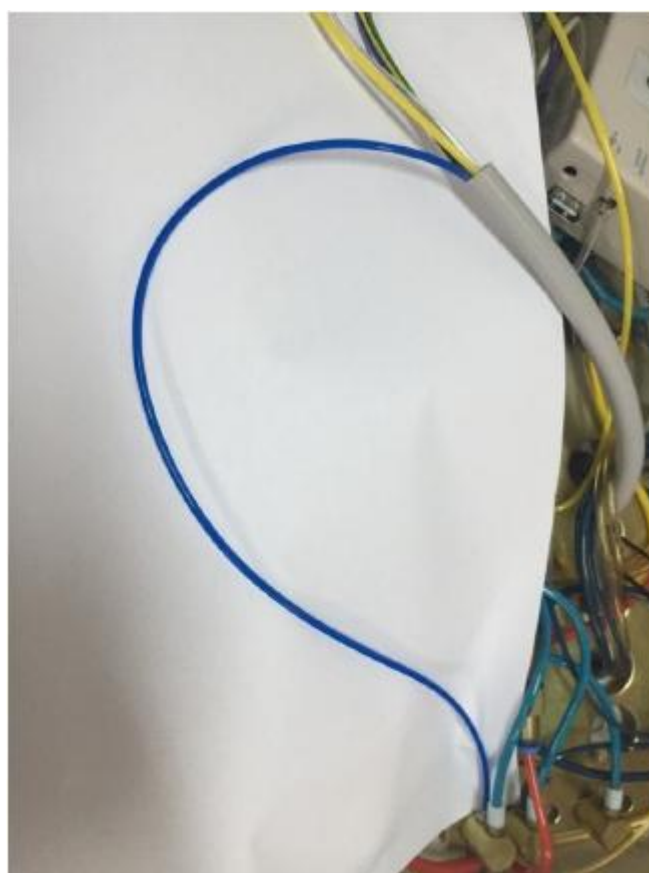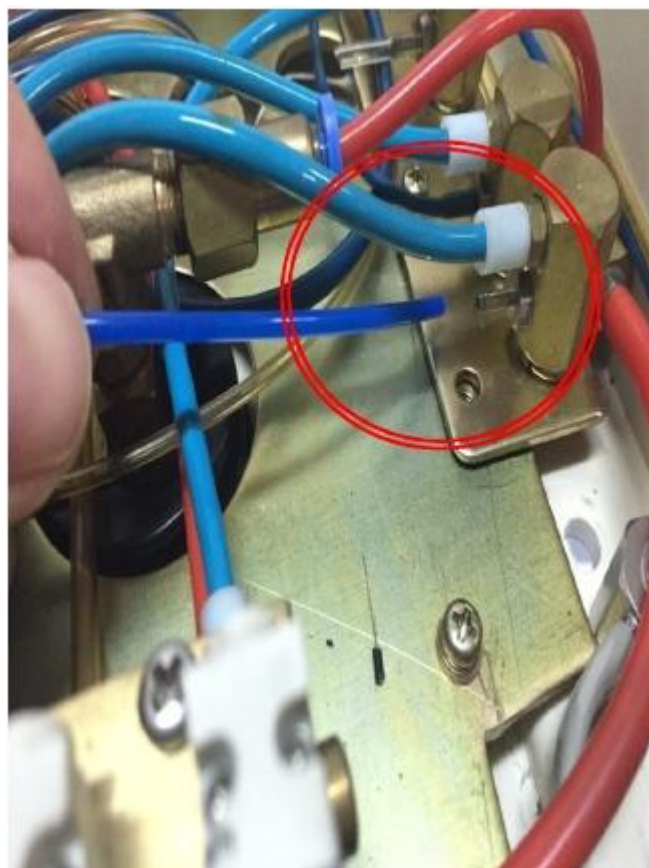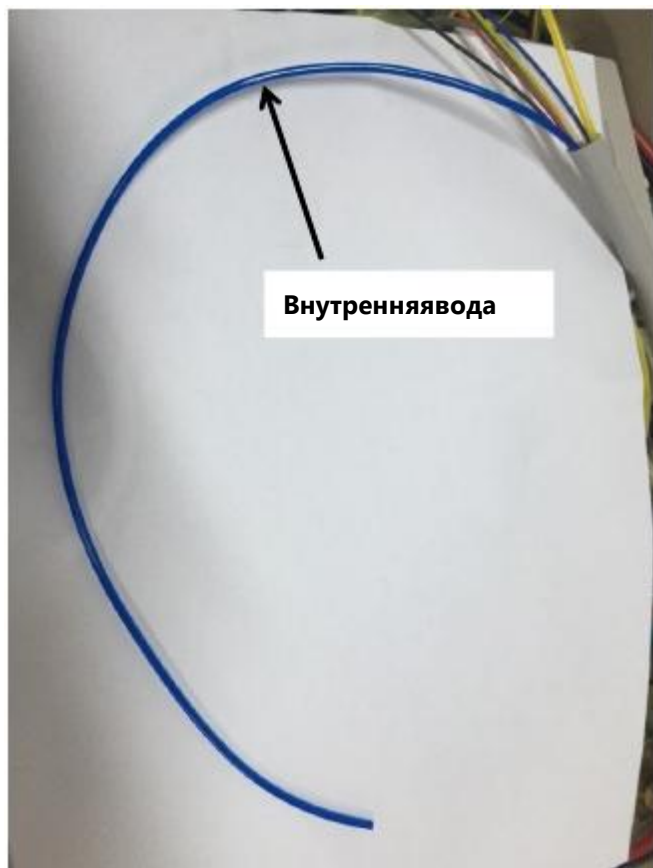


2-11 После соединения кабеля переменного тока в 24В с кабелем основной панели, подсоедините этот кабель к переменному току в установке.

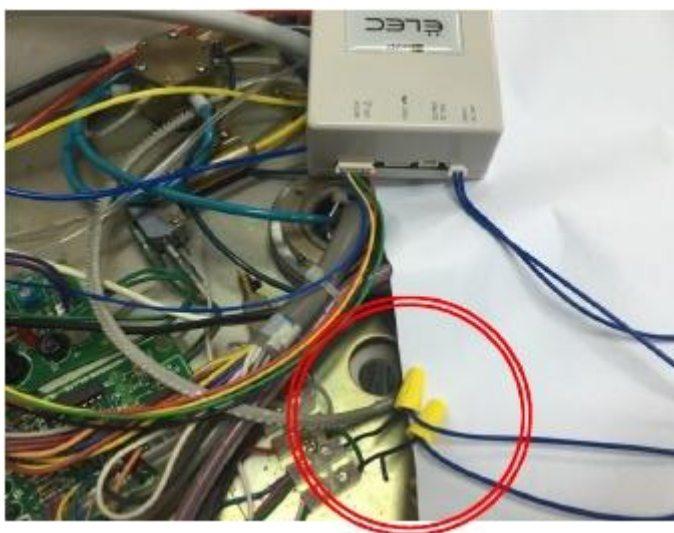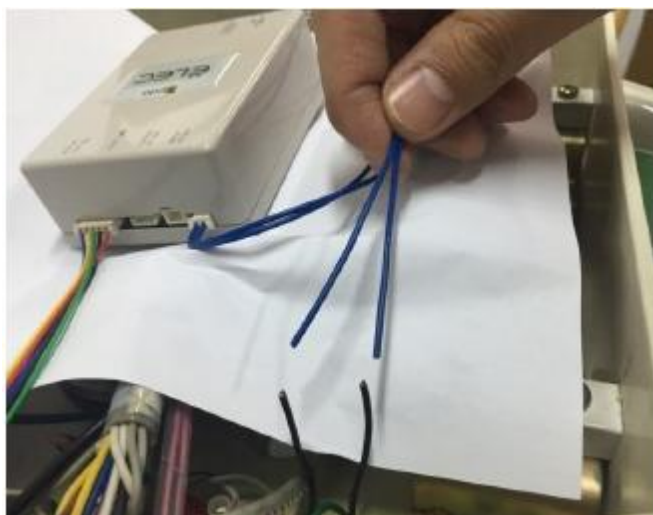

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы получить нормальный вращательный момент, необходимо чтобы была подача переменного тока 24В к мотору. Поэтому если у вас нет возможности подключить подачу тока от установки, установите адаптер, как на картинке ниже.

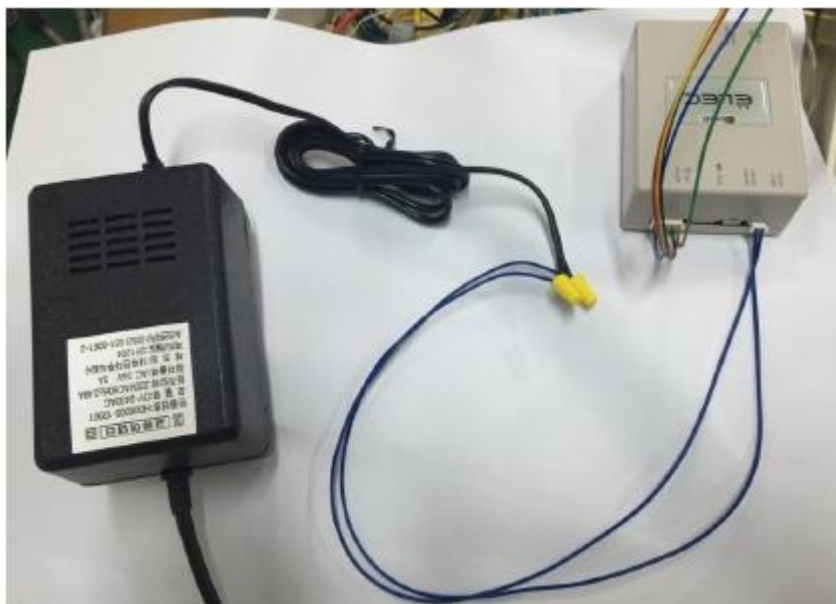

2-12 После присоединения кабеля USB к основной панели, выведите второй разъем из установки, чтобы соединить его с панелью управления.



2-13 Закройте столик врача и закрепите панель управления на столике или где вам удобно.



ВНИМАНИЕ: ЧАСТОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ ИЗНОСА РАЗЪЕМОВ.