



MIO ОТ NSK

БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ МИКРОМОТОР

MIO

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

НАДЕЖНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ МИКРОМОТОР

3 000 - 35 000 об/мин



Powerful Partners®

MIO

ЭТАЛОН ЭКОНО

Плавная бесступечатая регулировка скорости от 3 000 до 35 000 об/мин

Работает при напряжении 100-240 В

Вы можете использовать его в любой точке мира.

Защита мотора

В случае перенапряжения специальный предохранитель прекращает работу микромотора.

Плавное включение и начало работы

Электронное управление обеспечивает очень плавное вращение микромотора при старте, что продлевает его срок службы и повышает надежность.



МОДЕЛЬ

КОД ЗАКАЗА

NE116

U399

- Блок управления
- Питание: 100-240 В, 50/60 Гц
- Размеры: В 77 x Ш 160 x Д 168 (мм)
- Вес: 710 г

МИЧНЫХ МИКРОМОТОРОВ

Высокая точность вращения инструмента

Благодаря высокоточным технологиям, отклонение бора не превышает 0,02 мм.

Быстродействие мотора

Бесколлекторный микромотор, работающий от постоянного тока, отличается быстродействием и плавным набором скорости вращения бора.



МОДЕЛЬ

КОД ЗАКАЗА

MIO MR

Y140802

- Наконечник с микромотором
- Скорость: 3 000-35 000 об/мин
- Размеры: Ø 24 x Д 143 (мм)
- Вес: 191 г

Специальный механизм защиты от пыли... Высокая надежность

Специальный механизм защиты от пыли, встроенный в наконечник, препятствует попаданию в подшипники загрязняющих веществ и тем самым обеспечивает высокую надежность.

Легкий и компактный

Наконечник MIO легкий, компактный и удобно располагается в руке.



МОДЕЛЬ


КОД ЗАКАЗА

MIO-35EM

E236015

- Мотор E-типа
- Скорость: 3 000-35 000 об/мин
- Размеры: Ø 24,5 x Д 77,2 (мм)
- Вес: 104 г

Комплекты MIO

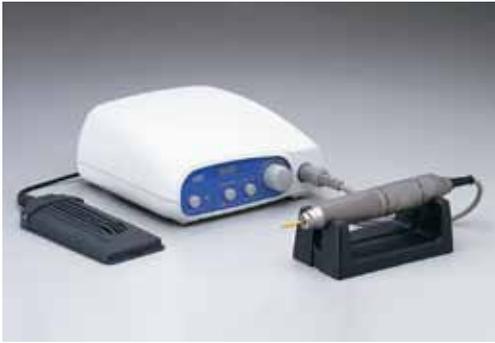

Система со стандартным микромотором

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
MIO MR 230 (230В)	Y140804
MIO MR 120 (120В)	Y140806

Комплектация

- Блок управления
- Наконечник с микромотором
- Педаль
- Подставка для наконечника
- Кабель питания (120 или 230 В)

Технические характеристики

- Скорость: 3 000-35 000 об/мин
- Размеры: Д 143 x Ø 24 (мм)
- Вес: 191 г (без кабеля)



Система с микромотором E-типа без наконечника

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
MIO E 230 (230В)	Y140805
MIO E 120 (120В)	Y140807

Комплектация

- Блок управления
- Микромотор
- Педаль
- Подставка для наконечника
- Кабель питания (120 или 230 В)

Технические характеристики

- Скорость: 3 000-35 000 об/мин
- Размеры: Д 77,2 x Ø 24,5 (мм)
- Вес: 104 г (без кабеля)

Запчасти

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
NE116 Блок управления		U399
MIO MR Наконечник с микромотором UM50		Y140802
MIO-35EM и SCD (микромотор с разъемом E-типа с кабелем)		E236
MIO-35M Микромотор		E235015
MR Наконечник		H203
MIO-35EM Микромотор E-типа		E236015

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
MIO-35SCD Кабель		E235012
FC-11 Педаль управления (вкл. / выкл.)		Z154002
Подставка для наконечника		Z010133
Цанга-2.35A		H203180
Карбоновые щетки (для MIO-35M / MIO-35EM)		E194060
VR-E Наконечник E-типа		H178