



Моюще- дезинфицирующие машины для стоматологии



DS 50 D
DS 50 DRSD

<https://stomshop.pro>

Преимущества DS 50 D

- Мойка и дезинфекция при температуре +93°C (согласно европейским стандартам дезинфекции)
- Автоматические программы для низкой, средней и высокой степени загрязнения инструментов, включающие предварительную мойку, основную мойку и полоскание
- Ручная настройка параметров мойки и сушки (время и температура)
- Информативный LED-дисплей
- Датчик контроля «закрытая дверь»
- Датчик контроля температуры
- Звуковой сигнал при возникновении неисправностей во время работы
- Полная термоизоляция внешней части корпуса
- Система автоматического дозирования дезинфицирующего средства
- Многоступенчатая система фильтрации воды
- Камера вместимостью 60 литров с одним уровнем загрузки
- Верхнее и нижнее размещение вращающихся распылителей жидкости в рабочей камере
- Корзины и держатели для различных типов и размеров инструментов
- Встроенный умягчитель воды (опция)



DS 50 D

Преимущества DS 50 DRSD

- Мойка и дезинфекция при температуре +93 °C (согласно европейским стандартам дезинфекции)
- 20 стандартных заводских программ и 20 дополнительных пользовательских программ
- Ручная настройка параметров мойки и сушки (время и температура)
- Стеклопанель из закаленного стекла
- Мягкое сенсорное управление всеми функциями машины, цветной графический LCD дисплей
- Датчик контроля «закрытая дверь»
- Датчик контроля температуры
- Звуковой сигнал при возникновении неисправностей во время работы
- Полная термоизоляция внешней части корпуса
- Система автоматического дозирования дезинфицирующего средства
- Многоступенчатая система фильтрации воды
- Камера вместимостью 60 литров с одним уровнем загрузки
- Верхнее и нижнее размещение вращающихся распылителей жидкости в рабочей камере
- Корзины и держатели для различных типов и размеров инструментов
- Встроенный USB-разъем для архивирования информации о выполненном цикле
- Датчик уровня воды
- Система принудительной сушки горячим воздухом
- Встроенный умягчитель воды (опция)
- Встроенный принтер ST1 (опция)



DS 50 DRSD

Точная дозировка моющих средств

- Дозаторы для дезинфицирующей жидкости размещены на передней панели, что делает доступ к ним удобным и быстрым. Дозатор открывается простым нажатием на крышку со специальной выемкой для пальцев.



Протоколирование данных

- Встроенный USB-разъем для архивирования информации о выполненном цикле.
- Встроенный принтер ST1 для протоколирования данных о выполненном цикле (опция).



```
T=> 60=C t= 180 s t= 180 s
(T1= 60.5=C) (T2= 60.2=C)

-> 5: Drain T1= 61.7=C T2= 61.6=C h: 09:37

-> 6: Washing T1= 63.6=C T2= 63.5=C h: 09:38
Water2 programmed executed
T=> 0=C t= 30 s t= 30 s
(T1= 61.9=C) (T2= 61.9=C)

-> 7: Drain T1= 62.9=C T2= 63.0=C h: 09:38

-> 8: treatment T1= 91.3=C T2= 91.3=C h: 09:44
Water3 programmed executed
Product3= OK 20 L 20 L
T=> 90=C t= 60 s t= 60 s
(T1= 90.5=C) (T2= 90.4=C)
A0(1)= 1147 A0(2)= 1105

-> 9: Drain T1= 90.6=C T2= 90.7=C h:
T1= 77.6=C T2= 80.1=C
Tmax= 144.8=C
```



Стальное качество

- Камера и коромысло распылителя изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 316L, стойкой к воздействию высоких температур и химических веществ (DIN 1.4404). Внешняя поверхность моделей выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 (DIN 1.4301).
- Внутреннюю конструкцию камеры отличают отсутствие углов, система автоматической очистки резервуаров со скругленными краями, тройная система фильтрации воды. Все модели оснащены надежной системой блокировки дверцы.




Эффективная мойка и предстерилизационная очистка

- Большой выбор корзин и вставок различных размеров позволяет эффективно производить обработку всех инструментов и принадлежностей.
- Оборудование Steelco подходит для мойки и дезинфекции всех стоматологических инструментов и принадлежностей, включая турбинные, прямые и угловые наконечники.




Безопасность стоматологических наконечников

- Для тщательной и бережной мойки и дезинфекции стоматологических наконечников предназначены специальные адаптеры, выполненные из силикона. Адаптеры имеют жесткий крепеж для монтажа в корзине и специальные переходники, позволяющие обрабатывать все типы наконечников разного диаметра:
 - угловые
 - прямые
 - турбинные
- Конструкция адаптера гарантирует тщательную и деликатную промывку и сушку внутренних каналов наконечников без механического износа и каких-либо повреждений.

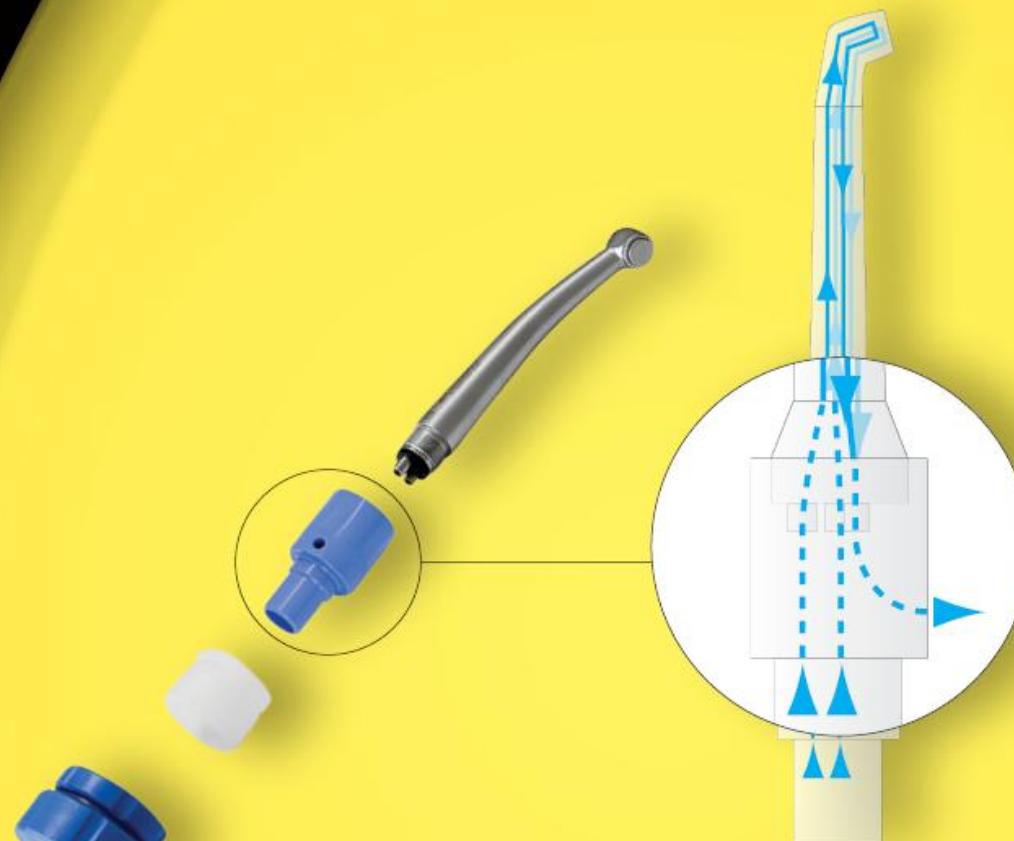

Дезинфекция при максимальной температуре



- Нагрев до +93 °C и выдержка при максимальном температурном режиме от 1 до 10 минут под строгим контролем двух независимых датчиков. Высокий уровень дезинфекции и сушка горячим воздухом менее чем за 60 минут позволяют обеспечить максимальную эффективность предстерилизационной очистки инструментов.

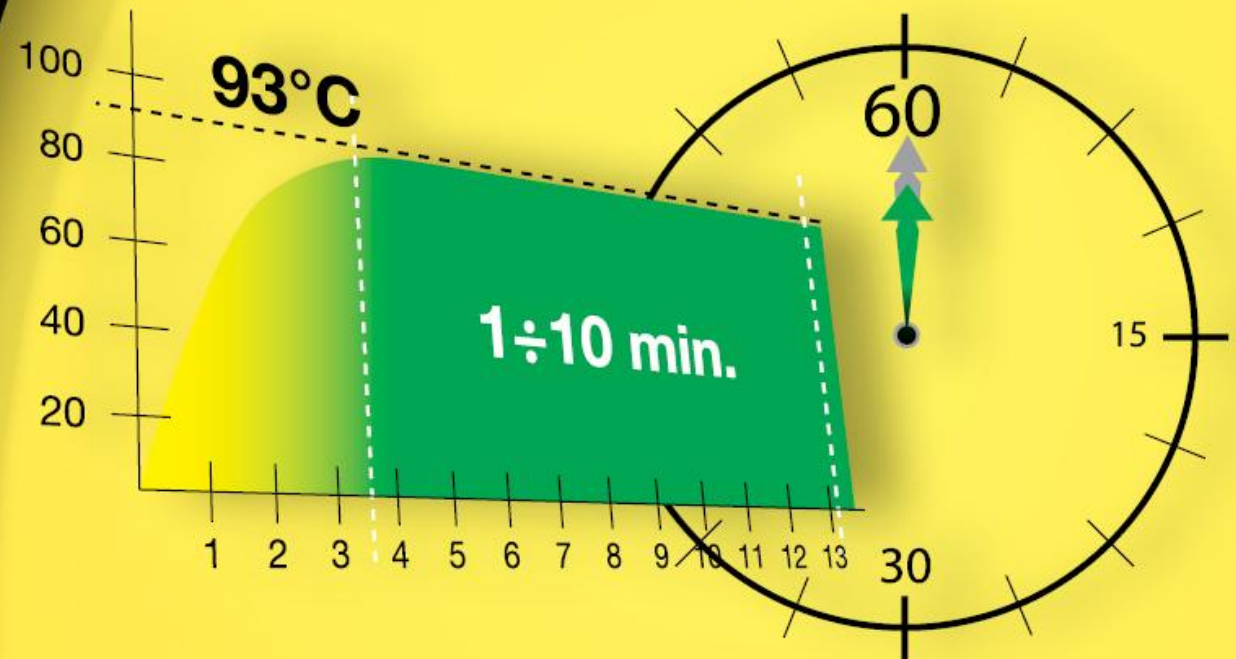

Размеры

- Модель DS 50 D
Размеры (ШхГхВ): 500 x 565 x 535 мм
- Модель DS 50 DRSD
Размеры (ШхГхВ): 570 x 575 x 535 мм

DS 50

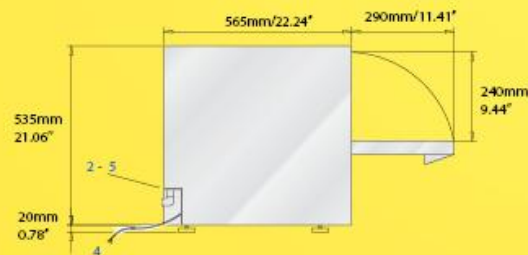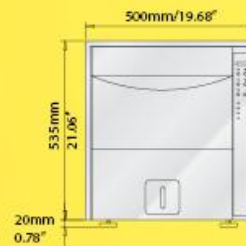

DS 50 DRS

