

alghamix II



ARE YOU A BUBBLE HUNTER?

Оборудование

Автоматический смеситель

<https://stomshop.pro>

Zhermack[®]
CLINICAL 



alghamix II

Компания **ZHERMACK**, мировой лидер в производстве оттискных материалов и стоматологического оборудования, представляет **ALGHAMIX II**, новую версию одного из самых удачных на рынке механических смесителей.

Эргономичный дизайн и **возможность персонализации цвета чашки для замешивания** позволяют **ALGHAMIX II** легко вписаться в любой рабочий интерьер.

Аппарат крайне прост в использовании, обеспечивая при этом идеальное замешивание и полное отсутствие пузырьков воздуха.

ALGHAMIX II обеспечивает механическое замешивание альгинатов, силиконов и зуботехнических гипсов.

Современный дизайн



alghamix II

ПРИМЕНЕНИЕ

■ Замешивание альгината



■ Замешивание силикона



■ Замешивание гипса



Чашка, во фронтальном положении,
упрощает дозировку и замешивание,
обеспечивая **максимальную стабильность**
во время всех стадий обработки.

**Максимальная
стабильность**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

alghamix II

- 2 скорости вращения чашки (120 об/мин – 250 об/мин)
- Эргономичный переключатель скоростей
- Простое и надежное поворотное крепление чашки
- Чашки в ассортименте: маленькая на 350 куб.см – большая на 600 куб.см.
- Цвета чашек: серая, оранжевая, зеленая, голубая, синяя, белая
- Диск с блокнотом для замешивания силиконов
- Не требует смазывания
- Не требует специального ухода





■ **ДВЕ СКОРОСТИ:**

две скорости вращения чашки (медленная и быстрая) позволяют адаптировать процесс замешивания к нуждам и предпочтениям пользователя.

■ **ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:**

переключение скоростей производится одним естественным движением, благодаря эргономичной форме переключателя

■ **УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ:**

удобное и надежное крепление чашки с индикатором положения производится одним вращательным движением

alghamix II

ОСОБЕННОСТИ



■ **ЦВЕТНЫЕ ЧАШКИ ДЛЯ АЛЬГИНАТОВ:**

доступны в 5 цветах по выбору, все цвета по 350 куб.см.



■ **ЧАШКА ДЛЯ ГИПСА:**

доступна в версии 600 куб.см.



■ **ДИСК ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ СИЛИКОНОВ:**

доступен в комплекте с блокнотом на 20 листов.



ALGHAMIX II доступен в сочетании
с легко очищающимися чашками 6
различных цветов.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

alghamix II



Разработан таким образом, чтобы как можно легче
вписываться в рабочий интерьер, и может быть
персонализирован с помощью разноцветных чашек
самых популярных оттенков.




ALGHAMIX II обеспечивает максимальную
однородность смешивания
и полное отсутствие комочков и воздушных
пузырьков.

ALGHAMIX II уменьшает время
замешивания на 30%.*

alghamix II НАГЛЯДНОЕ КАЧЕСТВО



Увеличенный фрагмент
замешанного вручную альгината

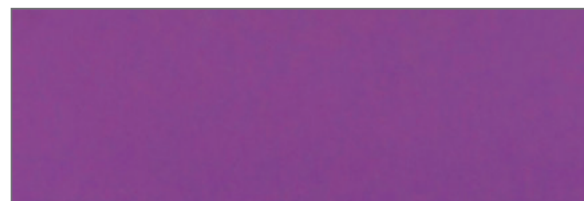

Увеличенный фрагмент альгината
после автоматического замешивания с
помощью ALGHAMIX II

*Источник: внутренние данные Zhermack



alghamix II

Модели Стандартные комплектующие

Код	Модель	Внешние габариты	Вес	Питание	Мощность	Модель
C303215	ALGHAMIX II 115V	Д 270 – Ш 170 – В 210 мм	3 кг	115 В ± 10 50/60 Гц	50 Ватт	Чашка для альгинатов 350 куб.см, серая
C303230	ALGHAMIX II 230V	Д 270 – Ш 170 – В 210 мм	3 кг	115 В ± 10 50/60 Гц	50 Ватт	Шпатель для альгинатов
C303231	ALGHAMIX II 230V UK	Д 270 – Ш 170 – В 210 мм	3 кг	115 В ± 10 50/60 Гц	50 Ватт	

Аксессуары

XR0250600	Чашка 350 куб.см, голубая	XR0250650	Чашка для гипсов 600 куб.см, серая
XR0250601	Чашка 350 куб.см, оранжевая	XR0250670	Диск для замешивания силиконов с блокнотом на 20 листов
XR0250602	Чашка 350 куб.см, синяя	C300990	Цветные шпатели 6 шт.
XR0250603	Чашка 350 куб.см, зеленая	C303030	Смесительный блокнот с дозировочной шкалой для Alghamix II
XR0250604	Чашка 350 куб.см, белая	C207200	Шпатель для силиконов
XR0250606	Чашка 350 куб.см для альгината, серая		

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
+1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7870 690 811
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack®
BEYOND INNOVATION